

FLUX DE TRAVAIL STRAUMANN® REVEX™



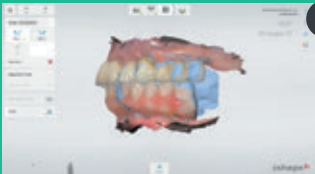






De la restauration provisoire à définitive.

Avant de commencer avec le flux de travail Straumann® RevEX™, il est essentiel de vérifier l'ajustement passif de votre restauration provisoire. Si l'ajustement n'est pas passif, vous pouvez segmenter et coller votre restauration provisoire dans la bouche du patient. Vérifiez ensuite l'ajustement passif.

CABINET

4–6 mois après la pose des implants et de la restauration provisoire

LABORATOIRE

<p>1^{re} visite Empreinte numérique</p> 	 <p>1</p> <p>Réglage de la caméra intra-orale pour bridge transvissé.</p>	 <p>4</p> <p>Scan intra-oral en occlusion</p>	 <p>7</p> <p>Importation de tous les fichiers STL dans le logiciel CAD/CAM, avec la conception correspondante ou utiliser le flux de travail wax-up pour créer la restauration provisoire et le gabarit de vérification.</p>
	 <p>2</p> <p>Scan intra-oral de l'arcade opposée.</p>	 <p>5</p> <p>Scan intra-oral du tissu mou avec les parties secondaires vissées en place.</p>	 <p>8</p> <p>Usinage du prototype et du gabarit de vérification.</p>
	 <p>3</p> <p>Scan intra-oral avec la prothèse provisoire vissée en place.</p>	 <p>6</p> <p>Scan extra-oral de la restauration provisoire avec les corps de scanage Straumann® RevEX™ en place.</p>	

*Si vous remarquez un écart entre le tissu mou et la restauration, nous recommandons le réalignement de la restauration provisoire, avant de commencer avec le flux de travail RevEX.

CABINET

LABORATOIRE

2^e visite

Essai du prototype usiné et du gabarit de vérification



Essai du prototype pour évaluer la conception, l'esthétique et l'élocution. Le cas échéant, régler l'ajustement passif sur le gabarit de vérification.

3^e visite

Livraison



Livraison de la restauration définitive.



Conception et fabrication de la restauration définitive.

Commander le corps de scannage Straumann® RevEX™

Réf	Produit
025.0082	Corps de scannage/RevEX SRA 3.5
025.0083	Corps de scannage/RevEX SRA 4.6



En savoir plus sur
straumann.com/revex

International Headquarters

Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2023. Tous droits réservés.

Straumann® et/ou les autres marques commerciales et logos de Straumann® mentionnés ici sont des marques commerciales ou des marques déposées de Straumann Holding AG et/ou de ses sociétés affiliées.

