

EINE NEUE LÖSUNG
ARBEITSPROTOKOLL
NEODENT[®] CERAMIC IMPLANT SYSTEM



Ceramic
Implant System



ZiLock[®]
Verbindung

| Zi Implantat Ø 3.75 mm - Chirurgie

| Zi Implantat Ø 4.3 mm - Chirurgie

| Prothetik



Ø 3.75

CHIRURGIE

NEODENT®

Implantat-
längen



10.0 180.002
 11.5 180.003
 13.0 180.004

Bohrsequenz
für **alle**
Knochen-
klassen



1
 Initialbohrer
 (optional)
 103.170



2
 Ø 2.0
 103.425



3 Ø 3.5
 103.562 Kurz
 103.561 Mittel
 103.563 Lang



4 Ø 3.75
 103.565 Kurz
 103.564 Mittel
 103.566 Lang

Richtungs-
indikator



Ø 3.0/3.75
 128.020

Bohrsequenz
für Knochen-
klassen I,
II und III



5
 Versenkbohrer Ø 3.75
 103.488

Bohrsequenz
für Knochen-
klassen
I und II



6
 Knochengewindeschneider Ø 3.75
 111.046

Einheilphase



Zi-Abdeck-
schraube
 117.023



Zi-Gingivaformer
 106.233 3.75x1.5 mm
 106.234 3.75x2.5 mm
 106.235 4.5x1.5 mm
 106.236 4.5x2.5 mm

Schrauben-
dreher und
Drehmoment-
schlüssel




Neo Hand-
schraubendreher
 104.058 Kurz
 104.060 Mittel
 104.059 Lang



Implantat-
schraubendreher für
Winkelstück
 105.002



Implantat-
schraubendreher für Drehmoment-
schlüssel (kurz)
 105.001

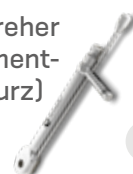

Dreh-
moment-
schlüssel
 104.050

Ø 4.3

CHIRURGIE

NEODENT®

Implantat-
längen



10.0 180.006
 11.5 180.007
 13.0 180.008

Bohrsequenz
für alle
Knochen-
klassen



1
 Initialbohrer
 (optional)
 103.170



2
 Ø 2.0
 103.425



3 Ø 3.5
 103.400 Kurz
 103.399 Mittel
 103.401 Lang



4 Ø 4.3
 103.409 Kurz
 103.408 Mittel
 103.410 Lang

Richtungs-
indikator



Ø 3.6/4.3
 128.022

Bohrsequenz
für Knochen-
klassen I,
II und III



5
 Versenkbohrer Ø 4.3
 103.450

Bohrsequenz
für Knochen-
klassen
I und II



6
 Knochengewindeschneider Ø 4.3
 111.048

Einheilphase



Zi-Abdeck-
schraube
 117.023



Zi-Gingivaformer
 106.233 3.75x1.5 mm
 106.234 3.75x2.5 mm
 106.235 4.5x1.5 mm
 106.236 4.5x2.5 mm

Schraub-
dreher und
Drehmoment-
schlüssel




Neo Hand-
schraubendreher
 104.058 Kurz
 104.060 Mittel
 104.059 Lang



Implantat-
schraub-
dreher für
Winkelstück
 105.002



Implantat-
schraub-
dreher für Drehmoment-
schlüssel (kurz)
 105.001

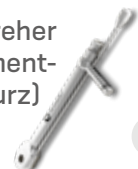

Dreh-
moment-
schlüssel
 104.050



Wahl des Sekundärteils



Zi-Basis

- 135.254 3.75x4x1.5 mm
- 135.255 3.75x4x2.5 mm
- 135.256 4.5x4x1.5 mm
- 135.257 4.5x4x2.5 mm



Zi-Basis für C

- 135.258 4.65x4.70x1.5 mm
- 135.259 4.65x4.70x2.5 mm



CR Sekundärteil

- 114.854 4.0x5.0x1.5 mm
- 114.855 4.0x5.0x2.5 mm
- 114.856 4.5x5.0x1.5 mm
- 114.857 4.5x5.0x2.5 mm



CR Sekundärteil 17°

- 114.858 4.0x5.0x1.5 mm
- 114.859 4.0x5.0x2.5 mm
- 114.860 4.5x5.0x1.5 mm
- 114.861 4.5x5.0x2.5 mm

Abformung



Scankörper für Implantat

- 108.184



Exact Abformpfosten für Zi-Basis-Implantat, offener und geschlossener Löffel

- | Normal | Lang |
|---------|---------|
| 108.186 | 108.187 |
| 108.188 | 108.189 |

Modellherstellung



Repositionierbares Hybridanalog

- 101.080



CR Sekundärteil-analog

- 101.105 4.0x5.0 mm
- 101.106 4.5x5.0 mm

Provisorische Versorgung



PEEK CR Sekundärteil

- 114.888 4.0x5.0x1.5 mm
- 114.889 4.0x5.0x2.5 mm
- 114.886 4.5x5.0x1.5 mm
- 114.887 4.5x5.0x2.5 mm



Abformpfosten / Provisoriumskappe

- 108.201 4.0x5.0 mm
- 108.202 4.5x5.0 mm

Endgültige Kappe



CARES Visual



3Shape



Dental Wings



Exocad



Ausbrennbare Kappe

- 118.343 3.75x4 mm
- 118.325 4.5x4 mm



Ausbrennbare Kappe für CR Sekundärteil

- 118.367 4.0x5.0 mm
- 118.368 4.5x5.0 mm

Schraubendreher



Neo Hand-schraubendreher

- 104.058 Kurz
- 104.060 Mittel
- 104.059 Lang



Neo Schraubendreher für Drehmomentschlüssel

- 105.133 Kurz
- 105.132 Mittel
- 105.134 Lang

© 2023 – JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. All rights reserved. All brands listed in this material, registered or not, are the property of JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. The reproduction of this material without prior authorization is prohibited. Some products may not be available for purchasing yet. For further information, please contact your local distributor.

Neodent, Acqua, Helix GM, Grand Morse, are trademarks or registered trademarks of JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. Dentsply Sirona is a trademark or registered trademark of Dentsply Sirona, Inc. MEDENTiKA is a trademark or registered trademark of Medentika GmbH. Novaloc is a trademark or registered trademark of Valoc AG. Amann Girrbach is a trademark or registered trademark of Amann Girrbach AG.

1016_neodent_gm_brochure_en_eU_E00_hr_211222

NUOVI SORRISI OGNI GIORNO

CHAQUE JOUR DE NOUVEAUX SOURIRES

новые улыбки каждый день

JEDEN TAG EIN NEUES LÄCHELN

NUEVAS SONRISAS TODOS LOS DÍAS

NYA LEENDEN VARJE DAG

NEW SMILES EVERY DAY

Hersteller

JJGC Indústria e Comércio
de Materiais Dentários S.A.
Juscelino Kubitschek de
Oliveira Avenue, 3291
81270-200 Curitiba (PR)

National Distributor

Institut Straumann AG
Straumann Group Schweiz
Peter Merian-Weg 12
Postfach
CH-4002 Basel
www.neodent.ch

Kundenberatung / Bestellannahme

Tel. Bestellung: 0800 810 812
Tel. Beratung: 0800 810 814
Tel. Digitaler Support: 0800 810 816
E-Mail: sales.ch@straumann.com
Online: www.straumann.ch/eshop

CHAQUE JOUR DE NOUVEAUX SOURIRES

Ihr Widerspruchsrecht: Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen möchten, genügt jederzeit eine Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per E-Mail an privacy.ch@straumann.com oder per Post an Institut Straumann AG, Datenschutzbeauftragter, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel. Dies gilt ebenso, wenn Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen wollen.

NUOVI SORRISI OGNI GIORNO

 **NEODENT**[®]
A Straumann Group Brand

