

MANUAL DE USO

Cosmos Plus | **Full Arch**

Resina para impressão 3D de Prótese Total e Parcial permanentes.



INSTRUÇÕES PARA APRESENTAÇÕES DE 250g e 500g

Antes de adicionar a resina ao reservatório da impressora, é imprescindível homogeneizá-la adequadamente.




PASSO 1:

Coloque o frasco em um agitador de rolos por **30 minutos** ou misture manualmente utilizando uma espátula plástica até obter a completa homogeneização.



PASSO 2:

Aqueça a resina em banho-maria, mantendo a temperatura entre **28°C e 32°C**.

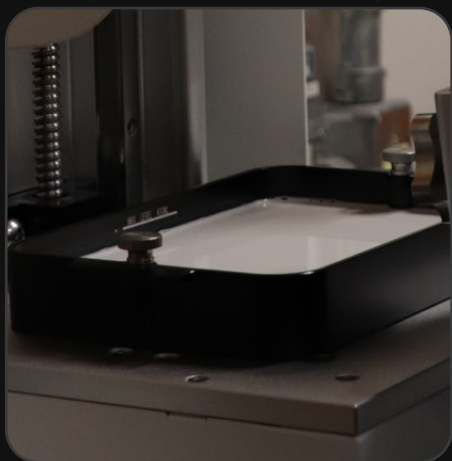

PASSO 3:

Adicione a quantidade de resina no reservatório, conforme o nível do mesmo.

IMPRESSÕES DOS DISPOSITIVOS FINAIS

Após homogeneização, aquecimento da resina e aprovação do arquivo de calibração, siga para a impressão de **dispositivos finais**.

Após a impressão 3D, remova os dispositivos impressos da plataforma. As demonstrações apresentadas a seguir foram realizadas utilizando **Cosmos Plus Full Arch Bleach**. (Figura 1)

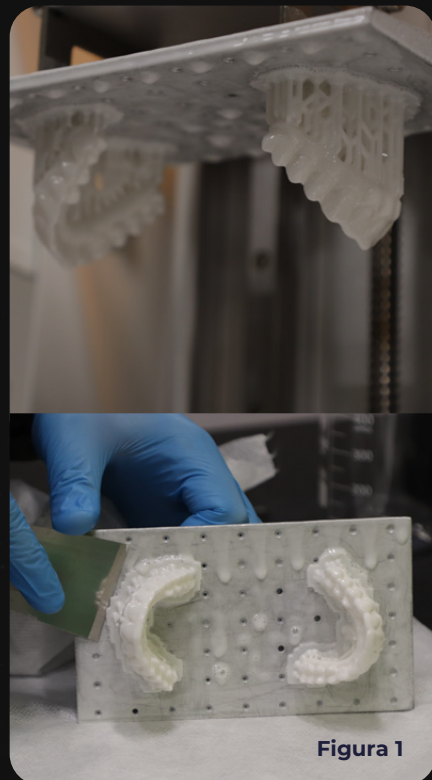


Figura 1

Caso os dispositivos contenham suportes, proceda com a **remoção cuidadosa** dos mesmos antes de realizar a etapa de limpeza (Figura 2). Após, siga com as etapas de **limpeza, secagem e pós cura**.



Figura 2

PROCESSO DE LIMPEZA

Foram desenvolvidos dois métodos de limpeza distintos para os dispositivos impressos utilizando a resina

Cosmos Plus Full Arch:

limpeza **manual** e limpeza utilizando **banho de ultrassom**.

Recomenda-se a utilização de

Cosmos Plus Composite Cleaning Solution

como solução de limpeza em ambos os métodos.

NOTA 1: Não recomendamos o uso de álcool etílico ou isopropílico, pois ocasionará o esbranquiçamento dos dispositivos impressos. A seguir, apresenta-se um comparativo do aspecto final obtido com o uso de Cosmos Plus Composite Cleaning Solution em contraste com o uso de álcool isopropílico (Figura 3). Visando uma melhor representação dos resultados, ambos os arcos totais demonstrados na Figura 3 foram impressos com Cosmos Plus Full Arch B1.



Figura 3



LIMPEZA UTILIZANDO MÉTODO MANUAL

As demonstrações apresentadas a seguir foram realizadas utilizando **Cosmos Plus Full Arch Bleach**.

Método de limpeza manual descrito na bula de **Cosmos Plus Full Arch**:

- Coloque os dispositivos dentro de um béquer e adicione Cosmos Plus Composite Cleaning Solution até cobrir os dispositivos (Figura 4a) e deixe por **1 minuto** (Figura 4b).
- Após escove com auxílio de uma escova dental por **1 minuto** (Figura 4c). Esse processo deve ser repetido por **3 vezes**, sempre trocando o Cosmos Plus Composite Cleaning Solution.

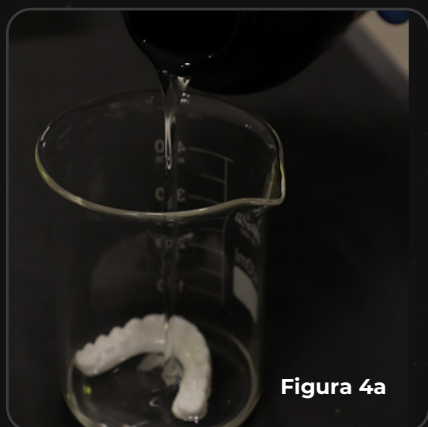


Figura 4a

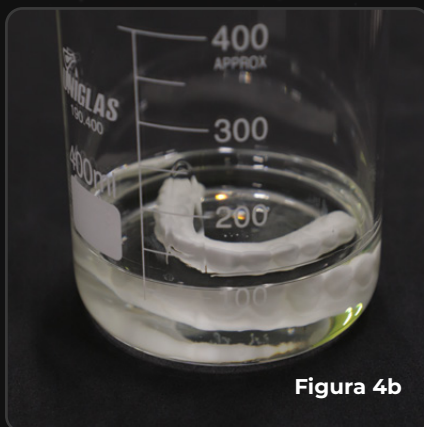


Figura 4b

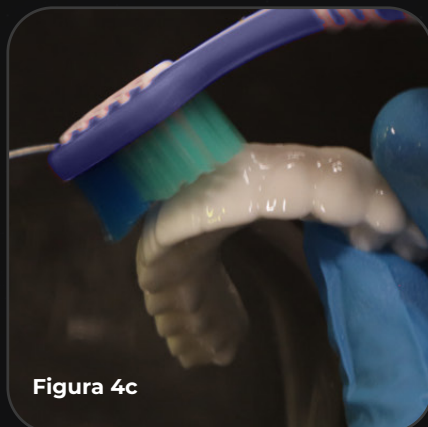


Figura 4c




NOTA 2: Cosmos Plus Composite Cleaning Solution **não pode ser aquecido**.

NOTA 3: Para a aplicação deste método, recomenda-se o uso de um béquer com capacidade de **400 mL**, contendo **100 mL** da solução, destinada à realização do procedimento de **imersão seguido de escovação**. Esse processo **deve ser repetido por 3 vezes**, sempre trocando o Cosmos Plus Composite Cleaning Solution.

LIMPEZA UTILIZANDO BANHO DE ULTRASSOM

- Coloque o dispositivo dentro de um béquer e adicione Cosmos Plus Composite Cleaning Solution até cobrir o dispositivo (Figura 5a) e deixe por **3 minutos no ultrassom** (Figura 5b).

- Após, retire do ultrassom (Figura 5c) e coloque em um novo Cosmos Plus Composite Cleaning Solution por **3 minutos em repouso** (Figura 5d).

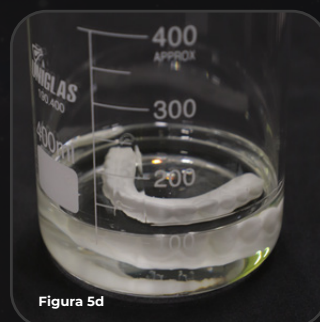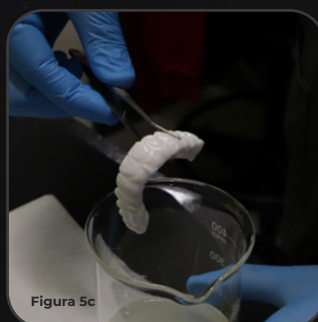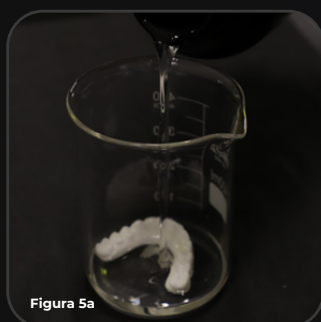

NOTA 4: Cosmos Plus Composite Cleaning Solution **não pode ser aquecido**.

NOTA 5: Para a aplicação deste método, composto por duas etapas: imersão em Cosmos Plus Composite Cleaning Solution utilizando ultrassom e imersão em Cosmos Plus Composite Cleaning Solution em repouso, recomenda-se a utilização de um béquer de **400mL**. Na **primeira etapa**, correspondente à etapa utilizando ultrassom, deve-se utilizar **150mL** da solução no béquer. Esse volume foi determinado considerando tanto a necessidade de submersão completa dos dispositivos odontológicos impressos quanto a estabilização adequada do recipiente no equipamento de ultrassom.

Na **segunda etapa**, correspondente à imersão em repouso em Cosmos Plus Composite Cleaning Solution, recomenda-se a utilização de **100mL** da solução.

SECAGEM DAS AMOSTRAS

A secagem dos dispositivos impressos deve ser realizada com o uso de **ar comprimido** (Figura 6a), de forma **suave**, com o objetivo exclusivo de remover o excesso de Cosmos Plus Composite Cleaning Solution depositado sobre as peças.

NOTA 6: Deve-se evitar a secagem excessiva do dispositivo, sendo desejável que este apresente aspecto brilhoso após o processo (Figura 6b).

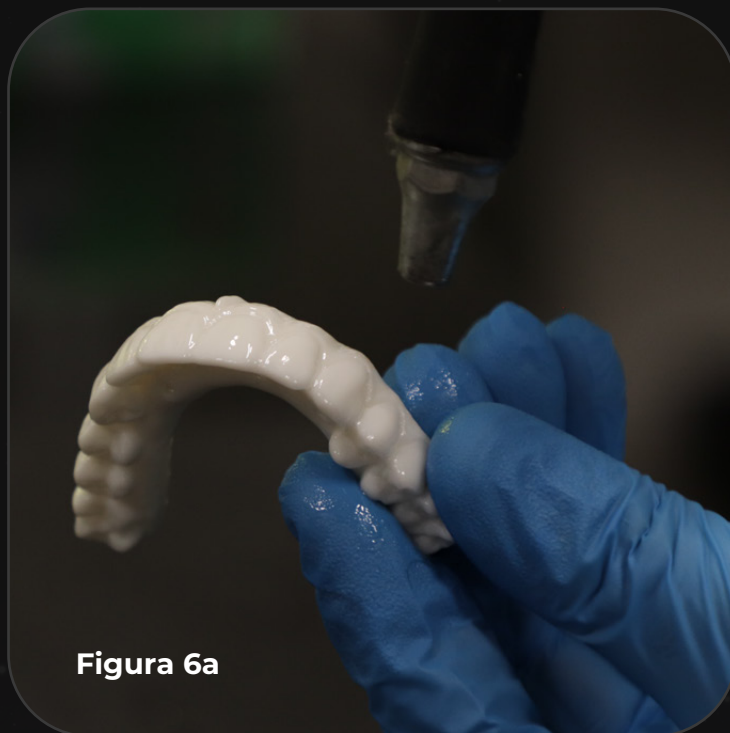


Figura 6a

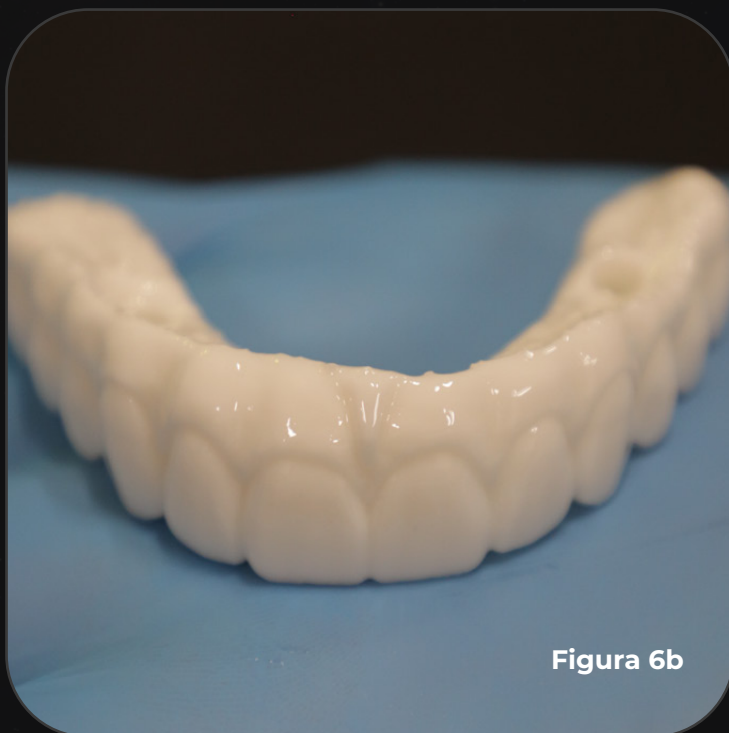


Figura 6b

PÓS CURA

A pós-cura dos dispositivos impressos deve ser realizada imediatamente após a secagem com ar comprimido. Podem ser utilizados os seguintes métodos para esse processo:

EQUIPAMENTO	PARÂMETRO	TEMPO
Pcure	Upper + Lower, 100%	20 minutos
Pionext	Todos os LEDs ligados	10 minutos
Anycubic	N/A	60 minutos
Câmara UV 72W	Virar os dispositivos em 30 minutos	60 minutos
Câmara UV 36W	Virar os dispositivos em 30 minutos	60 minutos
Otoflash	2000 ciclos de cada lado, totalizando 4000 ciclos	N/A

NOTA 7: utilize os equipamentos indicados para a realização da pós cura ou equipamentos com especificações equivalentes.

RESULTADO PÓS-CURA

A Figura 7 demonstra o resultado do dispositivo odontológico após a pós cura.



Figura 7

ACABAMENTO

Realize o polimento para retirar as marcas de suporte e após realize o processo de maquiagem (Figura 8a/8b), conforme instruções do fabricante. Para finalizar realize a imersão do dispositivo em **álcool 70°** por **10 minutos**.



Figura 8a



Figura 8b



YLLER

A Neodent Brand

 [YLLER.COM.BR](https://yller.com.br)

 [@YLLEROFICIAL](https://www.instagram.com/ylleroficial)

 [@YLLERBIOMATERIAIS](https://www.youtube.com/yllerbiomateriais)