



WILLKOMMEN AM MONT BLANC



UNSER VERSPRECHEN

Wir eröffnen neue Wege für eine leistungsfähige und vorhersagbare Implantologie.

Wir bieten Gelassenheit mit langfristiger Leistung und hervorragenden Ergebnissen.

Mit unserer benutzerfreundlichen Produktlinie bieten wir einen Mehrwert, um die Bedürfnisse aller Patienten zu erfüllen.

UNSERE IDENTITÄT

Industrieexperten – mehr als 70 Jahre Erfahrung in medizinischen Geräten und fortschrittlicher Fertigungstechnologie.

Spezialisten für Zahnimplantate – 30 Jahre Know-how und Produktion von Hochpräzisionsimplantaten.

Familiengeist – ein Augenmerk liegt auf der familiären Beziehung zu und zwischen unseren Kunden.

Eine Implantatstrategie – beim prothetischen Lösungsansatz gehen Innovation und Einfachheit Hand in Hand.



PRODUKTHIGHLIGHTS

EIN AXIOM SORTIMENT EINE KASSETTE



- Jedes Axiom Implantat von 3,4 – 6,4 mm kann gesetzt werden.
- **Maximierte Einfachheit** durch die **Trilobverbindung**. Jedes Implantat und jeder Durchmesser hat dieselbe konische prothetische Innenverbindung.



axiom^{REG}

Parallelwandig mit progressive Verankerung für die **meisten Indikationen**, inklusive Sinuslift



Ø 3,4 – 5,2 mm

axiom^{X3}

Ist allen Herausforderungen von D1-D4 gewachsen. Maximierter **Knochenerhalt** durch innovatives Design, **selbstschneidend** für optimale Primärstabilität und Sofortversorgung



Ø 3,4 – 6,4 mm

axiom^{PX}

Apikal zulaufendes Implantat mit schneidendem Design für **Sofortversorgung** und Knochen mit **geringer Dichte**




Ø 3,4 – 5,2 mm

INTEGRAL GUIDED SURGERY



- **Schaftgeführte, umfassende und flexible** Guided-Surgery-Lösung.
- **Für alle Fälle** der geführten Implantatchirurgie.

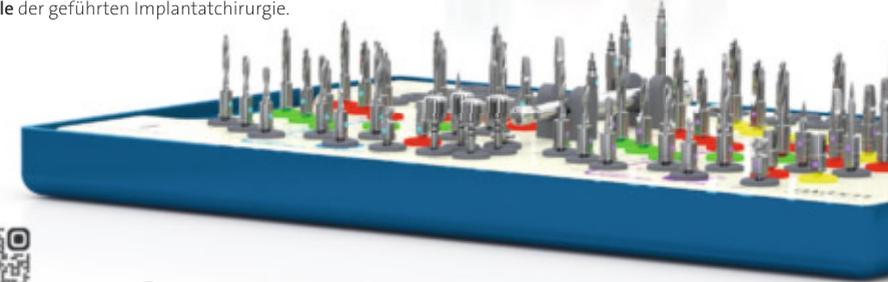

STARKER HALT AM KNOCHEN DURCH AUßERGEWÖHNLICHE OBERFLÄCHE BEI ALLEN IMPLANTATEN

- **Oberflächenbehandlung** von Implantaten mit **biphasisches Calciumphosphat (BCP)**.
- **Nachgewiesene effektive Osseointegration** in präklinischen Modellen, bestätigt durch klinische Langzeitergebnisse.
- **Sauberkeit** validiert durch eine von Dr. Dirk Duddeck (Uni Köln) durchgeführte **Studie**.
- **Bessere Zytokompatibilität** als glatte und raue Titanoberfläche.



UNSER ZUBEHÖR



- **Exo Safe** – Automatisches Periostom zur Zahnextraktion
- **Osteo Safe** – Automatisches Osteotom zur Knochenkonsolidation und Sinuslift
- **Xpert Unit** – Einfach zu bedienender und intuitiver Chirurgiemotor
- **Torq Control** – Universeller Drehmomentschlüssel. Kompatibel mit allen Implantatsystemen durch eine ISO Verbindung. 7 Drehmomentstufen für einfache Befestigung von Prothetik auch im Seitenzahnbereich
- **Safe Relax** – Automatisches Entfernen von Kronen und Brücken



DEA500043 1 0001

Einzelzahnimplantat getragene Versorgungen		Implantatgetragene mehrgliedrige Versorgungen		
Provisorische Versorgungen	Definitive Versorgung	Sekundärteil	Provisorische Versorgungen	Definitive Versorgung
AxiN Provisoriumskappen verschraubt mit abgewinkeltem Schraubenzugang 	Individuelle verschraubte Einzelzahnrestaurationen AxiN mit abgewinkeltem Schraubenzugang 	Multi-Unit Sekundärteile 	Provisorische Multi-Unit Sekundärteile mit geradem oder abgewinkeltem Schraubenzugang 	CADCAD-Brücken, Suprastrukturen oder Steg auf Multi-Unit 
Verschraubte Provisoriumsekundärteile 	Individuelle verschraubte Zähne, individuelle Sekundärteile für zementierte Versorgungen 	InLink Sekundärteile 	Provisorische InLink Sekundärteile mit geradem oder abgewinkeltem Schraubenzugang 	Flexibase Titanbasis für Multi-Unit 
	Flexibase Titanbasen 	Ästhetische Titansekundärteile für zementierte Versorgungen 		Ausbrennbare Multi-Unit Kappe 
	Vorgefrästes Sortiment, Individuelle Sekundärteile für zementierte Versorgungen 	Standard-Titansekundärteile für zementierte Versorgungen 		CAD/CAD- Brücke oder Suprastrukturen auf InLink 
	Cerec kompatible Titanbasen 			Flexibase Titanbasis für mehrgliedrige Versorgungen, direkt auf Axiom TL 
	Ästhetische Titansekundärteile 			Vorgefrästes Sortiment für individuelle Sekundärteile 
	Standard-Titansekundärteile für zementierte Versorgungen 			

*Die vollständige Übersicht der Prothetik entnehmen Sie bitte unserem Produktkatalog.

© Institut Straumann AG, 2022. Alle Rechte vorbehalten.
 Fotnachweis: Anthogyr – Alle Rechte vorbehalten – Fotos nicht verbindlich.
 Straumann® und/oder andere hier erwähnte Marken und Logos von Straumann® sind Marken oder eingetragene Marken der Straumann Holding AG und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.
 Ihr **Widerspruchsrecht**: Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen möchten, genügt jederzeit eine Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per E-Mail an datenschutz.de@straumann.com oder per Post an Straumann GmbH, Datenschutzbeauftragter, Heinrich-von-Stephan-Strasse 21, 79100 Freiburg. Dies gilt ebenso, wenn Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen wollen.

Straumann Produkte sind CE gekennzeichnet 02/24



Vertrieb
 Straumann GmbH
 Heinrich-von-Stephan-Str. 21
 D-79100 Freiburg
 Tel.: 0761/4501 0
www.straumann.de

Vertrieb
 Straumann GmbH
 FloridaTower
 1210 Wien
 Tel.: +43 1 294 06 60
www.straumann.at

Hersteller
 Anthogyr SAS
 2237 avenue André Lasquin
 74700 Sallanches
 Tel.: +33 (0)4 50 58 02 37
www.anthogyr.de