

axiom[®] x3S

SCHALTEN SIE IN DEN **S-MODE**



**Den Halt fühlen.
Stabilität meistern.**

ANTHOGYR

A Straumann Group Brand



Wenn die Bedingungen extrem sind und
sicherer Halt schwer zu erreichen ist ...

axiom[®] x3S

SINUS - **S**OFT BONE - **S**OCKET



SCHALTEN SIE IN DEN
S-MODE

ANTHOGYR 
A Straumann Group Brand

axiom® x3S

SCHALTEN SIE IN DEN
S-MODE

**Bessere Verankerung
in anspruchsvollen
klinischen Situationen⁽¹⁾**

**OPTIMIERT
FÜR PRIMÄR-
STABILITÄT**

Verbessert die Verankerung und ermöglicht selbst in Knochen geringer Dichte schnellere Belastungsprotokolle.


- Breite Gewindegänge für eine bessere laterale Verankerung und Primärstabilität.
- 3 aktive Schneidnuten für ein effizientes Greifen der Implantatsspitze, insbesondere in frischen Extraktionsalveolen.

**Breite
Gewindegänge**
Laterale
Verankerung

Konisches Design
Knochen-
verdichtung

Abgerundete Spitze
Schützt die
Schneider'sche
Membran

**Gerades
Halsdesign**
Kortikale
Verankerung

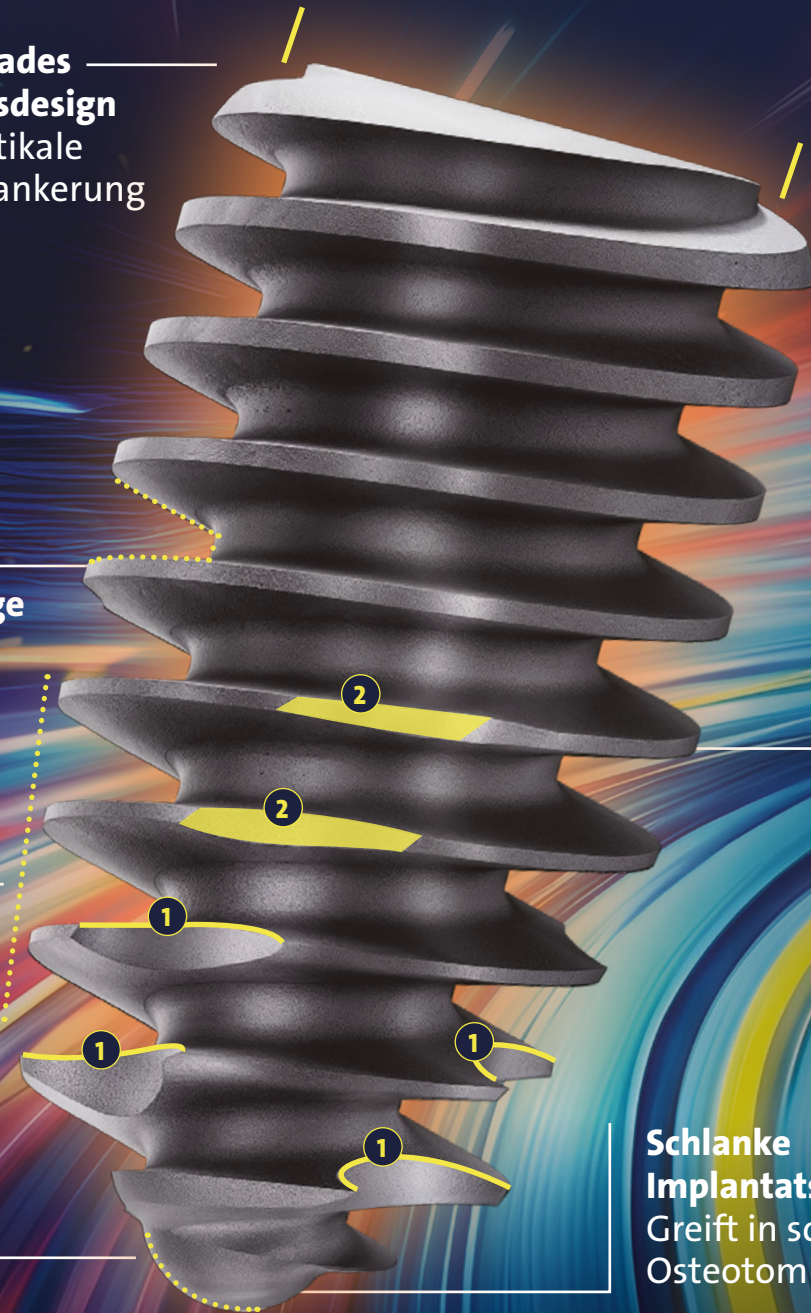


**3 Schneidnuten mit
zwei Funktionen**
Geführte Insertion

Aktive Schneidekante ①
Apikale Verankerung

**Knochenerhalt und
-entnahme** ②
Zur progressiven
Stabilisierung


**Schlanke
Implantatsspitze**
Greift in schmale
Osteotomiestellen

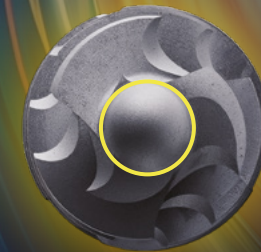

**PROGRESSIVE
KNOCHEN-
VERDICHTUNG.**

Ein Design, das für die schrittweise Stabilisierung entwickelt wurde und bei der Fortsetzung des Behandlungsplans für ein sicheres Gefühl sorgt.

- Konisches Design, das die Knochenverdichtung begünstigt.
- Schneidnuten mit einer den Knochen schonenden Zone zur progressiven Stabilisierung.

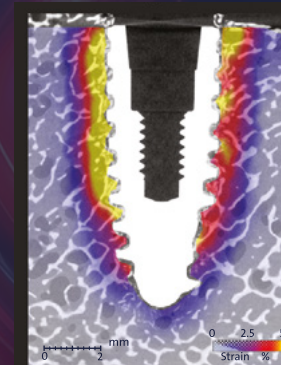

Entlang eines Axiom® X3S Implantats in Knochen geringer Dichte induzierte Knochendeformation.

Ein speziell für Indikationen unter dem Sinusboden entwickeltes Design.

- Gerades Halsdesign für die Verankerung im kortikalen Knochen, selbst in Fällen mit begrenzter Knochenhöhe.
- Abgerundete Implantatsspitze zum Schutz der Schneider'schen Membran.

SINUS – **S**OFT BONE – **S**OCKET


**IHR PARTNER FÜR
INDIKATIONEN
UNTER DEM
SINUSBODEN**

(1) Bei der Umfrage zur internationalen Produkteinführung erreichte Axiom® X3S in der Knochenklasse D3–D4 eine höhere Primärstabilität als Axiom® X3. Daten liegen vor.

axiom®

**1 SYSTEM, 2 MODI FÜR
KLINISCHE LEISTUNG.**

X3S

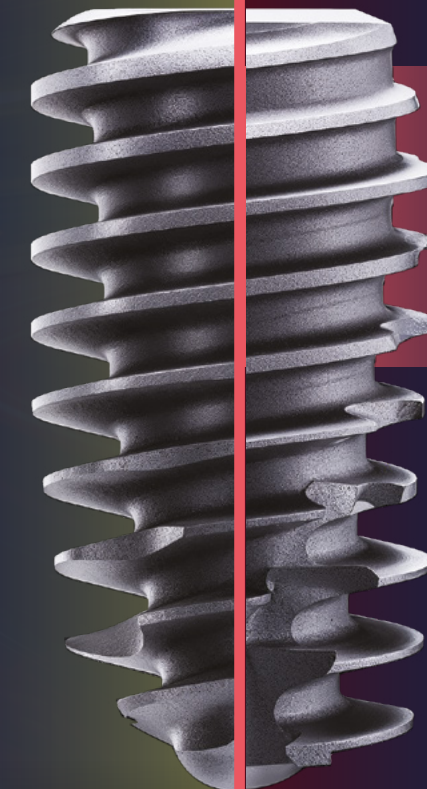

X3



axiom® x3

ERFOLG AUF GANZER LINIE

**Sicherheit für
den Praxisalltag**

- Leistungsstarkes Design für eine stabile Verankerung unabhängig von der Knochenklasse
- Anerkannte Führungsfähigkeit⁽²⁾
- Knochenerhalt⁽³⁾

BONE IS GOLD.

(2) Umfrage vor der Markteinführung von Axiom® X3. Daten liegen vor.
(3) Preiss, Laura et al. "Bone mechanical behavior around dental implants: Densification and deformation follow-up by in-situ computed tomography." *Journal of the mechanical behavior of biomedical materials* vol. 167 (2025): 106966. doi:10.1016/j.jmbbm.2025.106966.




axiom[®]

THE POWER OF **SIMPLICITY** MIT DEM
KNOW-HOW VON ANTHOGRYR



1 einzige
KOMPAKTE
Chirurgie-
kassette

1 EINHEITLICHE
Prothetik-
plattform

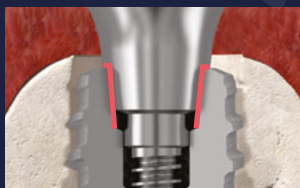

1 PASSGENAUE
konische Verbindung
für langfristige
Knochenstabilität⁽⁴⁾



Nahtlose **INTEGRATION** in den digitalen Workflow.

(4) Esposito et al.. Ten-year post loading outcomes of subcrestally placed implant with internal conical connections at 0,5 mm versus 1,5 mm depth: a multicentre within-person randomised controlled trial. Clinical Oral Implants research. 2026; 0:1-17.

FOLGEN SIE UNS.



www.anthogyr.com

ANTHOGRYR 
A Straumann Group Brand