

Mini Implant SYSTEME



Solution implantaire
mini invasive



Anthogyr
A Straumann Group Brand

Mini Implant SYSTEME

PETIT MAIS PUISSANT

Le Système Mini Implant Anthogyr propose un implant monobloc de petit diamètre, combiné à une connexion prothétique Optiloc® intégrée, dédiée à la stabilisation de prothèses amovibles.

Développez votre activité

- + Couverture plus large des indications pour patients édentés
- + Amélioration de l'acceptation par les patients d'un traitement implantaire, en supprimant l'intervention de régénération osseuse

Solution implantaire mini invasive pour patients édentés

- + Mini Implant monobloc de Ø2.6 mm
- + Connexion prothétique Optiloc®
- + Optimisation du volume tissulaire



Mini Implant SYSTEME

Le Système Mini Implant Anthogyr est indiqué pour les patients avec mandibule et/ou maxillaire totalement édentés, présentant une forte résorption osseuse horizontale. Il propose un traitement mini invasif, sans compromettre la fiabilité et la performance.


EFFICACITÉ

- Profil Anatomique Tissue Favored Design
Optimisation du volume tissulaire



- Mini Implant monobloc Ø2.6 mm
Traitement mini invasif

- Forme cylindro-conique & filet auto-taroudant
 - Bonne stabilité primaire
 - Conçu pour une mise en charge immédiate⁽¹⁾
 - Durée de traitement plus courte

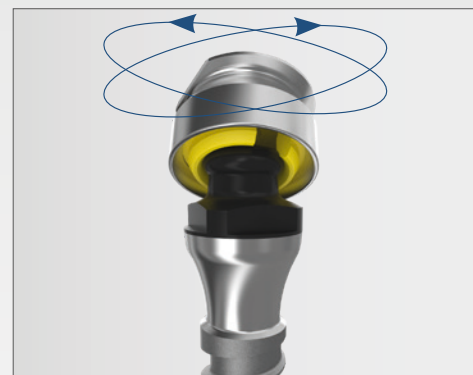

FACILITÉ D'UTILISATION

- Compensation de divergence implantaire jusqu'à 40° entre 2 implants
- Liberté de mouvement de la matrice

FIABILITÉ

- Connexion prothétique Optiloc® intégrée
 - Optimisation de l'espace grâce à une connexion de faible encombrement
 - Résistance à l'usure exceptionnelle et performance durable grâce au contact du revêtement DLC⁽²⁾ de la connexion Optiloc® avec le matériau PEEK de l'insert de rétention
- Titane Médical Grade V⁽³⁾ & traitement BCP⁽⁴⁾
 - Résistance mécanique et performance optimales
 - Propriétés de biocompatibilité et d'ostéo-intégration
- Garantie à vie Anthogyr Serenity®
Confiance dans un système prévisible et durable

ERGONOMIE

- Un kit de chirurgie dédié
 - Ultra-compact et intuitif
 - Protocole de chirurgie simple
 - Kit complet d'instruments faciles à utiliser



FLEXIBILITÉ

- 6 niveaux de rétention
Force de rétention extra-légère à ultra-forte
- 3 versions de matrices
Matrices en titane standard, elliptique et avec option de montage
- 3 longueurs de Mini Implants
10/12/14 mm



¹ Un couple minimum de 35 N.cm doit être atteint

² DLC = Diamond like Carbon

³ Ti6Al-4V-ELI

⁴ BCP = Biphasic Calcium Phosphate



Système Mini Implant, Sourire et confiance retrouvés



+ Accessibilité

- Moins de pièces utilisées, reconversion potentielle de la prothèse existante
- Réduction du temps au fauteuil contribuant à un traitement plus abordable pour les patients



+ Fiabilité de la connexion Optiloc®

- Durabilité : résistance à l'usure et peu d'entretien requis
- Facilité d'utilisation et liberté de mouvement



+ Temps de traitement court

- Approche mini invasive
- Possibilité de mise en charge immédiate de la restauration, offrant au patient un bénéfice immédiat⁽¹⁾

CAMPUS



Formations en implantologie

- **1** bloc de chirurgie et **1** laboratoire de prothèse
- **800** professionnels dentaires formés chaque année
- Conférences, chirurgies live, workshops
- Au pied du Mont-Blanc entre Chamonix et Genève
- Webinars disponibles sur la plateforme Campus



C211-A-2024-02

Crédits photos : Anthogyr, Valoc, Getty images, Godefroy de Maupeou.

Tous droits réservés, photos non contractuelles.

Dispositifs médicaux à destination des professionnels de la médecine dentaire.

Non remboursés par la Sécurité Sociale. Classes I, IIa et IIb. CE0459. LNE/G-MED. Fabricant : Anthogyr.

Lire attentivement les instructions figurant dans les notices et manuels d'utilisation.

Follow us!



www.anthogyr.fr

Anthogyr
A Straumann Group Brand