

# Mini Impianto SISTEMA



Soluzione  
implantare  
mininvasiva



**Anthogyr**  
A Straumann Group Brand

## Mini Impianto SISTEMA

### PICCOLI MA POTENTI

Il Sistema di Mini Impianto Anthogyr offre un impianto monopezzo di piccolo diametro, combinato con una **connessione protesica Optiloc® integrata**, indicato per la stabilizzazione di overdenture rimovibili.

## Incrementa il tuo studio

- + Maggiore copertura delle indicazioni per i pazienti edentuli
- + Migliore accettazione del trattamento implantare da parte del paziente, eliminando la necessità di rigenerazione ossea

## Soluzione implantare mininvasiva per pazienti edentuli

- + Mini Impianto monopezzo  $\varnothing 2,6$  mm
- + Connessione protesica Optiloc®
- + Ottimizzazione del volume dei tessuti molli



## Mini Impianto SISTEMA


Il Sistema di Mini Impianto Anthogyr è indicato per pazienti con mandibola e/o mascella completamente edentula e grave riduzione della disponibilità di osso orizzontale. Consente un trattamento mininvasivo, senza compromettere affidabilità e prestazioni.

### EFFICIENZA

- Design favorevole per i tessuti  
Ottimizzazione del volume dei tessuti molli



- Mini Impianto monopezzo Ø2,6 mm  
Trattamento mininvasivo
- Forma cilindrica conica e filettatura autofilettante
  - Buona stabilità primaria
  - Possibile carico immediato<sup>(1)</sup>
  - Tempi di trattamento più brevi

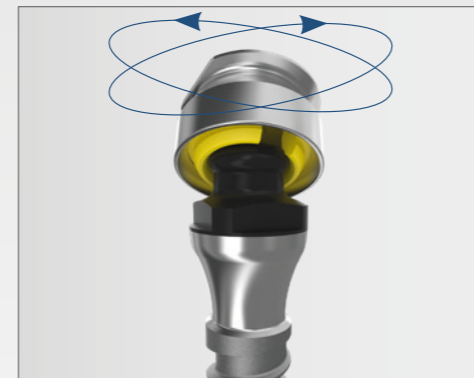

### FRUIBILITÀ

- Compensazione di divergenze tra 2 impianti fino a 40°
- Libertà di movimento del sistema di matrici

### AFFIDABILITÀ

- Connessione protesica Optiloc® integrata
  - Ottimizzazione dello spazio con una connessione compatta e sottile
  - Eccezionale e durevole resistenza all'usura e prestazioni eccezionali grazie al contatto del rivestimento a base di carbonio DLC<sup>(2)</sup> della connessione Optiloc® con l'inserto di ritenzione in PEEK
- Titanio di grado medico V<sup>(3)</sup> & trattamento BCP<sup>(4)</sup>
  - Resistenza meccanica e prestazioni ottimali
  - Biocompatibilità e proprietà di osteointegrazione
- Garanzia a vita Anthogyr Serenity®  
Fiducia in un sistema predicibile e durevole

### ERGONOMIA

- Un kit chirurgico dedicato intelligente
  - Ultracompatto e intuitivo
  - Protocollo chirurgico semplice
  - Set completo di strumenti intuitivi



### FLESSIBILITÀ

- 6 livelli di ritenzione  
Forza di ritenzione da extra leggera a ultra forte
- 3 versioni di matrice  
Matrici in titanio standard, ellittiche e con attacco
- 3 lunghezze di Mini Impianto  
10/12/14 mm



<sup>1</sup> A condizione che sia possibile ottenere un torque minimo di 35 N.cm  
<sup>2</sup> DLC = Carbonio amorfo simil-diamante  
<sup>3</sup> Ti6Al-4V-ELI  
<sup>4</sup> BCP = Fosfato di calcio bifasico



## Sistema di Mini Impianto Sorrisi e sicurezza ritrovati



### + Accessibilità

- Uso di un minor numero di parti, potenziale conversione della protesi esistente
- Meno tempo alla poltrona contribuendo ad un'opzione economicamente accessibile per i pazienti



### + Affidabilità della connessione Optiloc®

- Durata: resistenza all'usura e bassa manutenzione
- Fruibilità e libertà di movimento



### + Tempi di trattamento brevi

- Approccio mininvasivo
- Possibile carico immediato del restauro, offrendo al paziente un beneficio immediato<sup>(1)</sup>

# CAMPUS



## Centro di formazione in implantologia

- **1** sala operatoria, **1** laboratorio di protesi dentali
- **800** professionisti del settore dentale formati ogni anno
- Conferenze, interventi dal vivo, workshop
- Ai piedi del Monte Bianco, tra Chamonix e Ginevra
- Webinar disponibili sulla piattaforma Campus Live



C211\_IT-A-2024-02

Crediti fotografici: Anthogyr, Valoc, Getty images, Godefroy de Maupeou.  
Tutti i diritti riservati, i prodotti reali possono variare.

*Follow us!*



[www.anthogyr.it](http://www.anthogyr.it)

**Anthogyr**  
A Straumann Group Brand