

axiom[®] x3S

PASSA A **S**-MODE



**Senti l'aderenza.
Controlla la stabilità.**

ANTHOGYR

A Straumann Group Brand



Quando le condizioni diventano
estreme e l'aderenza scarseggia...

axiom[®] x3S

SINUS - **S**OFT BONE - **S**OCKET



PASSA A
S-MODE

ANTHOGRYR 
A Straumann Group Brand

axiom® x3S

PASSA A **S-MODE**

**Maggiore ancoraggio
in situazioni cliniche
complesse⁽¹⁾**

**OTTIMIZZATO
PER LA STABILITÀ
PRIMARIA**

Progettato per migliorare l'ancoraggio e consentire protocolli di carico più rapidi anche in osso a bassa densità.

- Filettature ampie per un migliore ancoraggio laterale e una maggiore stabilità primaria.
- 3 scanalature di taglio attive per un efficace innesto apicale, in particolare nei siti post-estrattivi.

Collo diritto
Ancoraggio
corticale

Filettature
ampie
Ancoraggio
laterale

Design conico
Compressione
ossea


Apice arrotondato
Progettato per
proteggere la
membrana sinusale

Apice sottile
Applicazione in
osteotomie strette

3 scanalature di taglio
a doppia azione
Inserimento guidato

Tagliente attivo ①
Ancoraggio apicale

Conservazione e
raccolta di osso ②
Per una stabilizzazione
progressiva

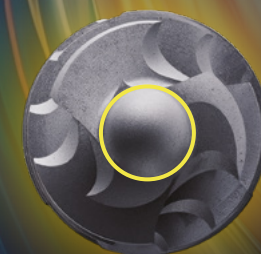

**COMPRESSIONE
OSSEA
PROGRESSIVA.**

Un design progettato per una stabilizzazione graduale in grado di garantire sicurezza nella continuità del piano di trattamento.

- Design conico che favorisce la compressione ossea.
- Scanalature di taglio con zona di conservazione dell'osso per una stabilizzazione progressiva.



Deformazione ossea
indotta lungo un impianto
Axiom® X3S in un osso a
bassa densità.

Un design appositamente
studiato per le indicazioni
sub-sinusalì.

- Collo diritto per l'ancoraggio corticale, anche in caso di altezza ossea limitata.
- Apice arrotondato progettato per proteggere la membrana del seno.

**IL TUO PARTNER
PER LE INDICAZIONI
INDICAZIONI
SUB-SINUSALI**

(1) Nel corso dell'indagine internazionale per il lancio del prodotto, Axiom® X3S ha raggiunto una stabilità primaria superiore rispetto ad Axiom® X3 in osso di grado D3 - D4. Dati in archivio.

SINUS - **S**OFT BONE - **S**OCKET

axiom®

**1 SISTEMA, 2 MODALITÀ
PROGETTATO PER
ESSERE EFFICACE.**

axiom® x3
CONTROLLA LA LINEA

**Sicurezza nella
pratica quotidiana**

- Progettazione ad alte prestazioni per un ancoraggio osseo universale
- Comprovata capacità di guida⁽²⁾
- Conservazione ossea⁽³⁾

L'OSSO È ORO.

(2) Sondaggio pre-lancio di Axiom® X3. Dati in archivio.

(3) Preiss, Laura et al. "Bone mechanical behavior around dental implants: Densification and deformation follow-up by in-situ computed tomography." *Journal of the mechanical behavior of biomedical materials* vol. 167 (2025): 106966. doi:10.1016/j.jmbbm.2025.106966.




axiom[®]

LA FORZA DELLA **SEMPLICITÀ** GUIDATA
DALLA COMPETENZA DI ANTHOGRYR



1 UNICA
piattaforma
protesica

1 unico kit
chirurgico
COMPATTO

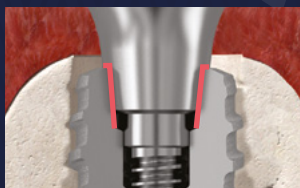

1 connessione conica
con **SIGILLO** per una
stabilità ossea a
lungo termine⁽⁴⁾

Perfettamente **INTEGRATO** nel flusso
di lavoro digitale.

(4) Esposito et al.. Ten-year post loading outcomes of subcrestally placed implant with internal conical connections at 0,5 mm versus 1,5 mm depth: a multicentre within-person randomised controlled trial. Clinical Oral Implants research. 2026; 0:1-17.

SEGUICI.



www.anthogyr.com

ANTHOGRYR

A Straumann Group Brand

