


MATERIALES ESTÉTICOS

ZIRCONIA	OTROS MATERIALES
<ul style="list-style-type: none">- Puente de ZrO2 sobre muñon natural- Puente de Zr sobre interfases- Puente de Zr sobre muñón personalizado	<ul style="list-style-type: none">- Cerámica- Composite- PEEK

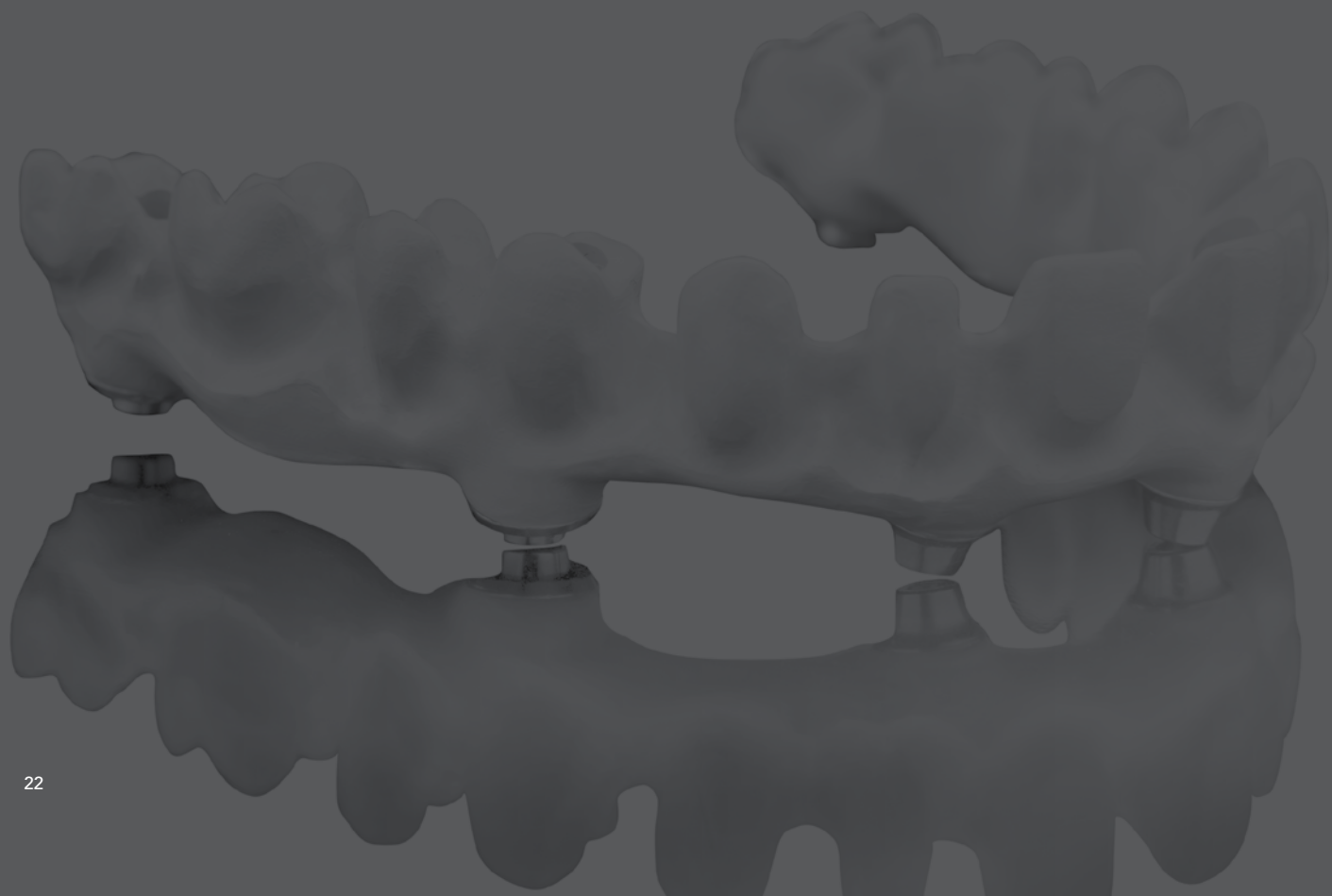

MATERIALES ESTÉTICOS

Ampliamos nuestras soluciones añadiendo materiales estéticos a nuestra gama tradicional de productos. Dirigido a aquellos laboratorios que prefieran externalizar los servicios relacionados con estos materiales. Además para laboratorios que ya los emplean, pero buscan una solución para casos complejos, como la angulación de la emergencia del tornillo.



ZrO_2

La Zirconia (ZrO_2) es un material biocompatible que destaca por su nivel estético y sus cualidades biológicas. Para poder adaptarse a cada caso, disponemos de una amplia gama de tonalidades desde la A1 hasta la D4 mediante el tinto total de la corona o puente (un solo color).

ZrO_2

TRANSLUCIDO

Particularmente adecuada para dientes anteriores y constituye una alternativa ideal para tratamientos estéticos.

Este material también se utiliza para rehabilitaciones monolíticas (a volumen final) posteriores. Aunque no se trate de un material multicapa, se puede tinter según colores A1-D4 por áreas aumentando la estética final.

ZrO_2

MULTICAPA

Proporciona restauraciones resistentes y estéticas a volumen final. Las multicapas del material permiten que el color cambie gradualmente proporcionando un acabado natural y estético.

ZIRCONIA ZrO_2 SOBRE MUÑÓN

Rehabilitación cementada de alta estética sobre muñón tallado.



ZIRCONIA ZrO_2 SOBRE INTERFASES

Rehabilitación cementada sobre base de titanio estándar.
Orificio angulado 25°: permite corregir la emergencia del tornillo ofreciendo un acabado más estético.



ZIRCONIA

ZrO₂ SOBRE PILAR PERSONALIZADO

Rehabilitación cementada de alta estética sobre pilar personalizado.
Pilares disponibles en acabado titanio y acabado dorado.

Orificio angulado 25°: permite corregir la emergencia del tornillo
ofreciendo un acabado más estético.

Perfil de emergencia personalizado con mayor estética y mejor
adaptación a encía.

Permite la paralización de los muñones para la inserción del puente.



OTROS MATERIALES

CERÁMICA, COMPOSITE Y OTROS MATERIALES

A medida que se incorporan nuevos materiales al sector, Createch Medical los evalúa
e incorpora a su portfolio.

Entre otros Peek, cerámicas, composites, etc.

— CERÁMICA

Rehabilitaciones cementadas
de alta translucidez
en materiales cerámicos.

— COMPOSITE

Rehabilitaciones cementadas
de alta translucidez en materiales
de tipo composite.

Muy utilizados para casos
de carillas e incrustaciones.

— PEEK

Rehabilitaciones en polímeros
compuestos como el PEEK
(PolyEther Ether Ketone).

Al tratarse de un polímero, su
ventaja se basa en amortiguar el
esfuerzo de masticación.

