

UNA NUEVA MENTALIDAD

NEODENT® CERAMIC IMPLANT SYSTEM



Ceramic  
Implant System



Conexión  
ZiLock®



## Ceramic Implant System

Con las crecientes expectativas en cuanto a las soluciones de tratamiento, Neodent® Ceramic Implant System combina las nociones de estética, estabilidad y flexibilidad.

Esta solución permite tratar inmediatamente a los pacientes, gracias al diseño moderno y naturalmente cónico y a la amplia cartera de prótesis, con lo cual se logran resultados estéticos de alta gama.





## Una nueva **mentalidad**



Una nueva mentalidad en cuanto a flexibilidad



Una nueva mentalidad en cuanto a estabilidad



Una nueva mentalidad en cuanto a estética



## Una nueva mentalidad en cuanto a flexibilidad

Buscando atender varias soluciones de tratamiento y una amplia gama de posibilidades protésicas mediante una conexión de 2 piezas.





## FLEXIBILIDAD DE TRATAMIENTO




Un nuevo concepto en cuanto a flexibilidad que ofrece diversas soluciones para el tratamiento, desde flujo de trabajo convencional hasta digital, atendiendo tipos de hueso I a IV con una estética excepcional.

## FLEXIBILIDAD PROTÉSICA

La conexión de 2 piezas beneficia al cliente al permitirle elegir la mejor solución protésica. Un sistema fácil de usar que proporciona una mayor flexibilidad de tratamiento en comparación con los implantes de una sola pieza.






ZiBase

-  Prótesis atornillada unitaria
-  Prótesis cementada unitaria
-  Ø 3.75/4.5 mm




ZiBase para C

-  Prótesis atornillada unitaria
-  Prótesis cementada unitaria
-  Ø 4.65 mm



Pilar CR en zirconia

-  Prótesis cementada unitaria
-  Ø 4.0/4.5 mm



## Una nueva **mentalidad** en cuanto a **estabilidad**

Zi combina un diseño de implante naturalmente cónico con roscas trapezoidales dobles. Ambos diseñados para maximizar la estabilidad y predictibilidad en tratamientos inmediatos.

## CONEXIÓN ZILOCK®

ZiLock® es una conexión interna cerámica con 6 lóbulos redondeados. Esta indexación tiene como resultado una colocación precisa del pilar, que protege frente a la rotación.

Diseñada con un tornillo más largo que proporciona un acoplamiento seguro entre el implante de cerámica y el componente de cerámica. Además, mejora el rendimiento de la cerámica optimizando la distribución de la fuerza a lo largo de la conexión interna.




## DISEÑO CÓNICO PARA UNA ESTABILIDAD PRIMARIA

El Ceramic Implant System presenta una moderna geometría cónica diseñada para la carga inmediata predecible en tipos de hueso I a IV. Esta característica se ha diseñado para imitar la forma cónica de la raíz de un diente natural, con lo cual se logra una elevada estabilidad primaria.



Apicalmente cónico con cámaras helicoidales.

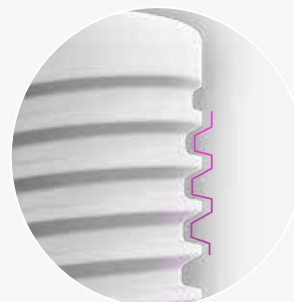

Diseño de rosca trapezoidal doble.

## PREDICTIBILIDAD CON SUPERFICIE SOMETIDA A CHORREADO DE ARENA Y GRABADA AL ÁCIDO

Zi presenta el tratamiento superficial con chorreado de arena y grabado al ácido, que proporciona una macro y microrrugosidad basada en el satisfactorio tratamiento superficial NeoPoros®.

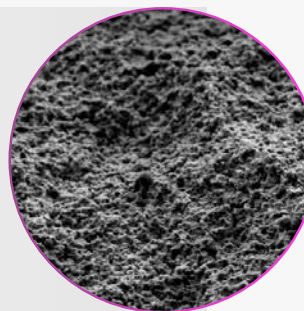


Imagen representativa de la superficie del implante; microscopio electrónico de barrido (SEM) a una ampliación de 5000x.



## Una nueva **mentalidad en cuanto a estética**

Buscando un rendimiento estético excepcional, Zi ofrece, desde el propio material, cerámica, hasta el portfolio completo, un resultado estético natural.



## RENDIMIENTO ESTÉTICO EXCELENTE

Con el objetivo de ofrecer un rendimiento con un resultado altamente estético, Neodent Ceramic Implant System cuenta con un material cerámico excepcional, que proporciona un **resultado de aspecto natural**, gracias a su color blanco.

## UNA CARTERA PARA LOGRAR RESULTADOS ESTÉTICOS NATURALES

El portfolio protésico de cerámica permite el protocolo convencional o inmediato. Además, se puede aplicar el flujo de trabajo preferido, de **convencional a digital**, lo que proporciona una restauración de aspecto natural.



### Cicatrizador

Diseñado en cerámica con un perfil de emergencia uniforme que coincide con la forma exterior de la ZiBase.



### Flujo de trabajo convencional

El cilindro calcinable se ha desarrollado para proporcionar una restauración protésica encerada precisa en un flujo de trabajo convencional.



### Flujo de trabajo digital

El scanbody permite acceder al flujo de trabajo de restauración digital para nivel de implante. Esta solución es compatible con los principales programas de CAD del mercado.



## Nuevas sonrisas todos los días

Fundada por un dentista para dentistas, con el objetivo de cambiar las vidas de más pacientes. Neodent® es una marca internacional disponible en más de 80 países, con más de 3 millones de implantes vendidos cada año. Con un legado de más de 30 años centrados en la facilidad de uso, los sistemas de implantes dentales Neodent® se basan en conceptos de tratamiento progresivos como la inmediatez, con soluciones modernas y fiables para permitir el acceso a la terapia y la rentabilidad para la creación de nuevas sonrisas todos los días.

## Trabajo en equipo para lograr mayores resultados



Mediante la combinación de los puntos fuertes de Neodent® en odontología con nuestra filosofía de inmediatez e innovación brasileña, unimos fuerzas con el liderazgo tecnológico alemán y también confiamos en la precisión de la ingeniería suiza para ofrecer un sistema de implantes cerámicos sencillo para dentistas y pacientes.

# SONRÍALE A LA VIDA

**NEODENT.**

A Straumann Group Brand

Neodent® es una marca internacional fundada por un dentista para dentistas, con el propósito de **cambiar vidas**. Disponible en **95 países**, con un legado de **más de 30 años** centrados en la facilidad de uso, los sistemas de implantes dentales Neodent® se basan en **conceptos de tratamiento progresivos como la inmediatez, con soluciones modernas y fiables** para permitir el acceso a la terapia y la rentabilidad para la **creación de nuevas sonrisas todos los días**.



## UNA MARCA GLOBAL

Disponible en 95 países, ampliando nuestra filosofía por todo el mundo.



## FUNDADA POR DENTISTAS PARA DENTISTAS

Un legado de más de 30 años centrados en la facilidad de uso



## CONCEPTOS DE TRATAMIENTO PROGRESIVO

Soluciones modernas y fiables



## ACCESO A LA TERAPIA Y RENTABILIDAD

Accesibilidad a soluciones probadas y asequibles.

© 2024 - JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. Todos los derechos reservados. Todas las marcas mencionadas en este material, registradas o no, son propiedad de JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. Se prohíbe la reproducción de este material sin previa autorización. Puede que la venta de algunos artículos todavía no esté disponible. Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor local.

Neodent®, Zi™, ZiLock® y NeoPoros® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. Maxon es una marca comercial registrada de maxon dental GmbH. CARES es una marca comercial o una marca comercial registrada de Straumann Holding AG. 3Shape es una marca comercial o marca comercial registrada de 3Shape A/S. exocad es una marca comercial o marca comercial registrada de exocad GmbH. Dental Wings es una marca comercial o marca comercial registrada de Dental Wings Inc.

10491\_neodent\_zi\_brochure\_es\_es\_F00\_of\_160424

毎日、とびっきりの笑顔を

*NUOVI SORRISI OGNI GIORNO*

*CHAQUE JOUR DE NOUVEAUX SOURIRES*

*НОВЫЕ УЛЫБКИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ*

*JEDEN TAG EIN NEUES LÄCHELN*

*NUEVAS SONRISAS TODOS LOS DÍAS*

*NYA LEENDEN VARJE DAG*

*NEW SMILES EVERY DAY*

*NOVOS SORRISOS TODOS OS DIAS*

*CHAQUE JOUR DE NOUVEAUX SOURIRES*



*NOVOS SORRISOS TODOS OS DIAS*

[www.neodent.com](http://www.neodent.com)