

EVOLUEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ
NEODENT[®] EASYPACK





RÉPONDEZ AUX ATTENTES DES PATIENTS ET ÉVOLUEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ DANS LE TRAITEMENT IMPLANTAIRE

Les patients sont de plus en plus conscients des avancées en thérapie implantaire, en particulier en matière de durée de traitement, et la recherche dans ce domaine s'intensifie.

Aujourd'hui, il existe de nombreuses options disponibles sur le marché, avec différents modèles d'implants, choix de restauration et flux de travail, dont les recommandations sont insuffisantes et peuvent conduire à une augmentation de la complexité, des coûts et de la durée du traitement, tant pour le patient que pour le clinicien.

Neodent® a développé EasyPack pour simplifier votre pratique quotidienne. Un ensemble complet avec tout ce dont vous avez besoin pour assurer la croissance de votre cabinet tout en effectuant des traitements implantaires en toute confiance, en toute simplicité et de façon éclairée.



Neodent® EasyPack est une solution tout-en-un :



ÉVOLUEZ EN TOUTE CONFIANCE

Choisissez une marque et des produits sur lesquels vous pouvez compter



ÉVOLUEZ EN TOUTE SIMPLICITÉ

La certitude d'avoir tout ce dont vous avez besoin dans une seule boîte



ÉVOLUEZ DE FAÇON ÉCLAIRÉE

Tous les flux de travail en quelques étapes simples



Avec Neodent® **EasyPack**, je suis certain d'avoir à ma portée tous les produits nécessaires pour aider mon patient, de la pose de l'implant à la restauration provisoire qui me permet de préparer les tissus pour la prothèse définitive. Et grâce à la nouvelle partie secondaire Smart GM 3-en-1, je peux décider du flux de travail le mieux adapté au cas, ce qui simplifie la gestion des stocks et le choix des accessoires.

DR GENINHO THOMÉ





Le célébration est un choix

Neodent® fête son **30^e** anniversaire ! Au fil du temps, des millions de sourires ont été créés en partenariat avec des professionnels du monde entier. Année après année, Neodent® se réjouit encore et toujours du choix de créer de nouveaux sourires chaque jour, de changer la vie des patients dans plus de **80** pays où la marque est présente.

Centrés sur la facilité d'utilisation, les systèmes implantaires dentaires de Neodent® reposent sur des concepts de traitement évolutifs, tels que la mise en charge immédiate, associés à des solutions modernes et fiables pour faire de la dentisterie implantaire une réalité. En tant que leader du traitement immédiat, Neodent® a créé des caractéristiques uniques qui tiennent compte des principes biologiques clés pour maximiser la prédictibilité et pour obtenir des résultats durables.

EVOLUEZ EN TOUTE CONFIANCE

Gamme Grand Morse® : un système implantaire polyvalent

Neodent® **EasyPack** représente toutes les caractéristiques exclusives du système implantaire Grand Morse, qui est le résultat de plus de 30 ans d'expérience en dentisterie implantaire. Il allie une base stable et solide à la souplesse et la facilité d'utilisation pour offrir une esthétique immédiate.

UN SEUL DESIGN D'IMPLANT

Neodent® **Grand Morse**® ouvre des possibilités de traitement personnalisé en fonction de la situation clinique particulière, tout en respectant les principes biologiques et les fondements de la dentisterie implantaire.

Un design d'implant novateur qui associe un corps entièrement conique à un contour extérieur hybride, optimisant ainsi les options et l'efficacité dans tous les types osseux.



UNE SEULE CONNEXION

La connexion Neodent® **Grand Morse**® offre une combinaison unique reposant sur des concepts éprouvés : une switching plate-forme associée à un cône Morse 16° profond doté d'une indexation interne, pour une connexion solide et stable, conçue pour des résultats durables.

Tous les implants Neodent® **Grand Morse**® possèdent la connexion unique **Grand Morse**®, quel que soit le diamètre de l'implant.



UN SEUL KIT

Tous les implants Neodent® **Grand Morse**® peuvent être posés au moyen d'un kit chirurgical intuitif et fonctionnel (chirurgie classique ou guidée).

Il offre un flux de travail chirurgical facilité par un codage couleur, ainsi que des instruments de restauration simplifiés avec un seul tournevis pour tous les composants de cicatrisation et les vis de restauration.



Pour en savoir plus sur la gamme chirurgicale et prothétique complète Grand Morse®, scannez le code QR ou suivez le lien ci-dessous :

<https://www.straumann.com/neodent/com/en/professionals/implant-systems/implants-line/gm-implant-line.html>

ÉVOLUEZ EN TOUTE SIMPLICITÉ

Proposer un traitement implantaire peut être particulièrement complexe en raison de l'assortiment, des spécifications techniques et des investissements nécessaires. Neodent® **EasyPack** a été conçu pour simplifier l'ensemble du traitement pour l'indication la plus courante : le remplacement d'une dent unitaire, de la racine à la couronne.

La simplicité d'avoir un kit tout-en-un

Neodent® **EasyPack** réunit en un seul kit tous les composants nécessaires à la pose d'un implant, la phase de cicatrisation, les restaurations provisoires et les empreintes permettant le remplacement d'une dent unitaire. Il simplifie l'accès à des solutions souples de restauration définitive.



NEODENT® EASYPACK COMPREND

- 1 Implant Helix **Grand Morse**®
- 2 Vis de fermeture **Grand Morse**®
- 3 Partie secondaire de cicatrisation **Grand Morse**®
- 4 Analogue d'implant hybride **Grand Morse**®
- 5 Partie secondaire 3-en-1 Neodent Smart **Grand Morse**®

NOUVEAU



Solution souple pour le remplacement d'une dent unitaire

Neodent® EasyPack a été développé pour offrir toute flexibilité sans compromis sur la simplicité. Il vous donne accès à des solutions simples pour le traitement des restaurations unitaires :



RESTAURATION UNITAIRE

- Phase de cicatrisation en 1 ou 2 étapes
- Mise en charge immédiate ou classique
- Empreinte prise par porte-empreinte fermé ou empreinte numérique
- Flux de travail numérique ou classique
- Restauration vissée ou scellée



ÉVOLUEZ DE FAÇON ÉCLAIRÉE

Aujourd'hui, la multiplication des technologies et le manque de connectivité entretiennent la difficulté de restaurer un implant avec souplesse pour les cliniciens.

Neodent® offre la **partie secondaire Smart GM**, une solution 3-en-1 conçue pour obtenir des résultats de restauration fiables et efficaces.

L'efficacité de la nouvelle partie secondaire Smart GM 3-en-1

La partie secondaire Neodent® **Smart GM** est une solution unique brevetée associant une pièce de transfert pour porte-empreinte fermé, un corps de scannage numérique et une partie secondaire provisoire en une seule pièce. Cette solution vous permet d'optimiser la souplesse du flux de travail en toute simplicité.



PIÈCE DE TRANSFERT

La partie secondaire Smart GM comporte une pièce de transfert antirotationnelle, conçue pour la technique d'empreinte standard à ciel fermé.

CORPS DE SCANNAGE NUMÉRIQUE

Adaptée à une utilisation avec un scanner intraoral ou de laboratoire, la partie secondaire Smart GM a été soumise à un traitement de surface unique conçu pour offrir une précision de scannage optimale et efficace.

PARTIE SECONDAIRE PROVISOIRE

Fabriquée en titane, la partie secondaire Smart est proposée en 2 hauteurs de cheminée flexibles et personnalisables (4 ou 6 mm) conçues pour créer une restauration provisoire personnalisée à l'aide d'un flux de travail classique ou numérique.



LA FIABILITÉ D'UN FLUX DE TRAVAIL DE RESTAURATION GUIDÉ

Accédez à des flux de travail de restauration simplifiés avec Neodent® EasyPack. Associer la partie secondaire Smart GM aux parties secondaires de cicatrisation et à l'analogue fournit vous permet de choisir simplement un flux de restauration pour obtenir des résultats prédictibles.

01

POSE DE L'IMPLANT

02

PHASE DE CICATRISATION

03

PRISE D'EMPREINTE

04

RESTAURATION PROVISOIRE

05

RESTAURATION DÉFINITIVE



RESTAURATION PROVISOIRE IMMÉDIATE

SAUTER CETTE ÉTAPE

OU



APPROCHE EN 1 OU 2 ÉTAPES

VIS DE FERMETURE
PARTIE SECONDAIRE DE CICATRISATION

PRISE D'EMPREINTE NUMÉRIQUE

PORTE-EMPREINTE FERMÉ

PARTIE SECONDAIRE PROVISOIRE

SAUTER CETTE ÉTAPE



FLUX DE TRAVAIL CLASSIQUE



FLUX DE TRAVAIL NUMÉRIQUE

CAS CLINIQUE

Restauration unitaire immédiate dans les régions postérieures inférieures avec Neodent® EasyPack



RESTAURATION
PROVISOIRE
IMMÉDIATE

1

POSE DE L'IMPLANT

2


PRISE D'EMPREINTE



Situation clinique initiale, vue occlusale
(zone de la dent 46)




Ostéotomie avec le système Neodent®
Control System

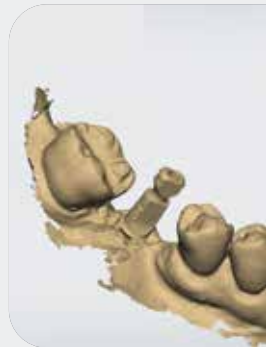

Positions des implants
le logiciel



Situation clinique initiale, vue
latérale (zone de la dent 36)

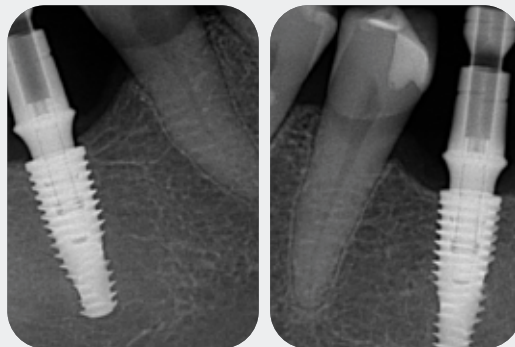

Radiographies périapicales prises
immédiatement après la pose des implants
et la mise en place de la partie secondaire
Smart GM



3 RESTAURATION PROVISOIRE

4 RESTAURATION DÉFINITIVE




...nts transférées dans
...el CFAO



Couronnes usinées en PMMA et parties
secondaires Smart GM personnalisées



Aspect clinique final de la couronne
prothétique définitive

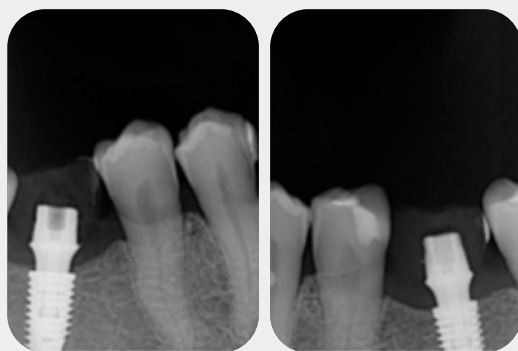

Radiographies prises après 4 jours montrant
les parties secondaires Smart GM utilisées
comme éléments provisoires



Aspect clinique après 4 jours

* Images présentées avec l'aimable autorisation
du Dr Geninho Thomé et de son équipe.

© 2023 - JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. Tous droits réservés. Toutes les marques listées dans ce document, enregistrées ou pas, sont la propriété de JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. La reproduction de ce document sans autorisation préalable est interdite.

10328_neodent_easypack_brochure_fr_fr_B00_lr_140223