

*UN NUOVO APPROCCIO*

*NEODENT<sup>®</sup>  
CERAMIC IMPLANT SYSTEM*



Ceramic  
Implant System



Connessione  
ZiLock<sup>®</sup>



## Ceramic Implant System

Aumentando le aspettative per le soluzioni di trattamento, il Neodent® Ceramic Implant System unisce i concetti di estetica, stabilità e flessibilità. Questa soluzione consente di trattare immediatamente i pazienti, grazie al design naturalmente affusolato e alla vasta gamma di elementi protesici moderni, ottenendo risultati estetici di alta qualità.





## Un nuovo **approccio**



Un nuovo approccio  
alla flessibilità



Un nuovo approccio  
alla stabilità



Un nuovo approccio  
all'estetica





## Un nuovo approccio alla **flessibilità**

Cercando di soddisfare diverse soluzioni di trattamento e una vasta gamma di possibilità protesiche attraverso una connessione a due pezzi.





## Flessibilità del trattamento

Un nuovo concetto di flessibilità che offre diverse soluzioni per il trattamento, dal flusso di lavoro convenzionale a quello digitale, adatto ai tipi di osso da I a IV, con un'estetica eccezionale.

## Flessibilità protesica

I benefici della connessione a due pezzi per il cliente consentono di scegliere la migliore soluzione protesica. Un sistema user-friendly che offre una maggiore flessibilità di trattamento rispetto agli impianti monopezzo.





**Zi Base**

-  Protesi singola avvitata
-  Protesi singola cementata
-  Ø 3.75/4.5 mm





**Zi Base C**

-  Protesi singola avvitata
-  Protesi singola cementata
-  Ø 4.65 mm



**Moncone Zi CR**

-  Protesi singola cementata
-  Ø 4.0/4.5 mm



## Un nuovo approccio alla stabilità

Zi combina un design di impianto naturalmente affusolato con filetti trapezoidali doppi. Entrambi progettati per massimizzare la stabilità e la prevedibilità nei trattamenti immediati.



## CONNESSIONE ZILOCK®

ZiLock® è una connessione interna in ceramica con 6 lobi arrotondati. Questa indicizzazione porta a un posizionamento preciso dell'elemento protesico, proteggendo contro la rotazione. Progettato con una vite più lunga che fornisce un'accoppiata sicura tra l'impianto in ceramica e l'elemento protesico in ceramica. Inoltre, migliora le prestazioni della ceramica ottimizzando la distribuzione delle forze lungo la connessione interna.




## DESIGN CONICO PER LA STABILITÀ PRIMARIA

Il Ceramic Implat System presenta una moderna geometria affusolata progettata per un carico immediato prevedibile nei tipi di osso da I a IV. Questa caratteristica è stata progettata per mimetizzare la forma affusolata di una radice di dente naturale, con l'obiettivo di ottenere una stabilità primaria elevata.



Apicalmente affusolato con flauti camerati.

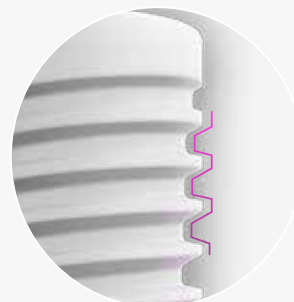

Design a doppia filettatura trapezoidale.

## PREDICIBILITÀ CON SUPERFICIE SABBIATA E MORDENZATA CON ACIDO

L'impianto Zi è caratterizzato dal trattamento della superficie, sabbata e mordenzata con acido, con macro e micro rugosità basate sulla comprovata superficie Neoporos®.


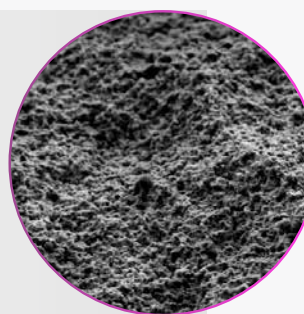


Immagine rappresentativa della superficie implantare - ingrandimento al microscopio elettronico a scansione (SEM) di 5000x.



## Un nuovo approccio all'estetica

Alla ricerca di una performance estetica eccezionale, Zi offre, dal materiale, la ceramica, al portfolio completo, un risultato estetico naturale.

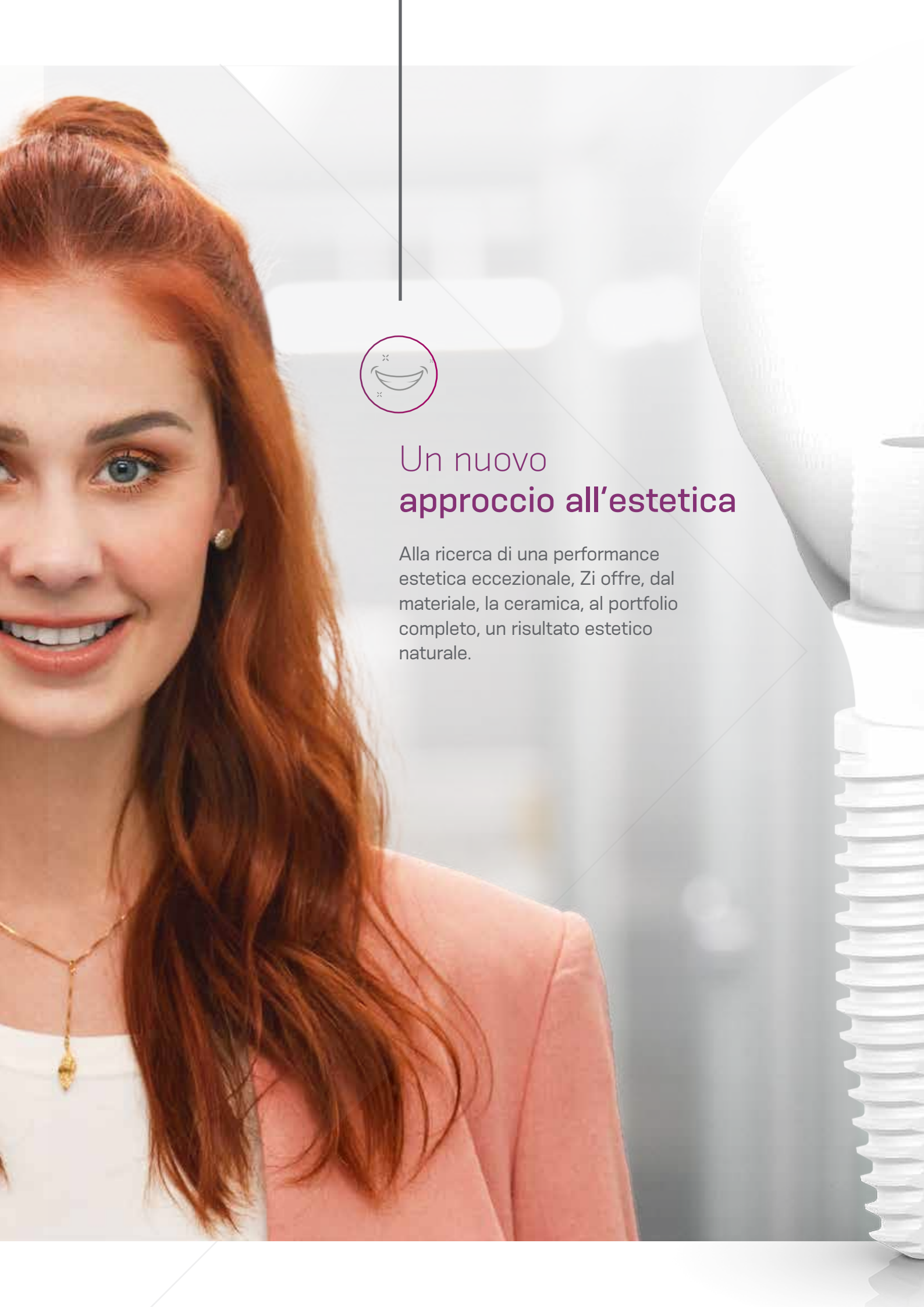

## RISULTATI ESTETICI ECCEZIONALI

Mirando a fornire prestazioni con un risultato estetico di alta qualità, il Neodent Ceramic Implant System presenta un eccezionale materiale ceramico che offre un risultato dall'aspetto naturale, grazie alla sua alta traslucenza rispetto ai metalli.

## UN PORTFOLIO DI PRODOTTI PER OTTENERE RISULTATI ESTETICI NATURALI

Il portafoglio protesico in ceramica consente l'uso di un protocollo convenzionale o immediato. Inoltre, è possibile applicare un flusso di lavoro preferito, passando dal convenzionale al digitale, per ottenere una riparazione dall'aspetto naturale.



### Moncone di Guarigione

Progettati in ceramica con un profilo di emergenza coerente con la forma esterna della ZiBase.



### Flusso di lavoro convenzionale

La cappetta calcinabile è stata sviluppata per fornire restauri protesici con wax-up utilizzando flussi di lavoro convenzionali.



### Flusso di lavoro digitale

Lo scanbody consente l'utilizzo di un flusso di lavoro protesico digitale a livello dell'impianto. Questa soluzione è compatibile con i principali software CAD disponibili sul mercato.



## Nuovi sorrisi ogni giorno

Fondata da un dentista per i dentisti, con lo scopo di cambiare la vita di un numero sempre maggiore di pazienti. Neodent® è un marchio globale disponibile in oltre 80 paesi, con oltre 3 milioni di impianti venduti ogni anno. Forti di una storia lunga oltre 30 anni dedicata alla semplicità di utilizzo, i sistemi implantari Neodent si basano su concetti di trattamento innovativi come i trattamenti immediati e offrono soluzioni moderne, affidabili e accessibili per creare ogni giorno nuovi sorrisi.

## Lavoro di squadra per ottenere risultati più significativi



Unendo le competenze di Neodent® in odontoiatria con la nostra filosofia di immediatezza e l'innovazione brasiliana, collaboriamo con la leadership tecnologica tedesca e ci affidiamo anche alla precisione dell'ingegneria svizzera per offrire un semplice sistema di impianti in ceramica per dentisti e pazienti che desiderano soluzioni altamente estetiche.



**NEODENT**

30 *anni*



## Anche festeggiare è una scelta

Neodent® festeggia il suo **30°** anniversario! Nel corso degli anni, milioni di sorrisi sono stati creati in collaborazione con i professionisti di tutto il mondo. E nel corso degli anni, Neodent® continua a festeggiare la scelta di creare nuovi sorrisi ogni giorno, per cambiare le vite dei pazienti in oltre **80** paesi in cui il marchio è presente.



Come leader nei trattamenti immediati, Neodent® ha sviluppato caratteristiche uniche che tengono conto dei principi biologici fondamentali per massimizzare la predicibilità e ottenere risultati duraturi.



© 2023 - JGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi elencati nel presente materiale, registrati o meno, sono proprietà di JGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. La riproduzione del presente materiale senza previo consenso è vietata. Alcuni articoli potrebbero non essere ancora disponibili per la vendita. Per ulteriori informazioni, contattare il distributore locale.

Neodent®, Zi™, ZiLock®, NeoPoros® sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati da JGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. Maxon è un marchio commerciale o un marchio commerciale registrato da maxon dental GmbH. CARES è un marchio commerciale o un marchio commerciale registrato da Straumann Holding AG. 3Shape è un marchio commerciale o un marchio commerciale registrato da 3Shape A/S. exocad è un marchio commerciale o un marchio commerciale registrato da exocad GmbH. Dental Wings è un marchio commerciale o un marchio commerciale registrato da Dental Wings Inc.

10492\_neodent\_zi\_brochure\_it\_it\_E00\_lr\_150223

毎日、とびっきりの笑顔を

NUOVI SORRISI OGNI GIORNO

CHAQUE JOUR DE NOUVEAUX SOURIRES

новые улыбки каждый день

JEDEN TAG EIN NEUES LÄCHELN

NUEVAS SONRISAS TODOS LOS DÍAS

NYA LEENDEN VARJE DAG

NEW SMILES EVERY DAY

NOVOS SORRISOS TODOS OS DIAS

CHAQUE JOUR DE NOUVEAUX SOURIRES



NOVOS SORRISOS TODOS OS DIAS

[www.neodent.com](http://www.neodent.com)