

## Straumann® Guided Surgery Basiskassette Basisinformationen

# Guided Surgery Kassette – Die intelligente Aufbewahrungslösung


Die Straumann® Guided Surgery-Basiskassette wurde entwickelt, um das geführte chirurgische Verfahren für Kliniker, die mit einer bevorzugten Straumann Implantatlinie arbeiten, zu vereinfachen. Unabhängig davon, welche Implantatlinie Sie verwenden, finden in dieser Kassette alle Instrumente Platz, die für die geführte grundlegende und Feinpräparation des Implantatbetts erforderlich sind, sowie alle weiteren benötigten Instrumente (z. B. Ratsche, Schraubendreher und Adapter).

## Einfach und vielseitig

- Für jede Straumann Implantatlinie\*, z. B. BLT, BL, SP, S, TE
- Klares und übersichtliches Layout für vereinfachte Navigation durch das chirurgische Verfahren


Die Straumann® Guided Surgery-Basiskassette besteht aus einem oberen und einem unteren Einsatz und dem Deckel.

## Oberer Einsatz

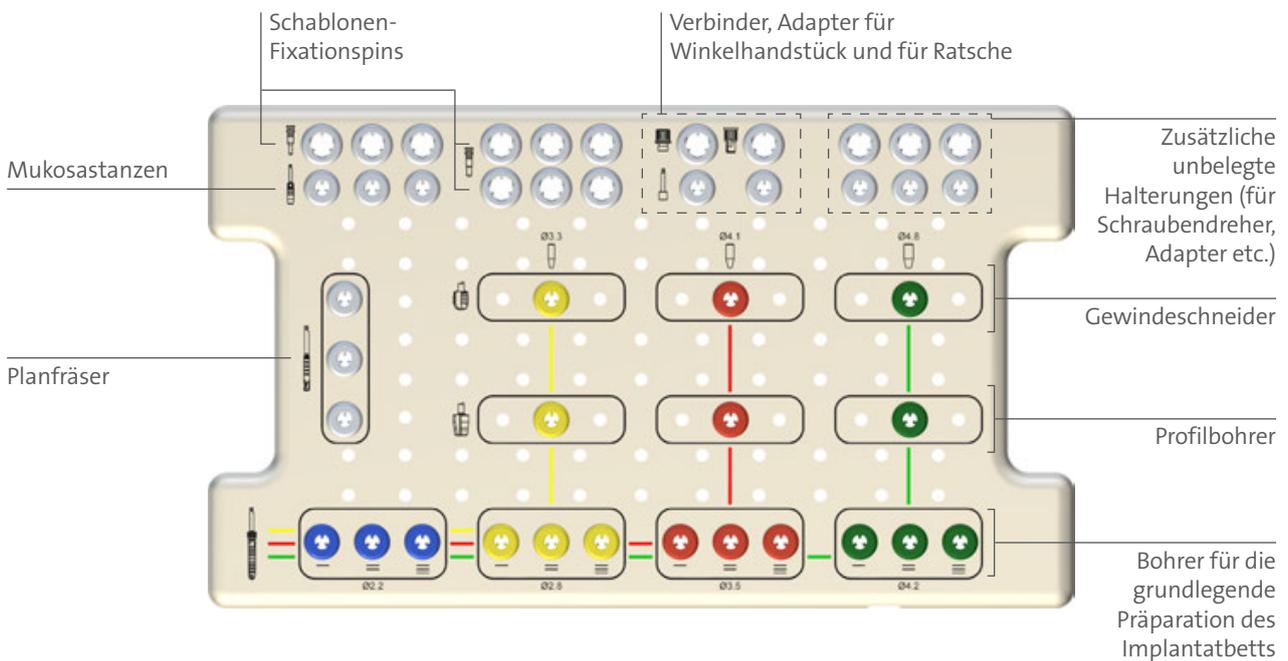

\* Literaturhinweise zu den Implantatlinien finden Sie unter Abschnitt „Bestückung des oberen Einsatzes“ auf Seite 3.

# Unterer Einsatz

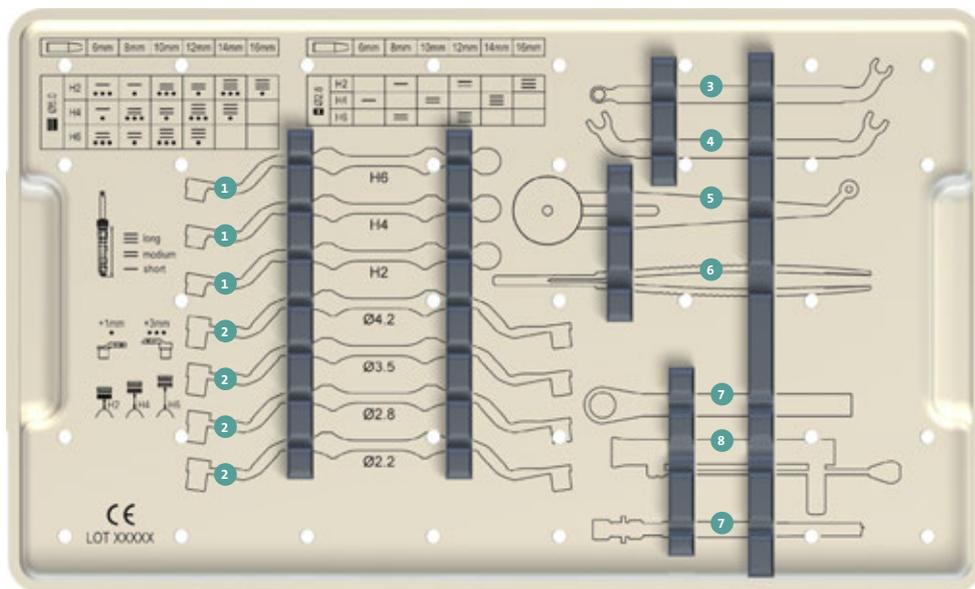

- |                  |                    |                                 |
|------------------|--------------------|---------------------------------|
| 1 C-Löffel       | 4 Stoppschlüssel   | 7 Ratsche                       |
| 2 Bohrlöffel     | 5 Distanzindikator | 8 Drehmomentaufsatz für Ratsche |
| 3 Halteschlüssel | 6 Pinzetten        |                                 |

## Bestückung des oberen Einsatzes


Der obere Einsatz der Straumann® Guided Surgery-Basiskassette kann mit Instrumenten für jede beliebige Straumann Implantatlinie bestückt werden. Basierend auf dem empfohlenen geführten chirurgischen Verfahren sollten die Bohrer für die grundlegende Präparation des Implantatbetts, die Profilbohrer und Gewindeschneider in die entsprechenden Instrumentenhalterungen der Kassette platziert werden.

**Hinweis:** Detaillierte Informationen zu den Instrumenten und zu ihrer Anwendung bei spezifischen Implantationsverfahren finden Sie in den nachstehenden Broschüren:

- Basisinformationen zur Straumann® Guided Surgery, DE151753
- Basisinformation zu den chirurgischen Verfahren – Straumann® Dental Implant System, DE151754
- Basisinformationen zu den chirurgischen Verfahren für das Straumann® Bone Level Tapered Implantat, DE490038
- Basisinformationen zum chirurgischen und prothetischen Verfahren – Straumann® PURE Ceramic Implantat, DE151750
- Pflege und Wartung der chirurgischen und prothetischen Instrumente, DE151008
- Basisinformationen zu verschraubten Hybridrestorationen, DE490015
- Anleitung für das Entfernen von Implantaten, DE151806


Auf den folgenden Seiten finden Sie Beispiele für eine mögliche Bestückung der Kassette, je nach verwendeter Implantatlinie.

# Bestückung für Bone Level Tapered (BLT) Implantatlinie

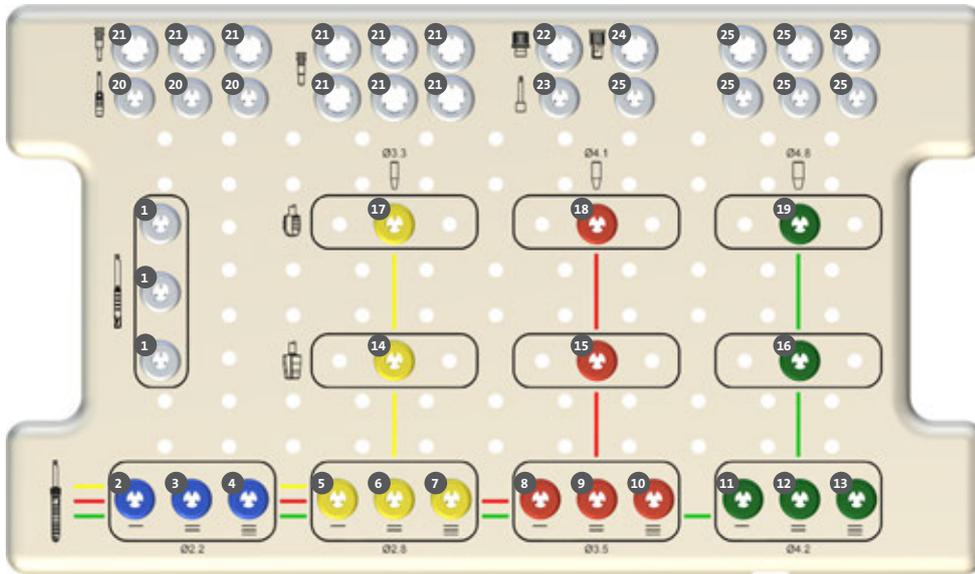


Nr.	Artikel	Art.-Nr.
1		034.215, 034.415, 034.615
2	BLT Pilotbohrer Ø 2,2 mm, kurz, geführt	034.257
3		034.258
4	BLT Pilotbohrer Ø 2,2 mm, lang, geführt	034.259
5	BLT Bohrer Ø 2,8 mm, kurz, geführt	034.260
6		034.261
7	BLT Bohrer Ø 2,8 mm, lang, geführt	034.262
8	BLT Bohrer Ø 3,5 mm, kurz, geführt	034.263
9		034.264
10	BLT Bohrer Ø 3,5 mm, lang, geführt	034.265
11	BLT Bohrer Ø 4,2 mm, kurz, geführt	034.266
12		034.267
13	BLT Bohrer Ø 4,2 mm, lang, geführt	034.268
14	BLT Profilbohrer Ø 3,3 mm, geführt	034.269
15		034.270
16	BLT Profilbohrer Ø 4,8 mm, geführt	034.271
17	BLT Gewindeschneider Ø 3,3 mm, geführt	034.272
18		034.273
19	BLT Gewindeschneider Ø 4,8 mm, geführt	034.274
20		034.010, 034.011, 034.012
21		034.256, 034.255, 034.455, 034.655
22		046.460 oder 046.461 oder 046.462
23		046.470 oder 046.471 oder 046.472
24		034.005
25	–	Zusätzliche Halterungen für Schraubendreher, Adapter etc. –

# Bestückung für Standard Plus (SP) Implantatlinie

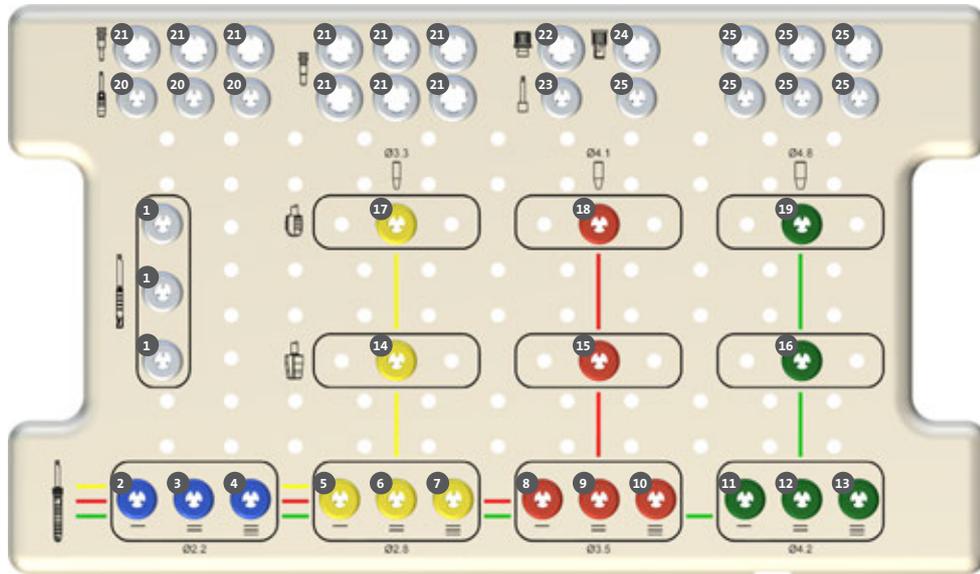


Nr.	Artikel	Art.-Nr.
1		034.215, 034.415, 034.615
2	Pilotbohrer Ø 2,2 mm, kurz, geführt	034.123
3		034.126
4	Pilotbohrer Ø 2,2 mm, lang, geführt	034.129
5	Spiralbohrer PRO Ø 2,8 mm, kurz, geführt	034.223
6		034.226
7	Spiralbohrer PRO Ø 2,8 mm, lang, geführt	034.229
8	Spiralbohrer PRO Ø 3,5 mm, kurz, geführt	034.423
9		034.426
10	Spiralbohrer PRO Ø 3,5 mm, lang, geführt	034.429
11	Spiralbohrer PRO Ø 4,2 mm, kurz, geführt	034.623
12		034.626
13	Spiralbohrer PRO Ø 4,2 mm, lang, geführt	034.629
14	SP Profilbohrer Ø 3,3 mm, geführt	034.235
15		034.435
16	SP Profilbohrer Ø 4,2 mm, kurz/lang	044.084 oder 044.085
17	S/SP Gewindeschneider für Winkelhandstück, Ø 3,3 mm, geführt	034.245
18		034.445
19	S/SP Gewindeschneider für Winkelhandstück, Ø 4,8 mm, geführt	034.645
20		034.010, 034.011, 034.012
21		034.256, 034.255, 034.455, 034.655
22		046.460 oder 046.461 oder 046.462
23		046.470 oder 046.471 oder 046.472
24		034.005
25	–	Zusätzliche Halterungen für Schraubendreher, Adapter etc.

# Bestückung für Bone Level (BL) Implantatlinie

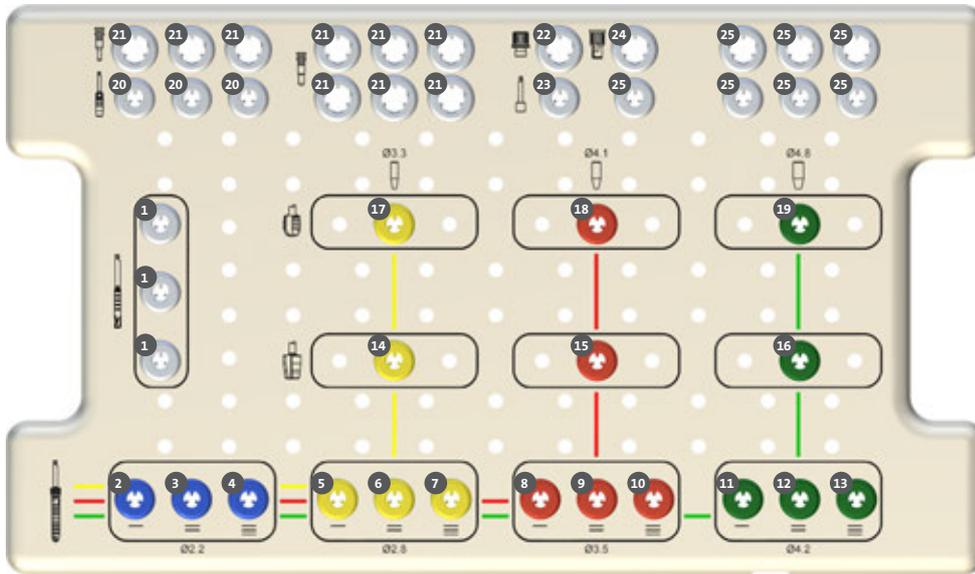

Nr.	Artikel	Art.-Nr.
1		Planfräser, geführt 034.215, 034.415, 034.615
2		Pilotbohrer Ø 2,2 mm, kurz, geführt 034.123
3		Pilotbohrer Ø 2,2 mm, mittel, geführt 034.126
4		Pilotbohrer Ø 2,2 mm, lang, geführt 034.129
5		Spiralbohrer PRO Ø 2,8 mm, kurz, geführt 034.223
6		Spiralbohrer PRO Ø 2,8 mm, mittel, geführt 034.226
7		Spiralbohrer PRO Ø 2,8 mm, lang, geführt 034.229
8		Spiralbohrer PRO Ø 3,5 mm, kurz, geführt 034.423
9		Spiralbohrer PRO Ø 3,5 mm, mittel, geführt 034.426
10		Spiralbohrer PRO Ø 3,5 mm, lang, geführt 034.429
11		Spiralbohrer PRO Ø 4,2 mm, kurz, geführt 034.623
12		Spiralbohrer PRO Ø 4,2 mm, mittel, geführt 034.626
13		Spiralbohrer PRO Ø 4,2 mm, lang, geführt 034.629
14		BL/NNC Profilbohrer Ø 3,3 mm, geführt 026.2503
15		BL Profilbohrer Ø 4,1 mm, geführt 026.4503
16		BL Profilbohrer Ø 4,8 mm, geführt 026.6503
17		BL/TE/NNC Gewindeschneider für Winkelhandstück, Ø 3,3 mm, geführt 026.2510
18		BL/TE Gewindeschneider für Winkelhandstück, Ø 4,1 mm, geführt 026.4510
19		BL/TE Gewindeschneider für Winkelhandstück, Ø 4,8 mm, geführt 026.6510
20		Mukosastanzen, geführt 034.010, 034.011, 034.012
21		Schablonen-Fixationspins 034.256, 034.255, 034.455, 034.655
22		Adapter für Ratsche 046.460 oder 046.461 oder 046.462
23		Adapter für Winkelhandstück 046.470 oder 046.471 oder 046.472
24		Verbinder für Ratsche 034.005
25	–	Zusätzliche Halterungen für Schraubendreher, Adapter etc. –

# Bestückung für Tapered Effect (TE) Implantatlinie

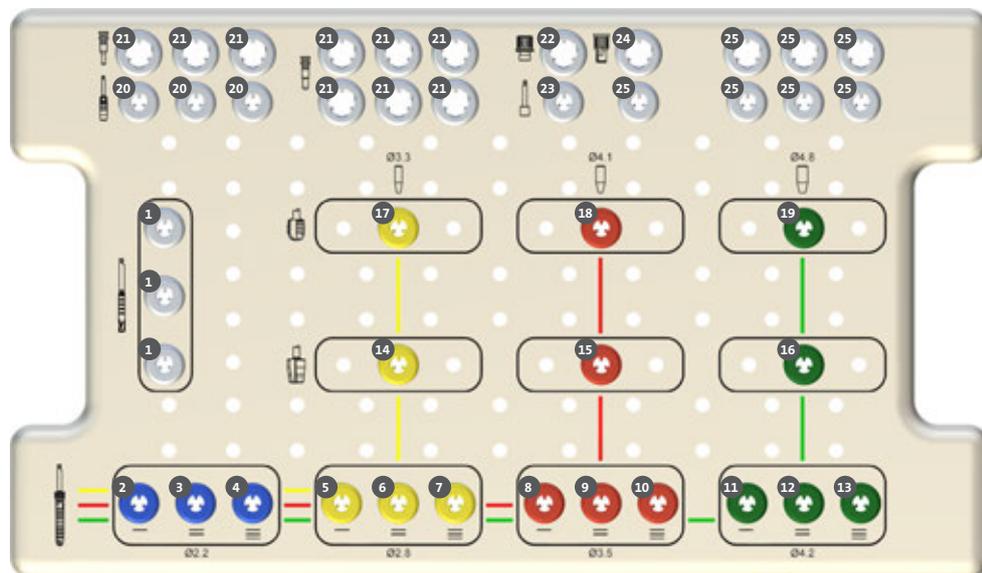

Nr.	Artikel	Art.-Nr.
1	Planfräser, geführt	034.215, 034.415, 034.615
2	Pilotbohrer Ø 2,2 mm, kurz, geführt	034.123
3	Pilotbohrer Ø 2,2 mm, mittel, geführt	034.126
4	Pilotbohrer Ø 2,2 mm, lang, geführt	034.129
5	Spiralbohrer PRO Ø 2,8 mm, kurz, geführt	034.223
6	Spiralbohrer PRO Ø 2,8 mm, mittel, geführt	034.226
7	Spiralbohrer PRO Ø 2,8 mm, lang, geführt	034.229
8	Spiralbohrer PRO Ø 3,5 mm, kurz, geführt	034.423
9	Spiralbohrer PRO Ø 3,5 mm, mittel, geführt	034.426
10	Spiralbohrer PRO Ø 3,5 mm, lang, geführt	034.429
11	Spiralbohrer PRO Ø 4,2 mm, kurz, geführt	034.623
12	Spiralbohrer PRO Ø 4,2 mm, mittel, geführt	034.626
13	Spiralbohrer PRO Ø 4,2 mm, lang, geführt	034.629
14	TE Profilbohrer Ø 3,3 mm, geführt	034.237
15	TE Profilbohrer Ø 4,1 mm, geführt	034.437
16	TE Profilbohrer Ø 4,2 mm, kurz/lang	044.703 oder 044.710
17	BL/TE/NNC Gewindeschneider für Winkelhandstück, Ø 3,3 mm, geführt	026.2510
18	BL/TE Gewindeschneider für Winkelhandstück, Ø 4,1 mm, geführt	026.4510
19	BL/TE Gewindeschneider für Winkelhandstück, Ø 4,8 mm, geführt	026.6510
20	Mukosastützen, geführt	034.010, 034.011, 034.012
21	Schablonen-Fixationspins	034.256, 034.255, 034.455, 034.655
22	Adapter für Ratsche	046.460 oder 046.461 oder 046.462
23	Adapter für Winkelhandstück	046.470 oder 046.471 oder 046.472
24	Verbinder für Ratsche	034.005
25	Zusätzliche Halterungen für Schraubendreher, Adapter etc.	–

**International Headquarters**

Institut Straumann AG  
Peter Merian-Weg 12  
CH-4002 Basel, Switzerland  
Phone +41 (0)61 965 11 11  
[www.straumann.com](http://www.straumann.com)

**National Distributor**

Institut Straumann AG  
Straumann Schweiz  
Peter Merian-Weg 12  
Postfach  
CH-4002 Basel  
[www.straumann.ch](http://www.straumann.ch)

**Kundenberatung/Bestellannahme**

Tel. Bestellungen: 0800 810 812  
Tel. Hotline: 0800 810 814  
Tel. CARES®: 0800 810 816  
E-Mail: [ch.sales@straumann.com](mailto:ch.sales@straumann.com)