




## Soluciones digitales integradas CARES® CARES® Visual en clínica

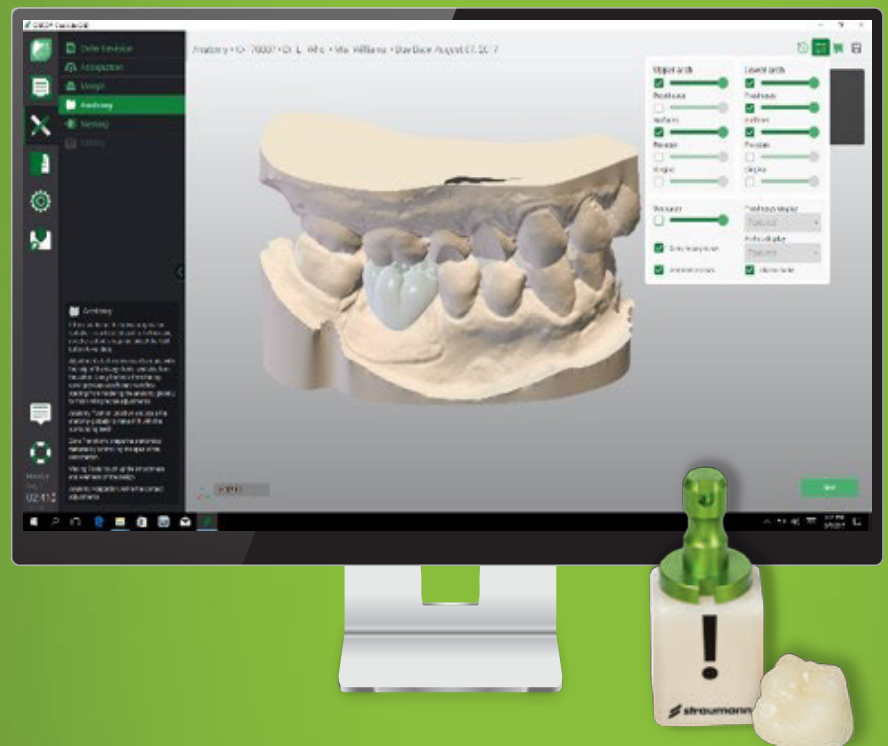

# CARES® Visual en clínica

- Diseñado para proporcionar a los odontólogos una solución de diseño de prótesis CAD rápida e intuitiva
- Software de diseño abierto para una solución en la clínica compatible con:
  - Escáner intraoral
  - Escáner para impresión
  - Máquina fresadora
- Soporte para una amplia gama de indicaciones, incluyendo:
  - Coronas, *inlays*, *onlays* y carillas
  - Puentes provisionales
  - Coronas implantosoportadas
- Sistema abierto:
  - Permite la entrada y la salida de .STL para compatibilidad con sistemas externos
- Conexión simplificada con la máquina fresadora en clínica Straumann® CARES® C-Series

## SOFTWARE INTUITIVO EN CLÍNICA

### Importación directa

Importación directa de los datos escaneados desde el escáner intraoral CARES® u otros dispositivos de escaneo intraoral abiertos.

### Propuestas automatizadas

La tecnología Tooth-Chain avanzada de Dental Wings calcula la forma de la restauración propuesta, incluidas la anatomía, las cúspides, las crestas marginales y el perfil de emergencia, analizando y reproduciendo las características anatómicas de los dientes adyacentes. La oclusión se calcula automáticamente a partir de los dientes antagonistas.

### Herramienta de diseño fácil de utilizar


Identificación de márgenes, diseño de la anatomía y selección del eje de inserción.




Tecnología Tooth-Chain



Identificación de márgenes

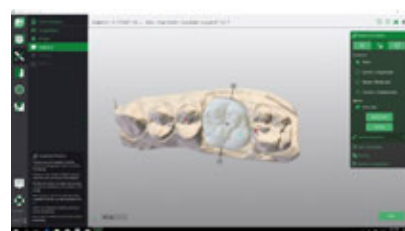


Diseño de la anatomía

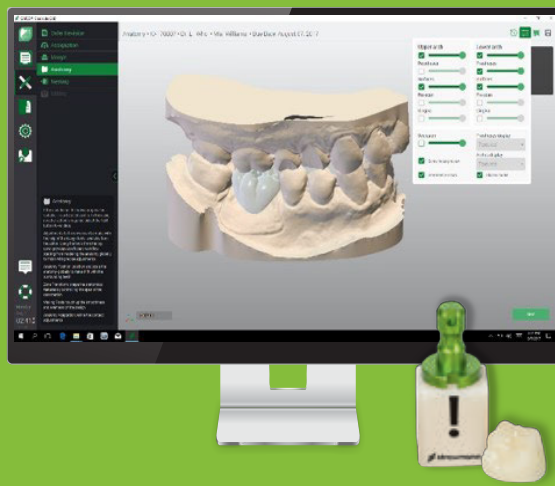

## DIRECTAMENTE CONECTADO A STRAUMANN® CARES® C-SERIES


### Anidación y mecanizado

Anidado sencillo e intuitivo del bloque de restauración para una rápida preparación del fresado en la consulta con la máquina Straumann® CARES® C-Series u otra máquina de fresado.

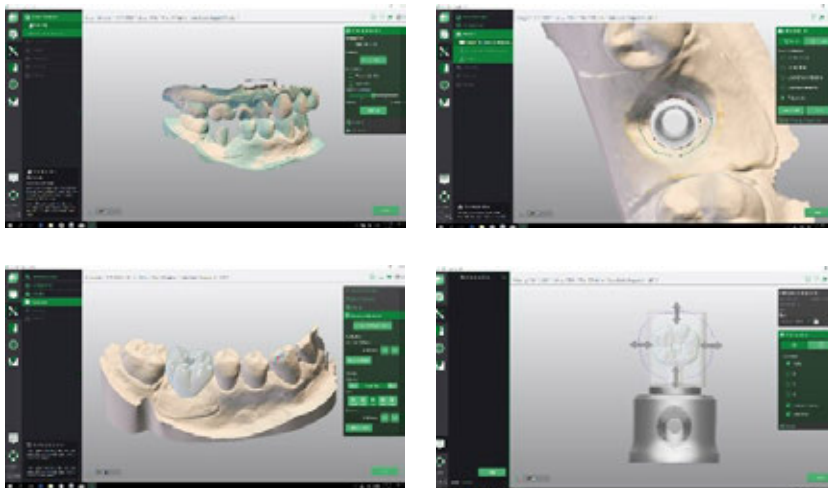

### Envío directo

Después de diseñar la restauración, puede enviarla directamente a la máquina Straumann® CARES® C-Series de fresado en la clínica, rápida y de gran precisión.

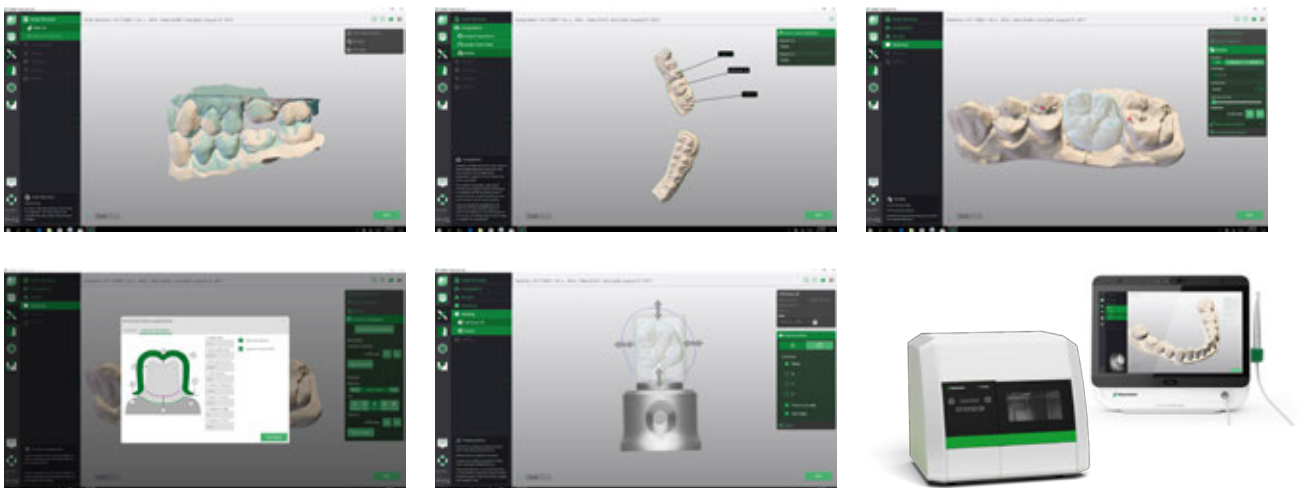

Elemento n.º	Artículo
019.0736	Software CARES® Visual en clínica sin CAM, para fresadoras de otros fabricantes
019.0744	CARES® Visual en clínica con integración CAM, para Straumann® CARES® C-Series

### **International Headquarters**

Institut Straumann AG  
Peter Merian-Weg 12  
CH-4002 Basel, Switzerland  
Phone +41 (0)61 965 11 11  
Fax +41 (0)61 965 11 01  
[www.straumann.com](http://www.straumann.com)

© Institut Straumann AG, 2017. Todos los derechos reservados.

Straumann® y/u otras marcas y logotipos de Straumann® aquí mencionados son marcas comerciales o marcas registradas de Straumann Holding AG y/o sus filiales.