

coDiagnostiX®

Software de planificación de implantes

Resultados consistentes y previsibles.

Solución consolidada y comprobada en el mercado

MÁS DE **300,000** CASOS

MÁS DE **20** AÑOS



Obtenga resultados predecibles y minimice el número de visitas por paciente

coDiagnostiX® es la potente solución digital y sin embargo fácil de utilizar, para la planificación de implantes dentales y el diseño de guías quirúrgicas personalizadas y altamente precisas. Obtenga resultados predecibles, a la vez que reduce al mínimo el número de visitas de los pacientes.

- Mayor confianza y tranquilidad.
- Mejora de la experiencia del paciente.
- Tiempos de respuesta rápidos.
- Reducción del tiempo de tratamiento.
- Completa documentación de casos.
- Admite flujos de trabajo de tratamiento avanzados.



#Yo elijo

“Elijo coDiagnostiX porque brinda una gran oportunidad para mejorar los resultados clínicos en mi clínica. Me permite maximizar el rendimiento, estudiando exactamente dónde y qué tipo de implante-prótesis y regeneración de tejidos se necesita.”

Dr. Andrea Pandolfi, implantólogo
Estudio Dentistico Pandolfi
Aprilia (Lazio), Italia

coDiagnostiX es una solución digital potente y fácil de usar

Guías quirúrgicas personalizables y altamente precisas.

El asistente de diseño de guías coDiagnostiX ofrece las herramientas de diseño más flexibles para crear guías quirúrgicas exactamente adaptadas a las necesidades anatómicas de sus pacientes.

- Ahorre tiempo con el asistente de diseño de guías.
- Dientes, encías o soporte óseo, además de variantes combinadas disponibles.
- Soporte palatino y/o fijación lateral para facilitar casos edéntulos.

Para aún más flexibilidad, guías quirúrgicas diseñadas con coDiagnostiX pueden estar producidas internamente, por su laboratorio local, o a través de centros de producción centralizada.



coDiagnostiX
Video del FLUJO DE TRABAJO:



Benefíciense de un sistema abierto y un flujo de trabajo completamente digital.

Gracias a un flujo de trabajo completamente digital, con coDiagnostiX no se requiere plantilla de escaneo.

Las interfaces abiertas garantizan la compatibilidad con todos los sistemas de implantes y casquillos, así como con soluciones de fabricación y escáneres abiertos:

- Compatible con todos los escáneres (CB)CT, intraorales, de modelos y de impresión abiertos, además de las soluciones de CAD/CAM abiertas.
- Incluye una biblioteca de sistemas de implantes, casquillos y pilares de múltiples fabricantes que se actualiza periódicamente.
- Permite la creación de elementos personalizados para responder a las necesidades individuales.



Contacte de forma eficaz con sus socios dentales utilizando tecnologías de comunicación fluidos

DWOS® Connect Conectando profesionales dentales en todo el mundo.

Con unos pocos clics, escaneos producidos con un escáner 3D de Dental Wings pueden estar enviados a través de DWOS Connect y fácilmente importados en coDiagnostiX.



caseXchange™

Plataforma de comunicación para los usuarios de coDiagnostiX.


- Envíe los datos del caso a un laboratorio para la fabricación de la guía quirúrgica y/o la prestación de servicios relacionados.
- Intercambie datos del caso con un colega o un experto para obtener una segunda opinión o asesoramiento experto.
- Envíe los datos del caso a la aplicación para iPad coDiagnostiX® para la presentación del caso al paciente.

DWOS® Synergy

Maximice los resultados de tratamiento a través de la planificación colaborativa.

Integre los flujos de trabajo quirúrgicos y protésicos a través de la compartición de los casos en tiempo real entre coDiagnostiX y Dental Wings® DWOS CAD/CAM para acelerar el trabajo.

Para la colaboración con otros sistemas CAD de terceros, se proporciona una interfaz abierta por separado.

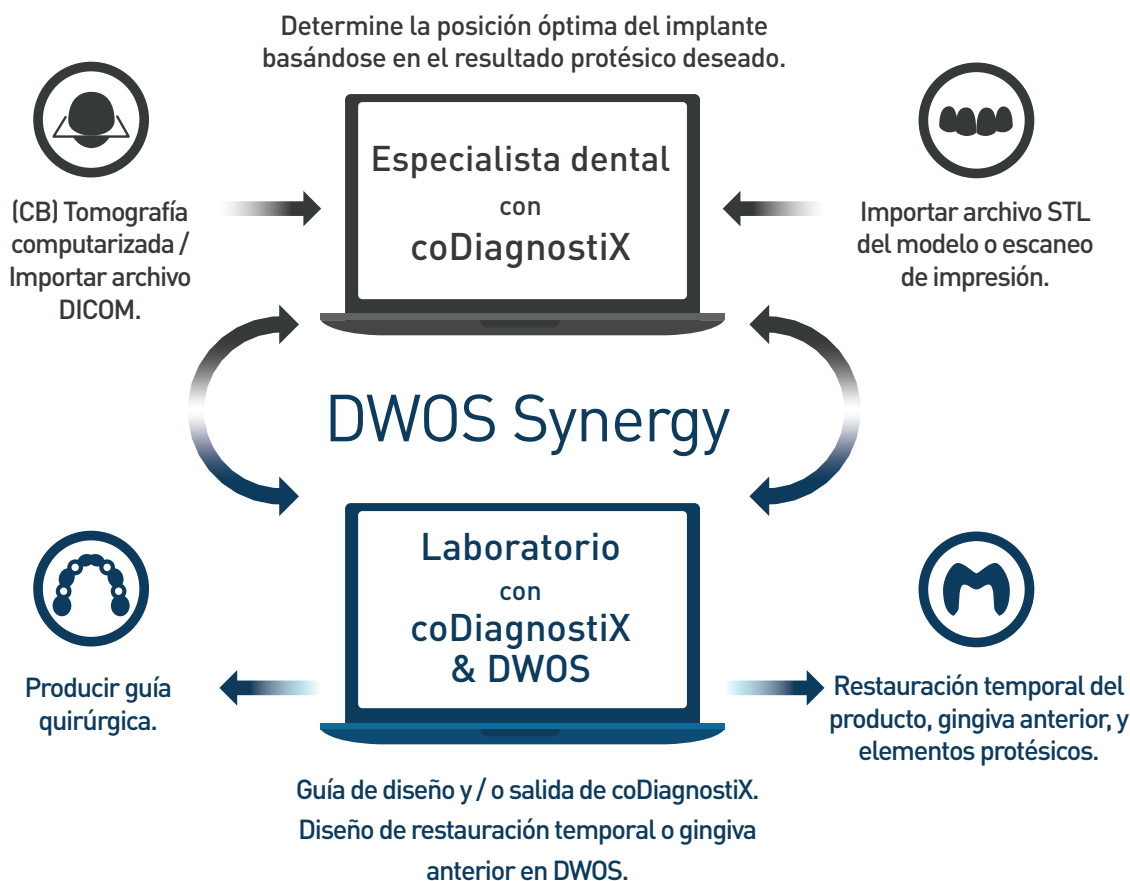

¡Nuevo! coDiagnostiX EASY




Disponible ahora.

La interfaz simplificada y el flujo de trabajo completo desde la alineación de un conjunto de datos a la exportación de guías quirúrgicas.

El modo EASY es ideal para los odontólogos que externalizan los servicios de diseño a un laboratorio o centro de planificación.

- Guía de usuario paso a paso.
- Interfaz de usuario clara e intuitiva.
- Aspecto fresco y moderno.

Dental Wings ofrece licencias atractivas con solo funcionalidad EASY. Por favor refiérase a las [características de la licencia de coDiagnostiX a simple vista](#).

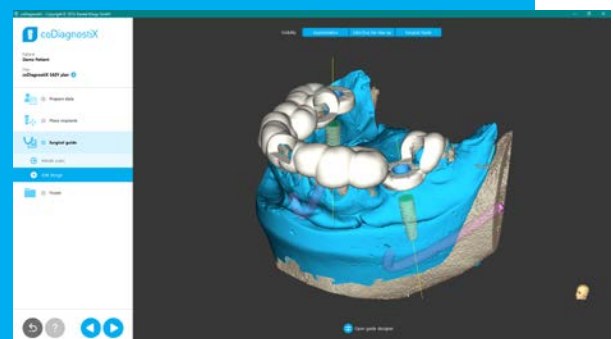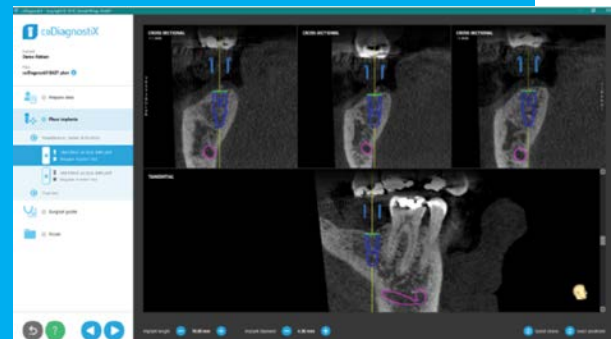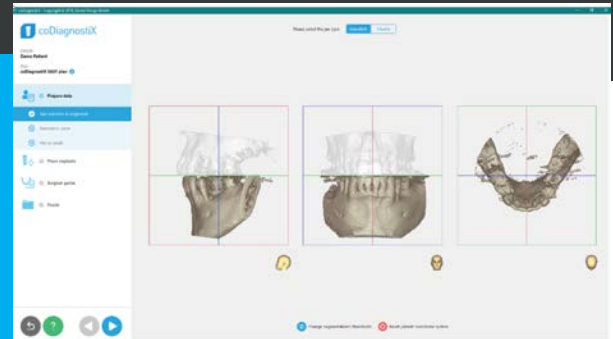

Características de la licencia de coDiagnostiX en un vistazo.

	PRODUCER	CLIENT	EASY	EASY CHAIRSIDE
Planificación				
Interfaz de usuario EASY	●	●	●	●
Curva panorámica	●	●	●	●
Sistema de coordinación de los pacientes	●	●	●	●
Planificación de los implantes, pilares & soportes	●	●	●	●
Biblioteca exhaustiva de implantes	●	●	●	●
Seguridad				
Detección de nervios	●	●	●	●
Aviso de distancia	●	●	●	●
Importación de datos				
Importación DICOM	●	●	●	●
Importación de escaneos de modelos y intraorales	●	●	●	●
Integración de CARES® / DWOS® Connect	●	●	●	●
Salida de datos				
Impresiones	●	●	●	●
iChiropro	●	●	●	●
Visor iPad	●	●	●	●
Guías quirúrgicas				
Diseño de guía quirúrgica	●	●	●	●
Exportación de guía quirúrgica	●			●
Colaboración				
Transfiere casos via caseXchange	●	●	●	
Transfiere casos via intercambio de archivos	●	●		
Planificación multi-asientos (base de datos de la red)	●	●		
Planificación orientada sobre las prótesis				
Dientes virtuales	●	●		
CARES® / DWOS® Synergy	●	●		
Interfaz CAD tercera	●	●		
Planificación avanzada				
Interfaz de usuario EXPERTO	●	●		
Anotaciones	●	●		
Mediciones de la distancia	●	●		
Mediciones continuas de la distancia	●	●		
Mediciones del ángulo	●	●		
Aumento	●	●		
Gestión del imagen	●	●		
Diseñador de implantes	●	●		
Sistema personalizado de soportes	●	●		
Procedura de escaneado dual	●	●		
Asistencia para los casos desdentados	●	●		
Segmentación	●	●		
Exportación de planificaciones virtuales	●	●		

Para lograr la máxima flexibilidad, las licencias con funciones limitadas se pueden actualizar en cualquier momento.



Dental Wings GmbH
Duesseldorfer Platz 1
09111 Chemnitz
Germany

© 2019 Dental Wings. cD0319.vS1

Alas dentales y / u otras marcas comerciales y marcas registradas de Dental Wings mencionadas en este documento son las marcas registradas o registradas Marcas registradas de Dental Wings.

Descargue una versión de demostración de coDiagnostiX:
codiagnostix.com/demo

T 514 807.8485 | 1 888 856.6997 (línea gratuita en EE. UU. y Canadá)
E info@dentalwings.com
W dentalwings.com/codiagnostix

