



Straumann® CARES® Intraoral Scanner
Capture cada nota.





UN PROTOCOLO DE TRABAJO COMPLETAMENTE INTEGRADO Y VALIDADO DESDE EL ESCANEADO HASTA LA FABRICACIÓN

Con el formato abierto de STL, usted puede enviar su impresión digital directamente a su Laboratorio Colaborador a través de Straumann® CARES® Connect.

ESCANEADO
INTRAORAL

TRANSMISIÓN
DE DATOS CON
CARES® CONNECT

DISEÑO DEL MODELO
VIRTUAL CON
STRAUMANN®
CARES® VISUAL

DISEÑO/PLANIFICACIÓN
CON CARES® VISUAL Y
coDiagnostix™

PRODUCCIÓN
DEL MODELO


FABRICACIÓN DE
LA PRÓTESIS

Pequeño en tamaño, grande en flexibilidad

Sienta la libertad

Basado en nuestra novedosa técnica de captura 3D llamada Multiscan Imaging™, el extremadamente compacto Escáner Intraoral de Straumann® CARES® permite a los dentistas y clínicos crear impresiones digitales de forma rápida y fácil. El destacablemente pequeño tamaño de la pieza de mano, una de las más pequeñas del mercado actual, es particularmente bueno para el paciente.

El control a través de voz y gestos convierten al Escáner Intraoral de Straumann® CARES® en una poderosa herramienta que combina la comodidad de la navegación con la higiene. Los dentistas, los técnicos dentales, así como los pacientes, todos ellos se benefician de un protocolo de trabajo digital que ahorra gran cantidad de tiempo comparado con las tradicionales tomas de impresión con cubetas, permitiendo más tiempo para la comunicación y el cuidado del paciente.

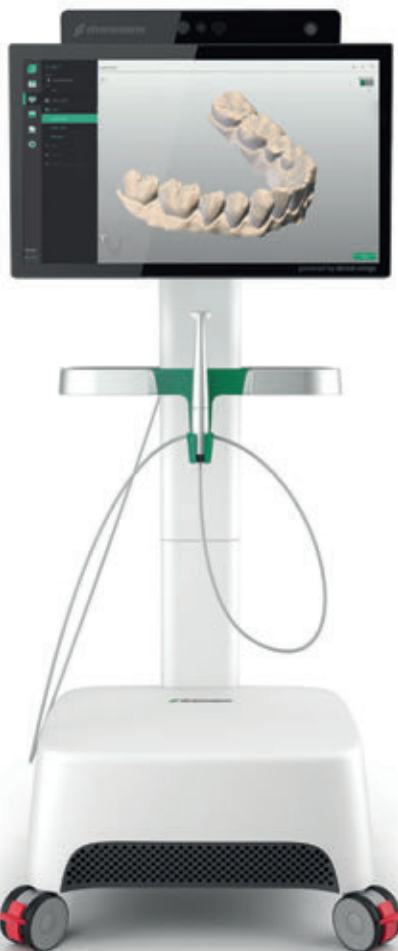

DISEÑADO PARA UN GRAN RENDIMIENTO, FACILIDAD DE USO Y UN ÓPTIMO CONFORT DEL PACIENTE

- **Cómodo para el paciente** – les evita a sus paciente el pasar por el desagradable proceso de toma de impresión con cubetas
- **Velocidad** – más rápido que las tomas de impresión convencionales con cubetas
- **Avanzada tecnología** – la digitalización fascina y atrae a sus pacientes y motiva a su personal de clínica
- **Económico** – los protocolos de trabajo más eficientes y los pacientes más satisfechos incrementan la rentabilidad de su clínica

Sustituya la impresiones dentales tradicionales con datos digitales de alta precisión

Con el Escáner Intraoral de Straumann® CARES® usted puede, de forma rápida y fácil, tomar una impresión digital que puede usarse para el diseño y producción de soluciones protésicas. Usted puede ahorrar una considerable cantidad de tiempo en comparación con métodos tradicionales que necesitan la fabricación y el envío de modelos físicos. Las impresiones digitales sustituyen a las cubetas de impresión convencionales, que son desagradables para el paciente y así el tratamiento puede empezar mucho antes.



FÁCIL MANEJO

La pieza de mano metálica del Escáner Intraoral de Straumann® CARES® se parece mucho a una turbina dental en tamaño, ligereza, forma y sensación. La forma familiar de la pieza de mano permite al dentista centrarse en el paciente, en lugar de en el manejo de alternativas más grandes y pesadas.



DISEÑO PENSADO EN EL PACIENTE

El Escáner Intraoral de Straumann® CARES® reemplaza las impresiones convencionales con cubeta, que son desagradables y consumen tiempo del paciente, permitiéndolo presentar los resultados y las opciones de tratamiento al paciente en tiempo real, lo que acelera el trabajo.



INMEJORABLE ACCESIBILIDAD DE ESCANEO

La tecnología de escaneado 3D Multiscan Imaging™* incluye la potencia de cinco cámaras 3D en miniatura dentro de uno de los más pequeños escáneres de mano disponibles. Los dientes y el tejido blando son escaneados desde diferentes ángulos al mismo tiempo, capturando áreas que normalmente son difíciles de visualizar.



RESULTADOS DIGITALES EN TIEMPO REAL

Un anillo luminoso en la pieza de mano y señales sonoras indican cuándo los datos del escaneado han sido capturados correctamente. Usted puede comprobar la calidad de los datos en tiempo real ya que el software calcula el modelo en 3D. Y además, puede enviar los datos inmediatamente a un proveedor de servicios externo.



* Multiscan Imaging™ captura datos desde todos los ángulos simultáneamente.



- El innovador Control por Gestos dice adiós a los monitores táctiles tradicionales. La tecnología de control de movimientos permite una manipulación sin contacto de los iconos en la pantalla, incluso con los guantes puestos.



Coloque la mano abierta delante del sensor → Activación de la aplicación de control de gestos




Apunte con un dedo hacia arriba → Despliegue del Menú Contextual



Mueva la mano abierta de un lado a otro → Navegación dentro del Menú Contextual



Apunte con un dedo hacia arriba → Detención de la navegación. Puede mover su mano sin que afecte a la selección

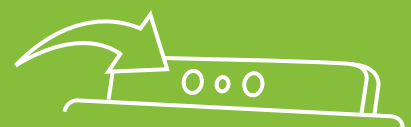

Mueva el brazo hacia el sensor mientras el dedo todavía está apuntando hacia arriba → Introduce la selección

Comodidad y conveniencia en la punta de sus dedos



MULTISCAN IMAGING™ CAPTURA LOS DATOS DESDE TODOS LOS ÁNGULOS AL MISMO TIEMPO

- Cinco cámaras de alta velocidad en miniatura escanean una pieza unitaria en tan sólo 20 segundos y una arcada completa en dos minutos
- Los ficheros STL abiertos pueden transmitirse utilizando la solución en la nube Straumann® CARES® Connect

El Escáner Intraoral de Straumann® CARES® es un sistema de clínica dedicado a “sólo escanear”. Los datos de impresión capturados son transmitidos sin fisuras bien de forma local dentro de la clínica o bien a sistemas remotos para un rápido diseño y producción de la prótesis. Simplemente, escanear y mandar.

UN ANILLO DE LUZ PROPORCIONA AL USUARIO INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LA PIEZA DE MANO

Color	Situación de la Pieza de Mano
Parpadeo, blanco y azul	Pre calentando
Azul	Pre calentado
Verde	Escaneando y tomando datos
Rojo	Escaneando y no tomando datos

EL STRAUMANN® CARES® CONNECT PERMITE LA TRANSMISIÓN DE DATOS SIN FISURAS Y EL SEGUIMIENTO DE LA TODA LA INFORMACIÓN DEL CASO DESDE EL ESCANEO HASTA LA FABRICACIÓN, CONSIGUIENDO ASÍ UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.

Pieza de mano a tamaño real



Contacte con su Delegado Local de Straumann® para solicitar una demostración en vivo.

Escáner Intraoral de Straumann® CARES®
Diseñado para un buen rendimiento, facilidad de uso y comodidad del paciente



International Headquarters

Institut Straumann AG

Peter Merian-Weg 12

CH-4002 Basel, Switzerland

Phone +41 (0)61 965 11 11

Fax +41 (0)61 965 11 01

www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2016. All rights reserved.

Straumann® y / u otras marcas comerciales y logos de Straumann® aquí mencionados son marcas registradas de Straumann Holding AG y / o sus afiliados. Todos los derechos reservados.