




Plus qu'un  
traitement flexible.  
Stimuler l'efficacité  
dans votre laboratoire.

# Plus que de la flexibilité.

La façon la plus efficace de réaliser  
votre restauration.

Le laboratoire d'aujourd'hui nécessite des solutions de restauration flexibles et aussi efficaces que possible au sein de votre flux de travail de laboratoire existant. Selon les retours que nous avons reçus de la part de clients, nous avons agrandi notre gamme Variobase® Abutment Straumann® afin d'offrir aux techniciens de laboratoire la flexibilité et l'efficacité dont ils ont besoin, grâce à une plateforme en conduit élargie et un système de pilier sans engagement pour barres/bridges, le tout allié aux connexions d'implants Straumann d'origine qui offrent un sentiment de sécurité pour les nombreuses années à venir.

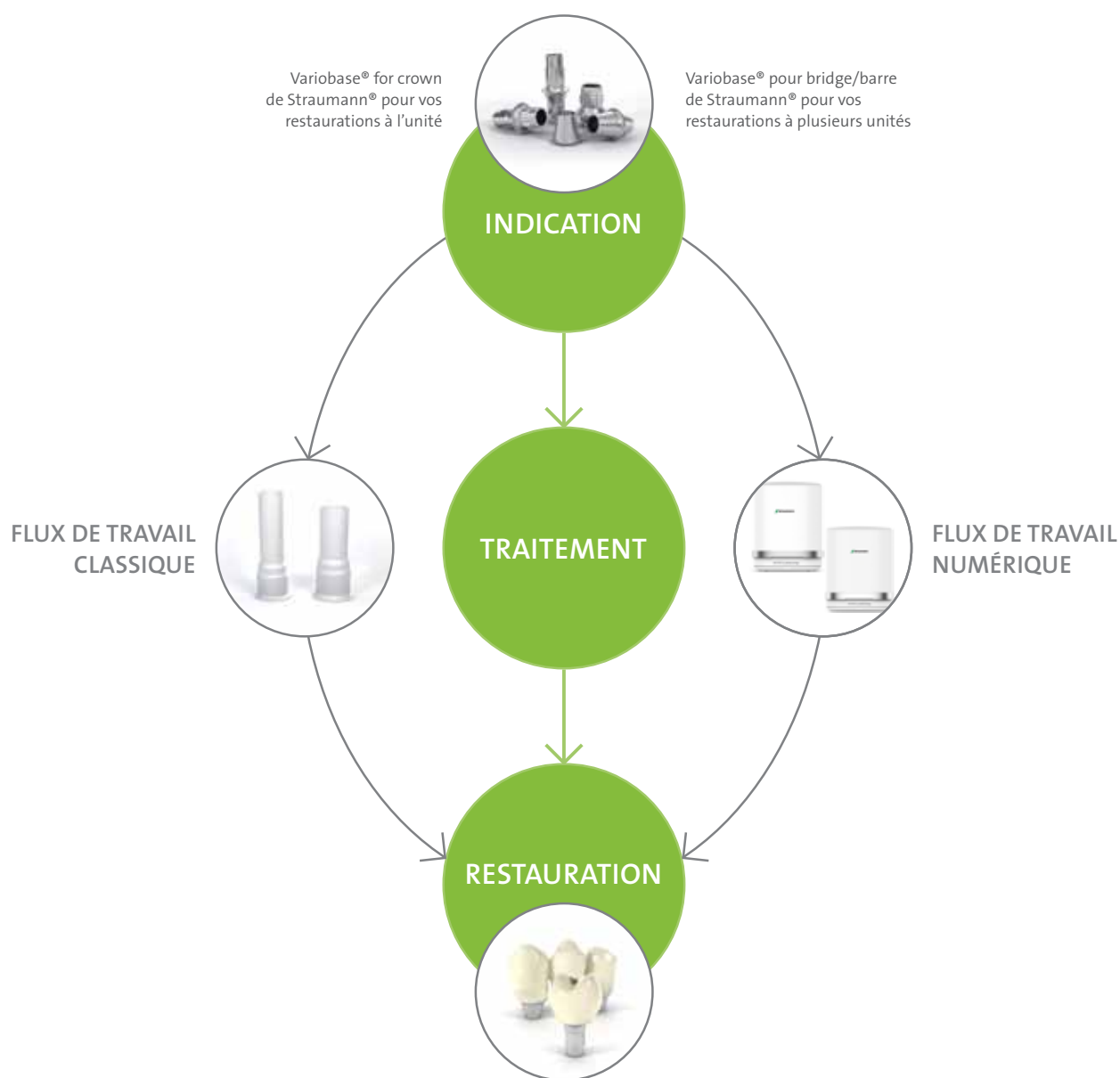

# Plus qu'une connexion innée.

## Un sentiment de sécurité.

Vous pouvez vous fier à l'harmonie parfaite de la conception des implants Straumann et de leurs composants prothétiques correspondants.



### BÉNÉFICIEZ DE LA CONNEXION STRAUMANN® D'ORIGINE

- Des composants à la correspondance parfaite
- Une fiabilité étayée par des preuves cliniques prouvées sur le long terme
- Une assistance et un service excellents
- Garantie limitée à vie\*

Straumann connaît les dimensions et les tolérances exactes de ses implants, et offre des implants munis d'un ajustement parfait et fiable à leurs composants prothétiques correspondants. Une fabrication de haute précision, ainsi qu'un processus d'inspection minutieux, garantit la qualité continue de tous les composants Straumann® d'origine.

- 1 Variobase® de Straumann® avec implant Straumann® WN 4.8
- 2 Variobase® de Straumann® avec implant Straumann® RC 4.1



\* Pour connaître les conditions applicables de la Garantie Straumann® (notamment le territoire de Garantie), veuillez consulter la brochure intitulée Garantie Straumann (USLIT 479/CALIT 502)

# Plus qu'un pilier.

## Une liberté de conception maximale.

Variobase® de Straumann® vous offre des options de restauration élargies avec une liberté de conception maximale.



### VARIOBASE® FOR CROWN DE STRAUMANN®

Variobase® for crown de Straumann® pour vos restaurations à l'unité est désormais disponible en deux hauteurs de pilier.

### Forte rétention de la coiffe qui se trouve sur le pilier

Grâce au mécanisme d'engagement breveté\* équipé de quatre cames, Variobase® pour couronne permet le positionnement exact et la fixation par rotation de la coiffe ou de la couronne. Cette fonctionnalité permet de réduire les mauvais positionnements par rotation de la coiffe par rapport aux autres modèles ne comportant qu'une seule came.




### Option de hauteur de pilier personnalisable\*\*

Afin de correspondre à la situation personnelle du patient, la hauteur de pilier de 5.5 mm peut être personnalisée et réduite jusqu'à 3.5 mm.

\* Brevet en attente en Europe. Brevet délivré aux États-Unis.

\*\* Uniquement disponible pour un flux de travail traditionnel; la hauteur de pilier ne peut être réduite dans le flux de travail numérique.

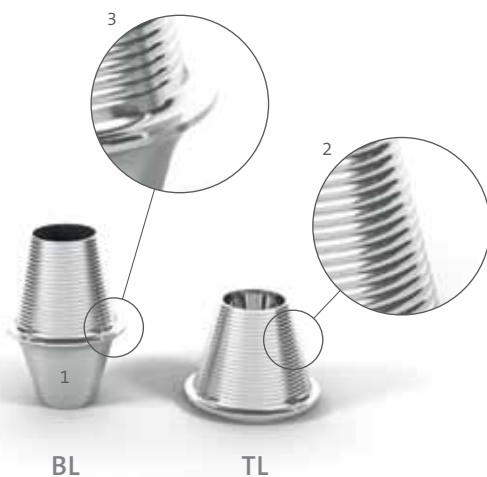

## VARIOBASE® POUR BARRE/BRIDGE DE STRAUMANN®

Bénéficiez de la performance des produits Straumann pour les restaurations à plusieurs unités d'implants Straumann droits et anguleux\*.

- 1 Forme conique sans engagement conçue pour des options de restauration des bridges et barres polyvalentes et rentables
- 2 Rainures pour la rétention solide de la restauration prothétique
- 3 Arête de référence pour la stabilité sur le long terme et l'ajustement passif, nécessaire pour les bridges à base d'implant ou les constructions dentaires fixes

## ENCORE PLUS DE RAISONS DE CHOISIR VARIOBASE®

### La hauteur minimale de pilier offre une flexibilité maximale de conception

Variobase® comporte l'une des hauteurs de pilier parmi les plus petites du marché, ce qui vous donne une grande flexibilité de conception pour vos restaurations implantaire, même dans des situations où vous disposez d'un espace restreint.



### Gagnez du temps et évitez le processus de décapage

Grâce aux cames d'engagements conçues spécialement pour Variobase® pour couronne et aux rainures de Variobase® pour barre/bridge, vous profitez d'une surface de liaison sans décapage. Cela vous permet de gagner un temps précieux grâce à la réduction de vos étapes de traitement.

\* Variobase® peut être employé pour compenser une divergence de 30° maximum entre deux implants; les coiffes Variobase® peuvent être employées avec les piliers à vis Straumann® pour compenser des divergences plus importantes.

# Plus que de la flexibilité.

## Choisissez le flux de travail en laboratoire que vous préférez.

Utilisez Variobase® de Straumann® dans le flux de travail en laboratoire de votre choix afin de créer des restaurations prothétiques de haute qualité.



**Techniques de pression ou de moulage :** moulez de façon simple et précise la restauration prothétique à l'aide des coiffes calcinables.

Variobase® pour barre/bridge : placez la coiffe calcinable sur le Variobase® et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'éviter tout mouvement rotatif ou vertical.

### RESTAURATIONS NUMÉRIQUES

Choisissez l'option de flux de travail numérique qui convient à votre environnement de laboratoire :

- **Systèmes de scanners en laboratoire CARES® :** numérisez et modélisez votre restauration prothétique de façon précise; utilisez la fonctionnalité CARES® X-Stream pour la solution de prothèse complète en une étape et recevez la couronne et le pilier définitifs en une seule fois
- **Application CARES® :** par l'intermédiaire de Dental Wings\* ou 3M™ Lava\*™
- **Pour 3Shape® :** téléchargez les données Variobase STL pour la conception géométrique exacte de la restauration prothétique
- **Service CARES® Scan & Shape :** envoyez simplement votre modèle ou moulage à notre service de conception sur demande et recevez une restauration précise et originale de Straumann













\* Veuillez communiquer avec votre représentant local pour connaître la disponibilité ou les versions logicielles admissibles.

# Plus que de l'efficacité.

## CARES® X-Stream™.

Gagnez du temps grâce à notre **solution efficace et rentable** en une étape pour les restaurations prothétiques implantaires à l'unité ou à plusieurs dents. CARES® X-Stream™ permet aux laboratoires dentaires de concevoir, de commander et de recevoir le pilier Variobase® de Straumann® avec une restauration complète de couronne, de coiffe, de bridge ou de barre.

			Options de remplacement dentaire (armature de bridge, barre ou restauration complète de bridge, jusqu'à 10 connexions de pilier implantaires)					
			Céramique			Métal		Polymère
			IPS e.max® CAD	Lava™ Plus en zircone²	zerion®³	coron®	ticon®/ titane⁴	polycon® ae²
								
Options de pilier	Variobase® pour couronne¹	 ou 	Dent unique	Dent unique	Dent unique	Dent unique	S.O.	Dent unique
	Variobase® pour barre/bridge¹		S.O.	Arc complet*	Arc complet	Arc complet	Arc complet	Arc complet
	Coiffe Variobase® pour pilier à vis¹		S.O.	Arc complet*	Arc complet	Arc complet	Arc complet	Arc complet

S.O. = Indisponible

\* Arc complet commercialisé uniquement aux États-Unis. Arc complet pour le Canada en attente d'autorisation de Santé Canada (commercialisé actuellement jusqu'à 5 unités)

<sup>1</sup> Restaurations disponibles uniquement avec orifices de filet

<sup>2</sup> Non disponible pour les barres

<sup>3</sup> Non disponibles pour les barres fraisées (barres de prothèse supradentaire)

<sup>4</sup> Titane de grade 4 utilisé pour les constructions de bridge et de barre sur Variobase®

---

**Siège social international**

Institut Straumann AG  
Peter Merian-Weg 12  
CH-4002 Basel, Suisse

Téléphone +41 (0)61 965 11 11  
Télécopieur +41 (0)61 965 11 01

**Siège social nord-américain de Straumann**

Straumann USA, LLC  
60 Minuteman Road  
Andover, MA 01810

Téléphone 800/448 8168 (É.-U.) • 800/363 4024 (CA)  
Télécopieur 978/747 2490  
[www.straumann.us](http://www.straumann.us) • [www.straumann.ca](http://www.straumann.ca)

[ifu.straumann.com](http://ifu.straumann.com)