




CARES® Solutions numériques intégrées CARES® Visual pour cabinet dentaire

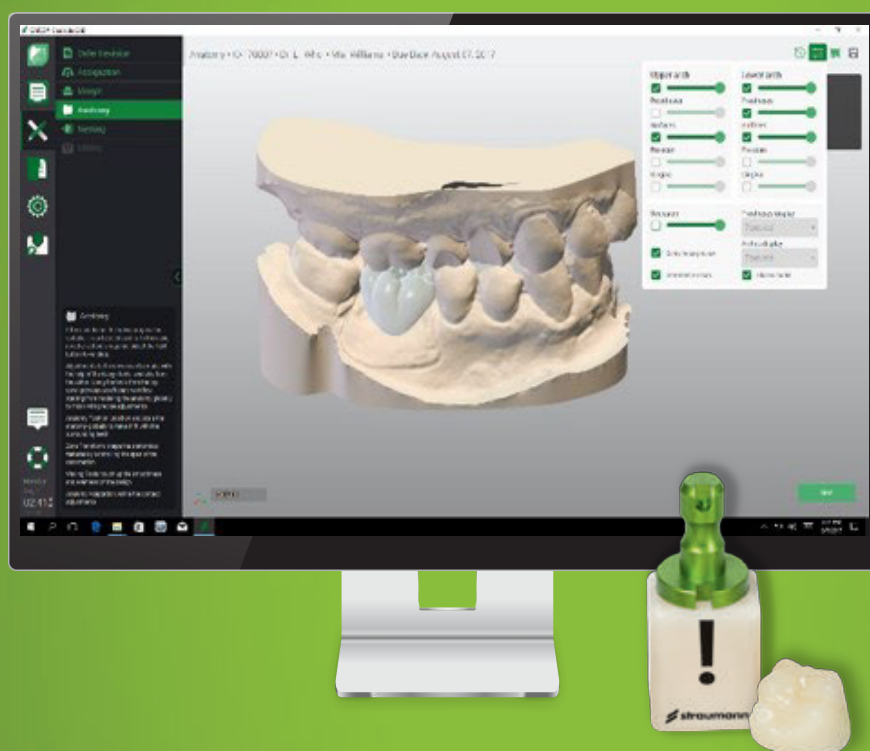

CARES® Visual pour cabinet dentaire

- Conçu pour fournir aux dentistes une solution de conception CAD prothétique intuitive et rapide
- Logiciel avec conception ouverte pour une solution au cabinet compatible avec :
 - Scanner intraoral
 - Scanner d'empreinte
 - Machine d'usinage
- Soutien pour une large gamme d'indications, y compris :
 - Couronnes, inlays, onlays et facettes
 - Bridges de faible envergure
 - Couronnes implanto-portées
- Système ouvert :
 - Permet l'entrée et la sortie de STL pour le soutien de systèmes tiers
- Connexion simple avec l'usineuse C-series de cabinet dentaire

LOGICIEL INTUITIF POUR CABINET DENTAIRE

Import direct

Importation directe des données scannées à partir du scanner intraoral CARES® ou d'autres dispositifs de scannage intraoral.

Propositions automatiques

La technologie avancée Tooth-Chain de Dental Wings effectue la saisie automatique de la forme de la restauration proposée, y compris l'anatomie, les cuspidés, les crêtes marginales et le profil d'émergence, en analysant et en reproduisant les caractéristiques anatomiques des dents adjacentes. La saisie informatique de l'occlusion est automatiquement effectuée à partir des dents adjacentes.

Outil de conception facile à utiliser

Identification des contours, conception de l'anatomie et sélection de l'axe d'insertion.




Technologie Tooth-Chain



Identification des contours




Conception anatomique

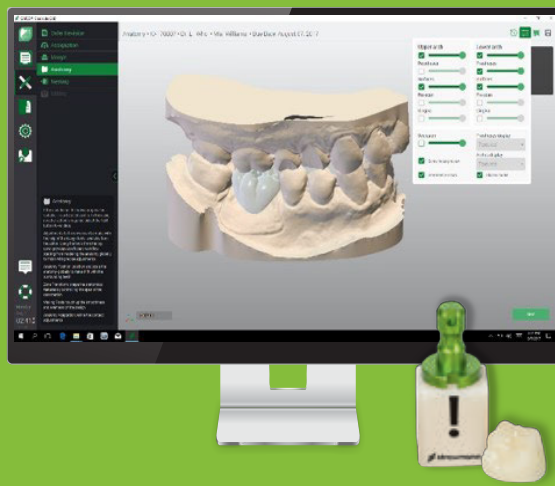

CONNECTÉ DIRECTEMENT AVEC STRAUMANN® CARES® C-SERIES


Imbrication et usinage

Le positionnement de la restauration dans les blocs est simple et intuitive, et permet une préparation rapide pour un usinage au cabinet dentaire avec la C-series ou d'autres usineuses.

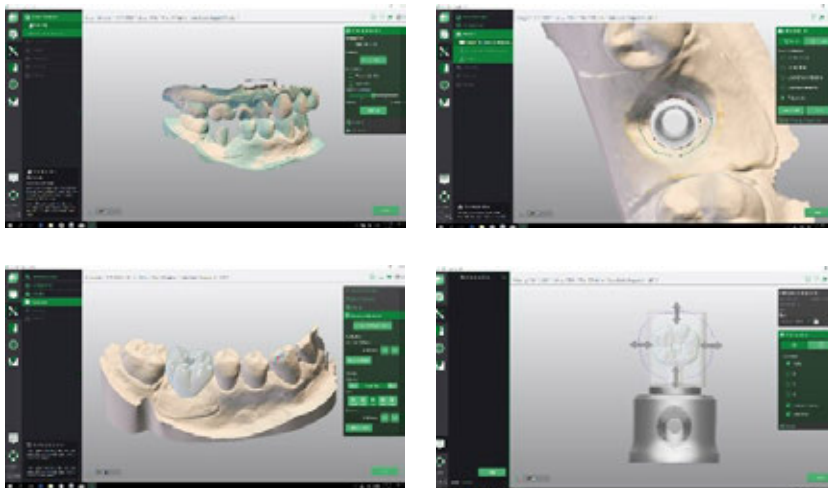

Soumission directe

Après la conception de votre restauration, vous pouvez l'envoyer directement à l'usineuse précise et rapide, C-series pour cabinet dentaire.

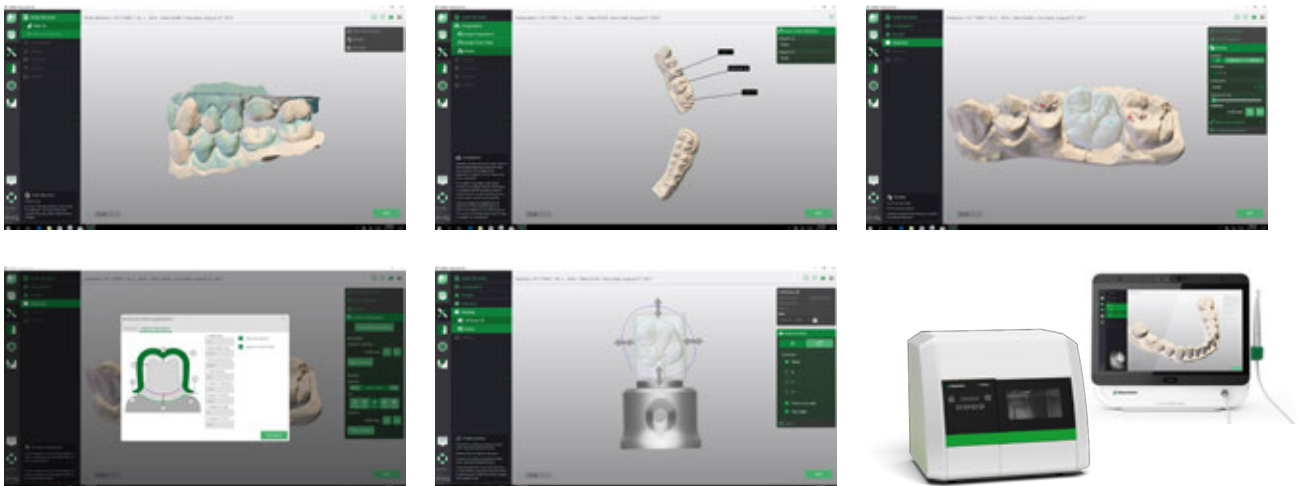

Réf.	Élément
019.0736	Logiciel CARES® Visual pour cabinet dentaire sans CAM – pour usineuses tierces
019.0744	Logiciel CARES® Visual pour cabinet dentaire avec intégration CAM – pour C-series

International Headquarters

Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

National Distributor

Institut Straumann AG
Straumann Suisse
Peter Merian-Weg 12
Case postale
CH-4002 Bâle
www.straumann.ch

Conseil clientèle / acceptation des commandes

Tél. CARES® : 0800 810 816
E-mail : cad-cam.ch@straumann.com

© Institut Straumann AG, 2018. Tous droits réservés.

Straumann® et/ou les autres marques commerciales et logos de Straumann® mentionnés ici sont des marques commerciales ou marques déposées de Straumann Holding AG et/ou de ses sociétés affiliées.

Votre droit de contestation : si vous vous opposez au traitement de vos données à des fins publicitaires ou souhaitez retirer un consentement donné, il suffit de l'indiquer à tout moment au service clients par e-mail à l'adresse ch.sales@straumann.com ou par courrier postal à l'Institut Straumann AG, Customer Services, Peter Merian-Weg 12, 4002 Bâle. Il en va de même si vous souhaitez vous opposer au traitement de vos données pour des motifs découlant de votre situation particulière.