



Straumann® CARES® スキャナー

D7 Plus



CARES® Visual 追加機能

CARES® MPS

マルチプラットフォームシステム

Straumann® CARES® スキャナー D7 Plus

CAD/CAM冠
保険対応



■ ブルーレーザー搭載により、再現性の高い、高精度のスキャンが可能です。

【内容】

- CARES® スキャナーD7 Plus 本体 (PC内蔵)
- CARES® Visual ソフトウェア
- アクセサリーキット (モニター、キーボード、マウス、LANケーブル) *
- 初年度基本ライセンス料**

*スキャンボディ、Wax-upアバットメントキットは別売りです。

**2年目以降は年間ライセンス料 ¥220,000 が別途必要となります。ライセンス料には保守料が含まれます。

D7 Plus / スキャナー 【仕様】

品番	019.0156
マルチダイモード	最大30個のエレメントが同時スキャン可能
スキャン可能材料	石膏 (全色)、ワックスアップ、 印象材 (シリコン&アルギン酸)
精度	15µm
軸数	5本 (回転軸3本、移動軸2本)
光学技術	レーザー光源、クラス1、高速測定カメラ2台、 カラービデオカメラ1台
スキャン可能範囲	140mm X 140mm X 140mm
コンピュータOS	内蔵型、Core i7、16GBメモリ、 2GB専用RAMグラフィックカード、 Windows 7、64ビット、500GB SSD
重量	19Kg
電圧	110/240 V 50-60 Hz/280w
出力フォーマット	STL&サポートパートナーフォーマット
ディスプレイ端子	DVI / HDMI / VGA
寸法 (奥行×幅×高さ)	380mm X 380mm X 480mm



CARES® Visual ソフトウェア アプリケーション ※オプションモジュールについてはお問い合わせください

クラウン&ブリッジ	標準装備
アバットメント&SRBB	標準装備
モデルビルダー	標準装備
パーシャルフレームワーク	標準装備

フルデンチャー	オプション
バイトスプリント	オプション



■ CARES® X-Stream™ の修復オプション

セラミック

nIce®	e.max® CAD	KATANA® UTML	KATANA® ML	zerion® LT	3M Lava™ Esthetic	3M Lava™ Plus Zirconia
● LT/HT ● ユニット数: 単冠	● LT/HT/MO ● ユニット数: 単冠	● ユニット数: 3	● ユニット数: 16	● ユニット数: 16	● ユニット数: 3	● ユニット数: 16



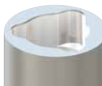
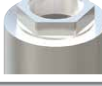
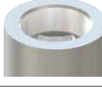
X-Stream™ とは？

CARES® Visual ソフトウェアの機能のひとつです。
カスタムアバットメントと上部構造を同時設計、
同時製作することのできるソリューションです。

メタル

ポリマー

ticon® (Ti)	coron® (CoCr)	polycon® ae
● ユニット数: 16	● ユニット数: 16	● ユニット数: 16

CARES® MPS		対応表		スキャンボディ			インプラントアナログ			MPSデジタルアナログ			MPSドライバー（ラチェット用・ハンドピース用）					
				スキャンボディ	インプラント コネクション径(φ)	製品番号	アナログ	インプラント コネクション径(φ)	製品番号	アナログ	インプラント コネクション径(φ)	製品番号	スクリュードライバー	インプラント コネクション径(φ)	ハンドピース用 /ラチェット用	製品番号	推奨締結 トルク値	
Nobel Biocare® 対応	● NobelReplace® Tapered																	
	TC (Tri Channel)	 	 	NP φ 3.5	E 1400		NP φ 3.5	E 50		NP φ 3.5	E 80		NP φ 3.5		ハンドピース用	短	M 09-5	35 Ncm
	RP φ 4.3	E 1410	RP φ 4.3	E 51	RP φ 4.3		E 81	RP φ 4.3		長	M 03-5							
	WP φ 5.0	E 1420	WP φ 5.0	E 52	WP φ 5.0		E 82	WP φ 5.0		ラチェット用	短		M 11-5					
	φ 6.0	E 1430	φ 6.0	E 53	φ 6.0		E 83	φ 6.0		長	M 10-5							
● NobelActive®, NobelReplace® Conical																		
CC (Conical Connection)	 	 	φ 3.0	F 1420		φ 3.0	F 52		φ 3.0	F 82		φ 3.0		ハンドピース用	短	M 09-5	15 Ncm	
NP φ 3.5	F 1400	NP φ 3.5	F 50	NP φ 3.5		F 80	NP φ 3.5		長	M 03-5								
RP φ 4.3 / 5.0	F 1410	RP φ 4.3 / 5.0	F 51	RP φ 4.3 / 5.0		F 81	RP φ 4.3 / 5.0		ラチェット用	短		M 11-5		35 Ncm				
● Brånemark®																		
Hex	 	 	NP φ 3.5	K 1400		NP φ 3.5	K 50		NP φ 3.5	K 80		NP φ 3.5		ハンドピース用	短	M 09-5	35 Ncm	
RP φ 4.1	K 1410	RP φ 4.1	K 51	RP φ 4.1		K 81	RP φ 4.1		長	M 03-5								
WP φ 5.1	K 1420	WP φ 5.1	K 52	WP φ 5.1		K 82	WP φ 5.1		ラチェット用	短		M 11-5		長	M 10-5			
DENTSPLY® Implants 対応	● ASTRA TECH OsseoSpeed®TX																	
	Astra	 	 	φ 3.0	S 1430		φ 3.0	S 53		φ 3.0	S 83		φ 3.0		ハンドピース用	短	M 09-1	15 Ncm
	φ 3.5 / 4.0	S 1400	φ 3.5 / 4.0	S 50	φ 3.5 / 4.0		S 80	φ 3.5 / 4.0		長	M 03-1							
	φ 4.5 / 5.0	S 1420	φ 4.5 / 5.0	S 52	φ 4.5 / 5.0		S 82	φ 4.5 / 5.0		ラチェット用	短		M 11-1		長	M 10-1		
	● ASTRA TECH OsseoSpeed®EV																	
	Astra	 	 	φ 3.0	EV 1400		φ 3.0	EV 50		φ 3.0	EV 80		φ 3.0		ハンドピース用	短	M 09-1	25 Ncm
	φ 3.6	EV 1410	φ 3.6	EV 51	φ 3.6		EV 81	φ 3.6		長	M 03-1							
	φ 4.2	EV 1420	φ 4.2	EV 52	φ 4.2		EV 82	φ 4.2		ラチェット用	短		M 11-1					
	φ 4.8	EV 1430	φ 4.8	EV 53	φ 4.8		EV 83	φ 4.8			長		M 10-1					
	φ 5.4	EV 1440	φ 5.4	EV 54	φ 5.4		EV 84	φ 5.4										
● XIVE®S																		
XIVE	 	 	φ 3.4	T 1400		φ 3.4	T 50		φ 3.4	T 80		φ 3.4		ハンドピース用	短	M 09-2	25 Ncm	
φ 3.8	T 1405	φ 3.8	T 55	φ 3.8		T 85	φ 3.8		長	M 03-2								
φ 4.5	T 1410	φ 4.5	T 51	φ 4.5		T 81	φ 4.5		ラチェット用	短		M 11-2						
φ 5.5		φ 5.5	T 52	φ 5.5		T 82	φ 5.5			長		M 10-2						
BIOMET 3i® 対応	● Certain®																	
	Cert	 	 	φ 3.4	H 1400		φ 3.4	H 50		φ 3.4	H 80		φ 3.4		ハンドピース用	短	M 09-2	25 Ncm
	φ 4.1	H 1410	φ 4.1	H 51	φ 4.1		H 81	φ 4.1		長	M 03-2							
	φ 5.0		φ 5.0	H 52	φ 5.0		H 82	φ 5.0		ラチェット用	短		M 11-2		長	M 10-2		
	● External Hex																	
Hex	 	 	φ 3.4	I 1400		φ 3.4	I 50		φ 3.4	I 80		φ 3.4		ハンドピース用	短	M 09-1	20 Ncm	
φ 4.1	I 1410	φ 4.1	I 51	φ 4.1		I 81	φ 4.1		長	M 03-1								
φ 5.0		φ 5.0	I 52	φ 5.0		I 82	φ 5.0		ラチェット用	短		M 11-1		長	M 10-1			
Zimmer® Dental / BioHorizons® 対応	● Zimmer® Dental : Tapered Screw-Vent® / BioHorizons®: Tapered Internal, Tapered Internal Plus, Tapered Tissue Level																	
	Zim/BH	 	 	φ 3.5	R 1400		φ 3.5	R 50		φ 3.5	R 80		φ 3.5		ハンドピース用	短	M 09-1	35 Ncm
	φ 4.5	R 1410	φ 4.5	R 51	φ 4.5		R 81	φ 4.5		長	M 03-1							
	φ 5.7	R 1420	φ 5.7	R 52	φ 5.7		R 82	φ 5.7		ラチェット用	短		M 11-1		長	M 10-1		
Altatec 対応	● Camlog®																	
	Camlog	 	 	φ 3.3	C 1400		φ 3.3	C 50		φ 3.3	C 80		φ 3.3		ハンドピース用	短	M 09-1	20 Ncm
	φ 3.8	C 1410	φ 3.8	C 51	φ 3.8		C 81	φ 3.8		長	M 03-1							
	φ 4.3	C 1420	φ 4.3	C 52	φ 4.3		C 82	φ 4.3		ラチェット用	短		M 11-1					
	φ 5.0 / 6.0	C 1430	φ 5.0 / 6.0	C 53	φ 5.0		C 83	φ 5.0 / 6.0			長		M 10-1					
	● Conelog®																	
	Conelog	 	 	φ 3.3	D 1400		φ 3.3	D 50				φ 3.3	ハンドピース用	短	M 09-1	20 Ncm		
φ 3.8 / 4.3	D 1410	φ 3.8 / 4.3	D 51	長	M 03-1													
											φ 3.8 / 4.3	ラチェット用	短	M 11-1				
													長	M 10-1				

CARES® MPS マルチプラットフォームシステム

■ 対応コネクション

歯科技工物 納期：5営業日*

*：ドイツからの国際空輸3〜4日を含みます

Nobel Biocare®	DENTSPLY® Implants	BIOMET 3i®	Zimmer® Dental / BioHorizons®	Altatec
 TC – NobelReplace® Tapered	 ASTRA – ASTRA TECH OsseoSpeed®EV	 Cert – Certain®	 Zim/BH Zimmer® Dental – Tapered Screw-Vent® BioHorizons® – Tapered Internal – Tapered Internal Plus – Tapered Tissue Level	 Camlog – Camlog®
 CC – NobelActive® – NobelReplace® Conical	 ASTRA – Astra TECH OsseoSpeed® TX	 Hex – External Hex		 Conelog – Conelog® [NEW]
 Hex – Brånemark®	 XIVE – XIVE® S			

■ ラインアップ

製品名	材質	オプション
CARES® MPS カスタムアバットメント (スクリュー2本付) 	アバットメント： チタングレード5 または コバルトクロム スクリュー： チタングレード5	- 各インプラントシステムに対応 - 単冠のみ
CARES® MPS X-Stream™ Ti-base +クラウン・コーピング (スクリュー1本付) 	アバットメント： チタングレード5 スクリュー： チタングレード5	- 高さ 3.5mm/5.5mm - 各インプラントシステムに対応 - 単冠のみ

■ インストルメント

製品名	旧製品番号	新製品番号
MPS ドライバー ハンドピース用  (短) (長)	Hex 1.2mm 短	1ZA025.03 M 09-2
	Hex 1.2mm 長	1ZA025.01 M 03-2
	Hex 1.26mm 短	1ZA025.02 M 09-1
	Hex 1.26mm 長	1ZA025.00 M 03-1
	UG 短	1ZA027.01 M 09-5
	UG 長	1ZA027.00 M 03-5
MPS ドライバー ラチェット用 ※専用のMPSトルクラチェットをご使用ください。  (短) (長)	Hex 1.2mm 短	1ZA028.03 M 11-2
	Hex 1.2mm 長	1ZA028.01 M 10-2
	Hex 1.26mm 短	1ZA028.02 M 11-1
	Hex 1.26mm 長	1ZA028.00 M 10-1
	UG 短	1ZA030.01 M 11-5
	UG 長	1ZA030.00 M 10-5
MPS トルクラチェット 	10 - 40 Ncm	1ZA031.00 M 12
MPS ラチェット用アダプター 	—	1ZA032.00 M 14
MPS スキャンボディ ・パウダー不要	▶ 詳細は内面をご参照ください	
MPS インプラントアナログ		

■ Straumann® CARES® Visual MPS オーダー手順

CARES® MPS X-Stream™ Ti-base の場合

補綴ファミリー ①
アバットメント
マテリアル ②
etkon® iDent
インプラントキット ③
CIM ND 33
補綴サブタイプ ④
CIM ND-33_4.0

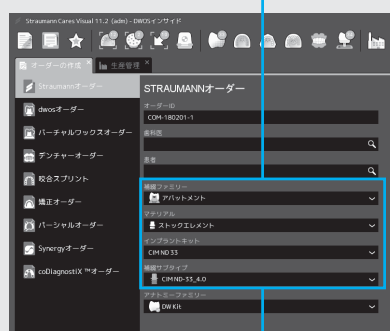
- ①【補綴ファミリー】→ アバットメントを選択
②【マテリアル】→ ストックエレメントを選択

インプラントキット
CIM ND 33
etkon® iDent
Compatible with BIOMET 3i® [Certain®]
etkon® iDent Ti-base 3.5 mm
etkon® iDent Ti-base 5.5 mm
Compatible with BIOMET 3i® [External Hex]
etkon® iDent Ti-base 3.5 mm
etkon® iDent Ti-base 5.5 mm

- ③【インプラントキット】インプラントメーカーやインプラントタイプと使用するTi-baseのAHを選択

補綴サブタイプ
2AC010.00 [D 3.4 GH 0.3]
2AC010.00 [D 3.4 GH 0.3]
2AC010.01 [D 4.1 GH 0.3]
2AC010.02 [D 5.0 GH 0.3]

- ④【補綴サブタイプ】使用するTi-baseタイプと直径を選択



カスタムアバットメントの場合

チタン (Ti)

補綴ファミリー
アバットメント
マテリアル
etkon® iDent Customized Abutment, Ti
色
無し

【マテリアル】→ Customized Abutment, Tiを選択

コバルトクロム (CoCr)

補綴ファミリー
アバットメント
マテリアル
etkon® iDent Customized Abutment, CoCr
色
無し

【マテリアル】→ Customized Abutment, CoCrを選択

選択後、歯式を選択しCADデザインへ

- NobelReplace® Tapered, NobelActive®, NobelReplace® Conical, Brånemark®は Nobel Biocare社の登録商標です。
- Certain®, External Hexは BIOMET 3i®社の登録商標です。
- Tapered Screw-Vent®, BioHorizons®/ Tapered Internal, Tapered Internal Plus, Tapered Tissue Levelは Zimmer®DentalおよびBioHorizons®社の登録商標です。
- ASTRA TECH OsseoSpeed®TX、XIVE®SIは DENTSPLY®Implants社の登録商標です。
- 3M™、ESPE™、Lava™は 3M または 3M Deutschland GmbHの商標であり、カナダでライセンスされています。
- IPSe.max®は Ivoclar Vivadent AG、Liechtensteinの登録商標です。
- KATANA®は株式会社ノリタケカンパニーリミテドの登録商標です。
- *で示された製品は、各メーカーの登録商標です。

- 価格および記載内容は2018年6月現在のものです。予告なく変更させて頂く場合もございます。
- 天候、交通事情等の理由により製品の到着が遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。

Straumann® CARES® 製品保証

- 金属修復物：10年保証
- セラミック修復物：5年保証

Straumann® CARES® コーピング、フルカントウアカラウンおよびブリッジを含みます。それ以外のStraumann®が提供する製品、特にStraumann® CARES® インレー、オンレー、ベニア、パーシャルクラウンは保証対象外となります。

※ 他社製インプラントの保証は致しかねます

※注意：当フライヤーに記載の上部構造またはCARES®アバットメントは、ストローマン社のCAD/CAMを用いた製作例です。

販売名：MDT 技工用アナログ 分類：一般医療機器 届出番号：13B1X10163000318
販売名：MDT 技工用インプレッション 分類：一般医療機器 届出番号：13B1X10163000319

販売名：CARES スキャナー D7 Plus 分類：一般医療機器 届出番号：13B1X10163000207

ストローマン・ジャパン株式会社

〒108-0014 東京都港区芝5-36-7 三田ベルジュビル 6階

受注専用ダイヤル：0120-418-995 デジタルサポート：0120-418-320
製品サポート：0120-689-930 FAX (共通)：0120-418-089

※TEL受付時間 平日 9:00 ~ 17:30 / デジタルサポートは18:00まで

※当日出荷受付時間 平日 17:00 まで

本文またはその一部をInstitut Straumann AGの書面による許可なくして複製または発行することはできません。
Straumann®, nlce®およびetkon® iDentは、Straumann Holding AGおよびその関連会社の商標または登録商標です。

【登録技工所】エトコン・ジャパン株式会社