

# STRAUMANN® PRO 2

操作性・安全性・拡張性を向上させた  
アップグレードモデル



# STRAUMANN® PRO 2

口腔外科用マイクロモーターシステム「Straumann® Pro」は、操作性、安全性、ワイヤレスによるネットワークの拡張性を向上させ、「Straumann® Pro 2」へ進化しました。



## Strong

- 最大トルク値80Ncmの強力なモーターは、すべてのストローマン インプラントタイプに適應
- コントロールユニットおよびマイクロモーターは2年保証付き（ハンドピース、その他製品は1年）



## Simple

- 視認性と操作性が向上した大型液晶パネル
- 高演色LEDにより、血液や歯肉をより自然な色で再現
- 最大8つのプログラムを記憶可能
- フットコントロールにより、コントロールユニットのパネルに触れることなく、プリセットパラメータ内のすべての機能にアクセス可能




## SAFE

- 「トルクリミッター」機能により、設定トルク値に達するとモーターが自動停止
- 「トルクキャリブレーション」機能により、正確なトルク出力を維持

## OPERABILITY 操作性

新しいモーターは従来と比べて2 cm短く、また重さも11g軽量化したことにより、重心がハンドピース側に移動され、インプラント治療時の操作性が向上しました。

また、標準セットのコントラはヘッドサイズが2mm小さくなり、口腔内へのアクセスやサージカルガイドへの対応が向上しました。

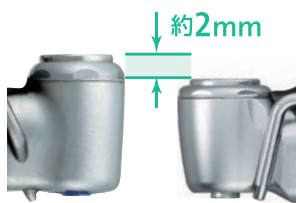


従来品モデル

Straumann Pro2



長さ  
2.04cm  
短く  
なりました

6.15cm (従来品: 8.19cm)

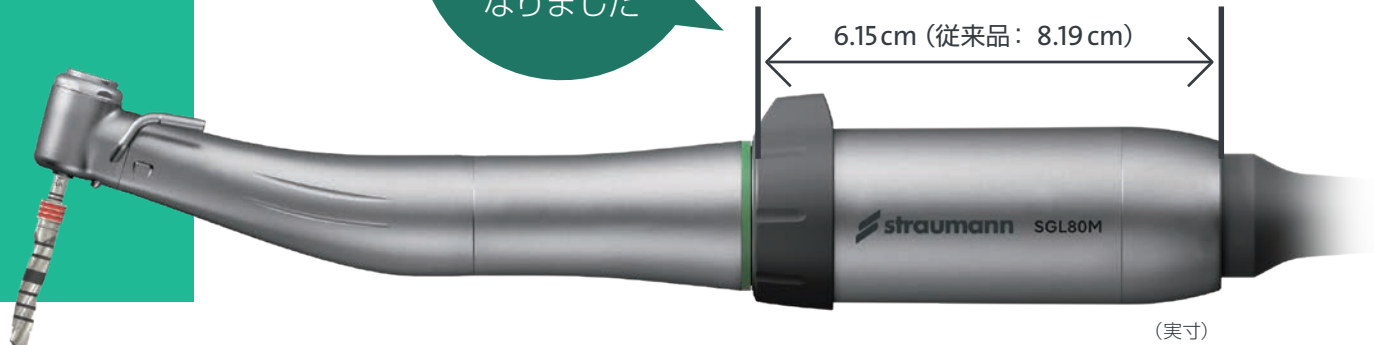

(実寸)


重さ  
11g 軽く  
なりました

## SAFETY 安全性

ハンドピースキャリブレーション機能 (AHC: Advanced Handpiece Calibration) により、施術で要求される正確なトルク値を出力します。

## EXTENSIVITY 拡張性

Bluetooth® 接続により、ケーブルの長さを気にすることなく最適な位置で操作できます。また、ISQ測定器、超音波ボーンサージェリーシステム、iPadなどのさまざまなデバイスを Straumann Pro2 とワイヤレスで接続できます。

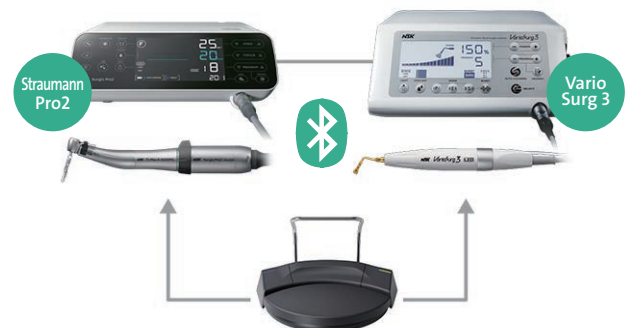


- 1 注水量選択ボタン
- 2 プログラム選択ボタン
- 3 回転方向選択ボタン
- 4 スピードコントロールペダル

# STRAUMANN® PRO 2

製品名: Straumann® Pro 2 / 製品番号: Y1500837

	▼ 同梱物	▼ 数量
1	電源コード	1
2	コントロールユニット	1
3	ロッド (ボトル支柱)	1
4	フットコントロール	1
5	モーター (モーターコード付) (Straumann SGL80M)	1
6	モータースタンド	1
7	アルカリ単4乾電池 (3 本入)	1
8	チューブホルダ	7
9	クリーンワイヤー	1
10	キャリブレーションバー	1
11	プロテクションプラグ	1
12	Oリング (プロテクションプラグ用)	2
13	Oリング (モーター用)	2
14	ハンドピース (X-SG20ML)	1
15	E タイプスプレーノズル	1
16	センター注水ノズル	1
17	パイプホルダー	1
18	二分岐注水チューブ	1
19	イリゲーションチューブ	5

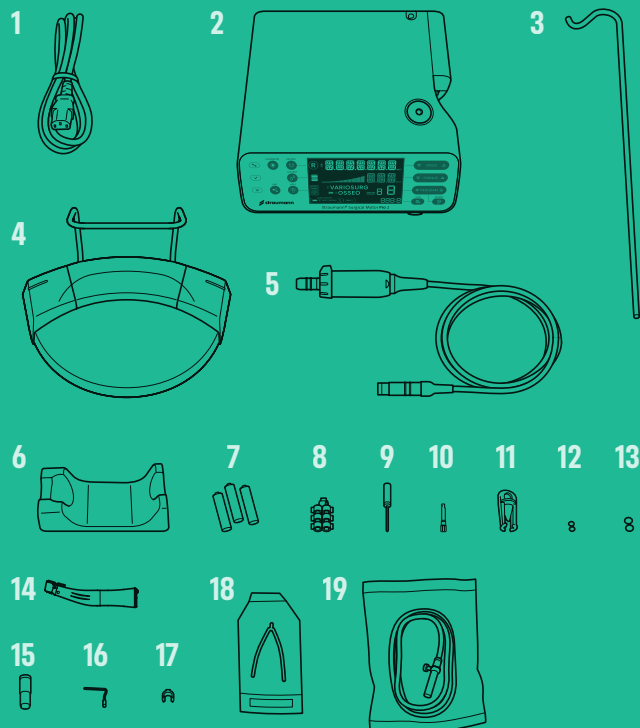

ストローマングループからの最新情報をLINEで配信中!  
イベント、セミナー、製品などについての情報を配信します。

**LINE Official Account**  
[www.straumann.jp](http://www.straumann.jp)

販売名: サージック PRO2 (Straumann Surgical Motor Pro 2) 分類: 管理医療機器 認証番号: 303ALBZX00014000 / 販売名: ストロマンローテーションツール LX 分類: 一般医療機器 届出番号: 13B1X10163000344  
販売名: バリオサージ 3 分類: 特定保守管理医療機器 認証番号: 225ABBZX00144000

## ストローマン・ジャパン株式会社

〒108-0014 東京都港区芝5-36-7 三田ベルジュビル 6階

受注専用ダイヤル: 0120-418-995 デジタルサポート: 0120-418-320

製品サポート: 0120-689-930 FAX (共通): 0120-418-089

TEL受付時間: 平日9:00~17:00 (デジタルサポート 10:00~17:30) 当日出荷受付時間: 平日17:00まで



本文またはその一部をInstitut Straumann AGの書面による許可なくして複製または発行することはできません。  
Straumann® および他の商標とStraumann® のロゴは、Straumann Holdings AGおよびその関連会社の商標および登録商標です。

JPC0159 / 2024.07