

UN NUOVO APPROCCIO

NEODENT<sup>®</sup> CERAMIC IMPLANT SYSTEM



Ceramic  
Implant System



Connessione  
ZiLock<sup>®</sup>



## Ceramic Implant System

Con l'aumento delle aspettative di trattamenti estetici con tempi più brevi, il Neodent® Ceramic Implant System offre flessibilità, stabilità e risultati estetici. Questa soluzione senza metallo consente il trattamento immediato e un elevato livello di estetica, grazie al moderno design implantare in ceramica naturalmente conico e al portfolio protesico completo in ceramica.





## Un nuovo **approccio**



Un nuovo approccio  
alla flessibilità



Un nuovo approccio  
alla stabilità



Un nuovo approccio  
all'estetica





## Un nuovo approccio alla **flessibilità**

Per adattarsi a trattamenti di diverso tipo e complessità, il Ceramic Implant System offre la flessibilità di una connessione in 2 parti, combinata con una robusta connessione ceramica su ceramica avvitata.








#### **SISTEMA IN CERAMICA AFFIDABILE E ROBUSTO**

L'esclusiva connessione brevettata ZiLock® è progettata con una vite più lunga per un innesto sicuro tra l'impianto in ceramica e il moncone in ceramica. Inoltre, migliora le prestazioni della ceramica ottimizzando la distribuzione della forza lungo la connessione interna.

#### **INTUITIVA CONNESSIONE ZILOCK®**

ZiLock® è una connessione interna diritta in ceramica con 6 lobi e 6 punte. Questa indicizzazione si traduce in un posizionamento preciso del moncone, impedendogli di ruotare. Il risultato è un sistema intuitivo, che fornisce una maggiore flessibilità di trattamento rispetto agli impianti monoblocco.

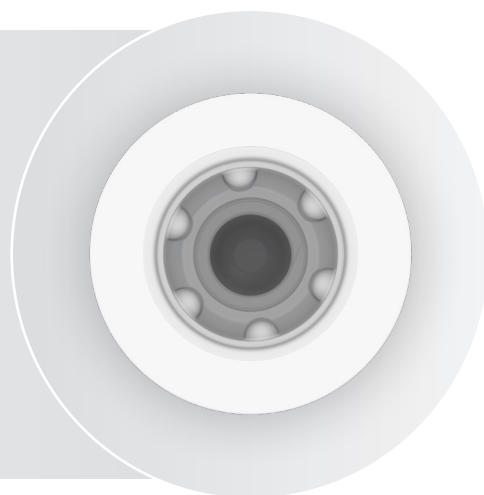




## Un nuovo approccio alla stabilità

Con l'obiettivo di ottenere stabilità nei protocolli immediati, Zi combina un design implantare naturalmente conico con una superficie implantare trattata. Entrambe le caratteristiche sono progettate per ottimizzare la stabilità e la predicibilità nei trattamenti immediati.





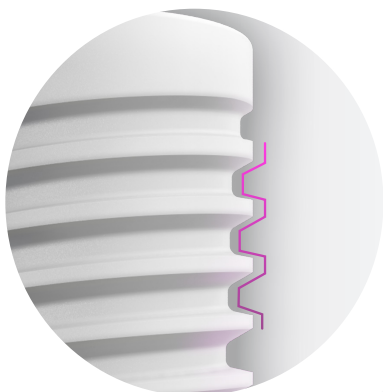

Design a doppia filettatura trapezoidale.



Apicalmente conico con camere con scanalature.



Immagine rappresentativa della superficie implantare - ingrandimento al microscopio elettronico a scansione (SEM) di 5000x.

### DESIGN CONICO PER LA STABILITÀ PRIMARIA

Il Ceramic Implant System è realizzato con una moderna geometria implantare conica progettata per trattamenti immediati predicibili in tutti i tipi di osso. Questa caratteristica è stata progettata per imitare la forma conica della radice naturale dei denti, per ottenere un'elevata stabilità primaria.

### PREDICIBILITÀ CON SUPERFICIE SABBIAIA E MORDENZATA CON ACIDO

L'impianto Zi è caratterizzato dal trattamento della superficie, sabbaiata e mordenzata con acido, con macro e micro rugosità basate sulla comprovata superficie Neoporos®.



## Un nuovo **approccio all'estetica**

Alla ricerca di una performance estetica eccezionale, Zi offre, dal materiale, la ceramica, al portfolio completo, un risultato estetico naturale.







## RISULTATI ESTETICI ECCEZIONALI

Con lo scopo di offrire risultati estetici fuori dal comune e dall'aspetto naturale, il Ceramic Implant System Neodent fornisce prestazioni eccezionali. Il materiale in ceramica di qualità superiore consente di ottenere una ricostruzione ottimale grazie al suo colore, che imita quello dei denti naturali e può contare su un'elevata traslucenza rispetto ai metalli.

## UN PORTFOLIO DI PRODOTTI PER OTTENERE RISULTATI ESTETICI NATURALI

Il portfolio protesico degli impianti in ceramica consente l'uso di protocolli convenzionali o immediati. Inoltre, consente di utilizzare il flusso di lavoro preferito, **convenzionale o digitale**, fornendo un restauro dall'aspetto naturale.



ZiBase



Protesi singola avvitata



Protesi singola cementata



Ø 3.75/4.5 mm



ZiBase C



Protesi singola avvitata



Protesi singola cementata



Ø 4.65 mm



Moncone Zi CR



Protesi singola cementata



Ø 4.0/4.5 mm

Uniti per l'eccellenza

Uniti per l'eccellenza

Uniti per l'eccellenza

Uniti per l'eccellenza

Uniti per l'eccellenza



## Nuovi sorrisi ogni giorno

Fondata da un dentista per i dentisti, con lo scopo di cambiare la vita di un numero sempre maggiore di pazienti. Neodent® è un marchio globale disponibile in oltre 80 paesi, con oltre 3 milioni di impianti venduti ogni anno. Forti di una storia lunga oltre 30 anni dedicata alla semplicità di utilizzo, i sistemi implantari Neodent si basano su concetti di trattamento innovativi come i trattamenti immediati e offrono soluzioni moderne, affidabili e accessibili per creare ogni giorno nuovi sorrisi.

**maxon**

## Guidati dalla precisione

Fondata nel 1961, maxon motor group è un'azienda svizzera focalizzata su soluzioni per l'azionamento specifiche per il cliente, qualità ed innovazione. Con oltre 20 anni di esperienza nello stampaggio a iniezione di ceramica (CIM) per pezzi meccanici di precisione, maxon ha ampliato l'applicazione della tecnologia CIM, includendo gli impianti dentali, con diverse domande di brevetto negli ultimi 10 anni.

Nel 2016, Straumann Group e maxon hanno deciso di unire le proprie competenze creando maxon dental GmbH. Combinando i punti di forza di Neodent® nell'odontoiatria con la leadership tecnologica di maxon, l'obiettivo è quello di fornire ai dentisti un sistema implantare in ceramica semplice e un trattamento più accessibile ai pazienti, che desiderano soluzioni altamente estetiche, senza metallo.





 NEODENT

30 *anni*



## Anche festeggiare è una scelta

Neodent® festeggia il suo 30<sup>mo</sup> anniversario! Nel corso degli anni, milioni di sorrisi sono stati creati in collaborazione con i professionisti di tutto il mondo. E nel corso degli anni, Neodent® continua a festeggiare la scelta di creare nuovi sorrisi ogni giorno, per cambiare le vite dei pazienti in oltre 80 paesi in cui il marchio è presente.



Come leader nei trattamenti immediati, Neodent® ha sviluppato caratteristiche uniche che tengono conto dei principi biologici fondamentali per massimizzare la predicibilità e ottenere risultati duraturi.

© 2023 - JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi elencati nel presente materiale, registrati o meno, sono proprietà di JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. La riproduzione del presente materiale senza previo consenso è vietata. Alcuni articoli potrebbero non essere ancora disponibili per la vendita. Per ulteriori informazioni, contattare il distributore locale.

Neodent®, Zi™, ZiLock®, NeoPoros® sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati da JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. Maxon è un marchio commerciale o un marchio commerciale registrato da maxon dental GmbH. CARES è un marchio commerciale o un marchio commerciale registrato da Straumann Holding AG. 3Shape è un marchio commerciale o un marchio commerciale registrato da 3Shape A/S. exocad è un marchio commerciale o un marchio commerciale registrato da exocad GmbH. Dental Wings è un marchio commerciale o un marchio commerciale registrato da Dental Wings Inc.

10492\_neodent\_zi\_brochure\_it\_it\_D00\_hr\_150223

毎日、とびっきりの笑顔を

NUOVI SORRISI OGNI GIORNO

CHAQUE JOUR DE NOUVEAUX SOURIRES

новые улыбки каждый день

JEDEN TAG EIN NEUES LÄCHELN

NUEVAS SONRISAS TODOS LOS DÍAS

NYA LEENDEN VARJE DAG

NEW SMILES EVERY DAY

NOVOS SORRISOS TODOS OS DIAS

CHAQUE JOUR DE NOUVEAUX SOURIRES



A Straumann Group Brand

NOVOS SORRISOS TODOS OS DIAS