

*LA GRANDEZZA È
UNA CONQUISTA.*

NEODENT® GRAND MORSE



Connessione
Grand Morse®



Impianto
Helix®



Superficie
Acqua



30 *anni*

ANCHE FESTEGGIARE
È UNA SCELTA.

 neodent.com/30years



Neodent® festeggia il suo 30^{mo} anniversario! Nel corso degli anni, milioni di sorrisi sono stati creati in collaborazione con i professionisti di tutto il mondo. E nel corso degli anni, Neodent® continua a rallegrarsi della sua scelta di creare nuovi sorrisi ogni giorno, per cambiare la vita dei pazienti negli oltre 80 paesi in cui il marchio è presente.



MARCHIO GLOBALE

Disponibile in oltre 80 paesi con più di 3 milioni di impianti venduti ogni anno.



FONDATA DA UN DENTISTA PER I DENTISTI

Una storia lunga 30 anni dedicata alla semplicità d'utilizzo.



CONCETTI DI TRATTAMENTO INNOVATIVI

Soluzioni moderne e affidabili.



ACCESSO ALLE TERAPIE E PREZZI COMPETITIVI

Soluzioni comprovate e accessibili.

Nel 2023 Neodent® festeggerà tutti i successi che hanno portato il marchio dove si trova ora! Ci sono molti motivi per festeggiare, e potrai seguirli tutti sui canali digitali di Neodent. Seguici per saperne di più sulla storia, la filosofia e le soluzioni dell'azienda.

NEODENT GLOBAL PLAY

Neodent Global Play è un'incredibile piattaforma online formativa ed educativa che raccoglie gratuitamente grandi contenuti disponibili **on demand**. Troverai casi clinici, video di formazione sui prodotti, tutorial e molto altro!

La registrazione è semplice e automatica, basta compilare il modulo per avere accesso immediato a tutti i grandi contenuti.



Controlla all'indirizzo:
globalplay.neodent.com



Helix[®] Grand Morse[®]

Versatilità imbattibile


Maggiore flessibilità di trattamento dei vostri pazienti per ottenere risultati ottimali in tutte le indicazioni, dal dente singolo all'edentulia completa. Helix[®] Grand Morse[®] consente opzioni di trattamento personalizzate in base alla specifica situazione clinica, tenendo conto dei principi biologici, rispettando i fondamenti dell'implantologia dentale.



GRANDE AFFIDABILITÀ


BASE SOLIDA E STABILE PROGETTATA PER UN SUCCESSO A LUNGO TERMINE

L'interfaccia impianto-moncone è fondamentale per un risultato estetico e funzionale di successo nel lungo termine. La connessione Neodent[®] Grand Morse[®] offre una combinazione unica basata su concetti comprovati come platform switching associato a una connessione Cono Morse a 16° profonda con indice interno per garantire una connessione robusta e stabile, progettata per ottenere risultati duraturi.

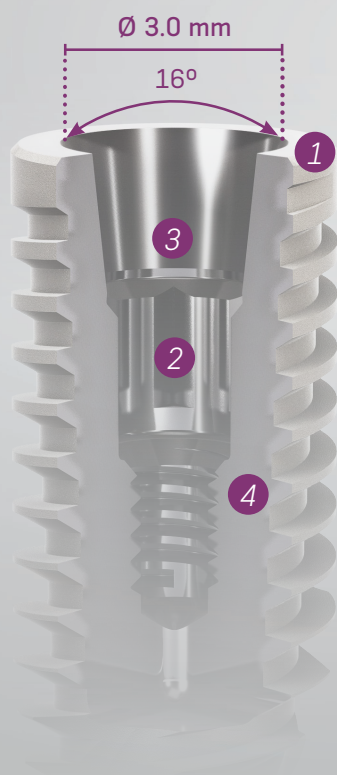


1 Platform Switching

Design del moncone con diametro ridotto rispetto all'area coronale dell'impianto, che consente il platform switching⁽¹⁻⁵⁾.

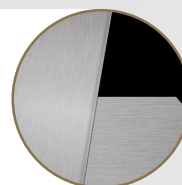


2 Indice interno

Posizionamento preciso del moncone, protezione dalla rotazione e facilità d'utilizzo.

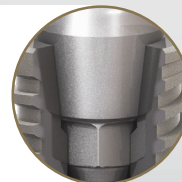



3 Connessione profonda

Consente di ottenere un'ampia zona di contatto tra moncone e impianto per una distribuzione ottimale del carico.

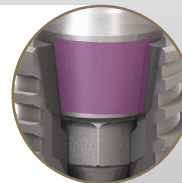

4 Connessione Cono Morse a 16°

Progettata per garantire un'aderenza perfetta per un sigillo ottimale della connessione.

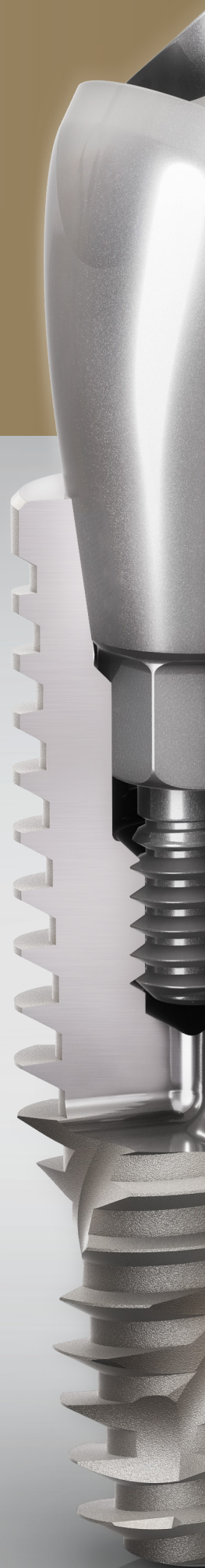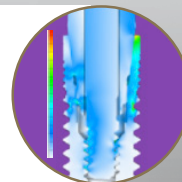



GRANDE STABILITÀ

PROGETTATO PER TRATTAMENTI IMMEDIATI PREDICIBILI IN TUTTI I TIPI DI OSSO


L'aspettativa, in costante aumento, di una durata minore del trattamento rappresenta una sfida significativa per gli odontoiatri. Il sistema implantare Neodent® Grand Morse® offre un design implantare unico, dotato dell'innovativa superficie idrofila Acqua, progettata per massimizzare la stabilità primaria e la predicibilità nei protocolli immediati.

L'IMPIANTO OTTIMALE PROGETTATO PER OTTENERE UNA ELEVATA STABILITÀ PRIMARIA

Helix® Grand Morse® è un impianto con profilo ibrido innovativo che ottimizza le opzioni di trattamento e l'efficacia in tutti i tipi di osso.

Design del corpo completamente conico

- Coronale: 2° - 12°
- Apice: 16°
- » Consente sotto-preparazione

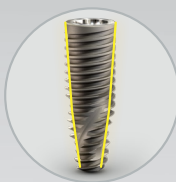


Profilo ibrido

- Coronale: Cilindrico
- Apice: Conico
- » Per stabilità con flessibilità di posizionamento verticale



Filettatura dinamica progressiva

- Coronale: Trapezoidale > compressione
- Apice: Forma a V > autofilettante
- » In grado di ottenere elevata stabilità primaria in tutti i tipi di osso

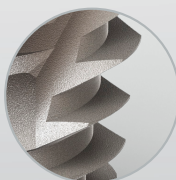

Apice attivo

- Punta piccola morbida arrotondata
- Scanalature elicoidali
- » Consente il carico immediato




SUPERFICIE IDROFILA ACQUA, PROGETTATA PER UN'ELEVATA PREDICIBILITÀ DI TRATTAMENTO

La superficie idrofila Acqua di Neodent® rappresenta il livello successivo della superficie S.L.A., sviluppata per ottenere una corretta osteointegrazione anche in situazioni complesse, come osso degenerato o protocolli immediati.^[6-9]



Superficie
NeoPoros

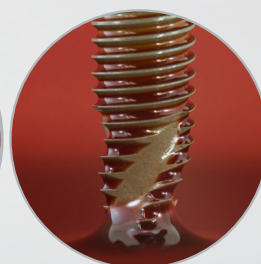

Superficie
idrofila Acqua

Idrofilia

La superficie idrofila ha un angolo di contatto minore a contatto con i liquidi. Si ottiene così una maggiore accessibilità dei liquidi organici alla superficie implantare Acqua.⁽⁷⁾



GRANDE ESTETICA

OFFRE UN'ESTETICA IMMEDIATA E NATURALE

Al giorno d'oggi i pazienti si aspettano tempi di trattamento brevi e risultati estetici ottimali. Il portfolio di restauri Neodent® Grand Morse® offre flessibilità per semplificare la gestione dei tessuti molli, rispettando le distanze biologiche per ottenere funzionalità ed estetica immediate.

NUOVO LIVELLO DI TRATTAMENTI DELL'ARCATA COMPLETA FISSI E IMMEDIATI

Il moncone Neodent® Grand Morse® Conico Mini è stato progettato per migliorare i trattamenti fissi di arcata completa, ottimizzando il profilo di emergenza del moncone e riducendo la necessità di procedure invasive.



Moncone Provvisorio
in Titanio



Moncone Pro-Peek



Base in Titanio



Base in Titanio C



Base in Titanio
per Ponte



Blocco di titanio
(Holder AG o
Medentika)



Moncone CoCr



Moncone anatomico
(dritto e angolato)



Moncone Universal
(dritto e angolato)



Moncone



Moncone Conico Mini
Angolato



Novaloc
(dritto e angolato)



Base in Titanio SA



Moncone Conico
Mini Dritto



Moncone Micro



Protesi singola
avvitata



Protesi singola
cementata



Overdenture



Protesi multipla
avvitata



Protesi multipla
cementata



Provvisorio




GRANDE SEMPLICITÀ

MASSIMA FACILITÀ DI UTILIZZO

L'implantologia è diventata parte integrante dell'odontoiatria clinica, con un numero sempre maggiore di pazienti che la richiedono. Il sistema implantare Neodent® Grand Morse® è studiato in modo intelligente per offrire efficienza e semplicità di trattamento, sia nei passaggi chirurgici che in quelli protesici.

UNA PIATTAFORMA PROTESICA

Tutti gli impianti Neodent® Grand Morse® sono dotati di un'unica connessione protesica indipendentemente dal diametro dell'impianto.

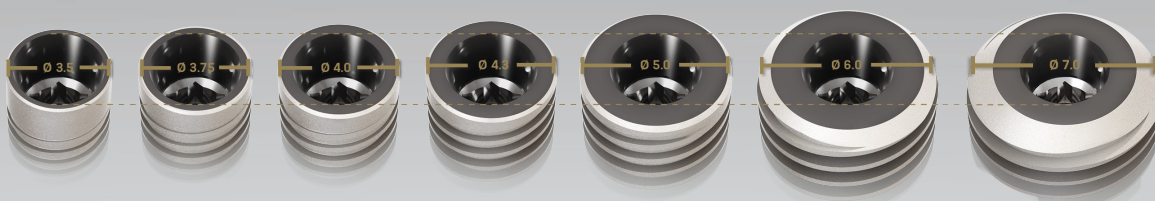

UN CACCIAVITE

Il cacciavite Neo è dotato di un attacco a stella, affidabile e duraturo, ed è compatibile con tutti i monconi di guarigione e le viti di copertura e con la maggior parte delle viti di restauro Neodent® Grand Morse®.



UN INSERITORE DI IMPIANTO

L'inseritore di impianto Neodent® consente il prelievo e l'inserimento dell'impianto in modo semplice e affidabile.



UN KIT CHIRURGICO

Kit chirurgico compatto, intuitivo e funzionale, che consente il posizionamento degli impianti Helix GM® in tutti i tipi di osso.



HELIX GM®

PROTOCOLLO DI LAVORO CHIRURGICO

IMPIANTO / SUPERFICIE

Indicazioni: tutte le situazioni cliniche e le diverse densità ossee. Inserimento nell'osso di tipo III e IV (con possibilità di sottostrumentazione), I e II con l'uso di frese per contorno. Velocità di fresatura: 800-1200 giri/min., per osso di tipo I e II; 500-800 giri/min. per osso di tipo III e IV | Velocità di inserimento: 30 giri/min. | Torque di inserimento massimo: 60 N.cm



	Acqua	NeoPoros
8.0	140.943	109.943
10.0	140.944	109.944
11.5	140.945	109.945
13.0	140.946	109.946
16.0	140.947	109.947
18.0	140.988	109.988



	Acqua	NeoPoros
8.0	140.976	109.976
10.0	140.977	109.977
11.5	140.978	109.978
13.0	140.979	109.979
16.0	140.980	109.980
18.0	140.981	109.981



	Acqua	NeoPoros
8.0	140.982	109.982
10.0	140.983	109.983
11.5	140.984	109.984
13.0	140.985	109.985
16.0	140.986	109.986
18.0	140.987	109.987



	Acqua	NeoPoros
8.0	140.948	109.948
10.0	140.949	109.949
11.5	140.950	109.950
13.0	140.951	109.951
16.0	140.952	109.952
18.0	140.989	109.989



	Acqua	NeoPoros
8.0	140.953	109.953
10.0	140.954	109.954
11.5	140.955	109.955
13.0	140.956	109.956
16.0	140.957	109.957
18.0	140.990	109.990



	Acqua	NeoPoros
8.0	140.1009	109.1009
10.0	140.1010	109.1010
11.5	140.1011	109.1011
13.0	140.1012	109.1012

SEQUENZA DI FRESATURA



Kit chirurgico
compatto Helix GM®
premontato

110.303



	Acqua	NeoPoros
8.0	140.1059	109.1059
10.0	140.1060	109.1060
11.5	140.1061	109.1061
13.0	140.1062	109.1062

SEQUENZA DI FRESATURA INIZIALE

Ø 3.5	103.170*	103.425		
Ø 3.75	103.170*	103.425	103.561	
Ø 4.0	103.170*	103.425	103.561	
Ø 4.3	103.170*	103.425	103.561	103.564
Ø 5.0	103.170*	103.425	103.561	
Ø 6.0	103.170*	103.425	103.561	103.564
Ø 7.0	103.170*	103.425	103.561	

SEQUENZA DI FRESATURA PER OSSO DI TIPO I E II

103.578	103.513			
103.579	103.514			
103.584	103.580	103.515		
103.567	103.581	103.516		
103.564	103.567*	103.570	103.582	103.517
	Non raccomandato			
	Non raccomandato			

SEQUENZA DI FRESATURA PER OSSO DI TIPO III E IV

103.561				
103.564*				
103.567*				
103.570*				
103.570	103.573*			
103.570	103.573	103.576		
103.570	103.573	103.576	103.577*	

*OPZIONALE

INDICATORE DI DIREZIONE



Ø 2.8/3.5
128.019




Ø 3.0/3.75
128.020



Ø 3.3/4.0
128.021



Ø 3.6/4.3
128.022

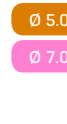

Ø 4.3/5.0
128.023

INSERTORI E CRICCHETTO DI SERRAGGIO



104.050



Insertore per Impianto
GM Contrangolo

105.131



Insertore per Impianto GM
Cricchetto di Serraggio (corto)

105.129



Insertore per Impianto GM
Cricchetto di Serraggio (lungo)

105.130

VITE DI COPERTURA



Viti di Copertura GM

0 mm 2 mm

117.021 117.022



Cacciavite manuale Neo

104.058 Corto
104.060 Medio
104.070 Lungo

MONCONI DI GUARIGIONE

Monconi di Guarigione GM



	0.8 mm	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm	5.5 mm
Ø 3.3	106.207	106.208	106.209	106.210	106.211	106.212
Ø 4.5	106.213	106.214	106.215	106.216	106.217	106.218
Ø 5.5		106.250	106.251	106.252	106.253	
Ø 6.5		106.254	106.255	106.256	106.257	

Monconi di Guarigione Personalizzabili GM



	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm	5.5 mm	6.5 mm
Ø 5.5	106.223	106.224	106.225	106.226	106.227	
Ø 7.0		106.228	106.229	106.230	106.231	106.232

ACCESSORI CHIRURGICI



Misuratore
di Altezza GM

128.028



Indicatori
di Direzione
Angolati

17° 128.030
30° 128.031



Fresa per profilo
Osseo GM

105.130



Indicatori
di Direzione
Angolati per
Moncone

17° 128.032
30° 128.033

Soluzioni avvitate/cementate

Protesi singola

A livello di impianto

Scelta del moncone

Flusso di lavoro digitale

Base in Titanio
GM Soluzione
Angolata (SA)

GH	0.8 mm	1.5 mm	2.5 mm
Ø 4.0	135.327	135.328	135.329
Ø 4.5	135.333	135.334	135.335
Ø 5.5	135.339	135.340	135.341

Ø 4.0	135.330	135.331	135.332
Ø 4.5	135.336	135.337	135.338
Ø 5.5	135.342	135.343	135.344

Cacciavite per Soluzione Angolata

Flussi di lavoro digitali/
convenzionaliBase in Titanio
GM Exact

GH	0.8 mm	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm
Ø 3.5	135.355	135.356	135.357	135.358	135.359
Ø 4.5	135.367	135.368	135.369	135.370	135.371
Ø 5.5	135.379	135.380	135.381	135.382	135.383
Ø 6.5		135.391	135.392	135.393	135.394

Ø 3.5	135.361	135.362	135.363	135.364	135.365
Ø 4.5	135.373	135.374	135.375	135.376	135.377
Ø 5.5	135.385	135.386	135.387	135.388	135.389
Ø 6.5		135.395	135.396	135.397	135.398

Cacciavite per Cricchetto di Serraggio Neo

Flusso di lavoro digitale

Base in Titanio C per GM Exact



GH	0.8 mm	1.5 mm	2.5 mm
	135.349	135.350	135.351

3.5 mm	4.5 mm	5.5 mm
135.352	135.353	135.354

Cacciavite per Cricchetto di Serraggio Neo

Impronta

Scanbody per
Impianto GM

108.207

Cappetta per Impronta
per Impianto GM ExactCucchiaino
chiusoCucchiaino
aperto

108.160

108.162

Regolare

108.161

108.163

Lungo

Scansione intraorale con scanbody
forniti da Dentsply SironaProduzione
del modelloAnalogo di
Impianto GMØ 3.5/3.75/
4.0/4.3 Ø 5.0/6.0/7.0

101.074 101.075

Convenzionale

Ø 3.5/3.75 Ø 4.0/4.3 Ø 5.0/6.0/7.0

101.103 101.089 101.090

Ibrido Riposizionabile
(convenzionale/digitale)

Provvisorio

Moncone Pro
Peek GM

	0.8 mm	1.5 mm	2.5 mm
Ø 4.5	114.874	114.875	114.876
Ø 6.0	114.880	114.881	114.882
	3.5 mm	4.5 mm	5.5 mm
Ø 4.5	114.877	114.878	114.879
Ø 6.0	114.883	114.884	114.885

Cacciavite per Cricchetto di Serraggio Neo

Moncone Provvisorio
GM per corona

	0.8 mm	1.5 mm
Ø 3.5	118.344	118.345
Ø 4.5	118.348	118.349
	2.5 mm	3.5 mm
Ø 3.5	118.346	118.347
Ø 4.5	118.350	118.351

Cacciavite per Cricchetto di Serraggio Neo

Moncone Provvisorio
GM per ponte

	0.8 mm	1.5 mm
Ø 3.5	118.352	118.353
Ø 4.5	118.356	118.357
	2.5 mm	3.5 mm
Ø 3.5	118.354	118.355
Ø 4.5	118.358	118.359

Cacciavite per Cricchetto di Serraggio Neo

Scansione
del modelloScanbody per
Impianto GM

108.207

Nel software CAD selezionare la Ti-
Base di terzi comparabile ed eseguire
la progettazione digitale e il fresaggio

Cappetta definitiva

Non applicabile



Cappetta Calcinabile per Base in Titanio



	4 mm	6 mm
Ø 3.5	118.322	118.323
Ø 4.5	118.325	118.327
Ø 5.5	118.329	118.342

Verificare l'adattamento del restauro
fresato nel cavo orale del paziente
e rifinirlo se necessario. Cementare
il restauro sulla Base in Titanio C e
inserirlo nel cavo orale del paziente

Viti

Vite per Base in
Titanio GM SA

116.288

Vite Neo GM per basi in titanio e Pro Peek



116.291	GH 0.8/1.5/ 2.5
116.292	GH 3.5/4.5/5.5 e tutte le basi in titanio

Vite Neo GM



Neotorque	Titanio
116.285	116.286

Inseritori

Cacciavite per soluzione angolata (SA)



Contrangolo	Cricchetto di Serraggio
105.147	105.150
105.148	105.151
105.149	105.152

Corto

Regolare

Lungo

Cacciavite per Cricchetto di Serraggio Neo



Contrangolo

105.135	Corto
105.167	Lungo
105.146*	Extra corto

Cricchetto di Serraggio



105.132	Medio
105.133	Corto
105.157	Lungo

TIPI DI RESTAURI		Soluzioni avvitate/cementate													
Livello di lavoro		Protesi singola/multipla				Protesi singola			Protesi multipla						
A livello di impianto															
Scelta del moncone	Blocco in Titanio GM - holder Medentika Ø 11.5 mm 135.252 Ø 15.8 mm 135.253 Cacciavite per Cricchetto di Serraggio Neo Vite venduta separatamente Blocco in Titanio GM - holder Amann Girrbach Ø 12.0mm 135.226 Cacciavite per Cricchetto di Serraggio Neo Vite venduta separatamente				Flusso di lavoro digitale			Set moncone GM Exact in CoCr Ø 3.5/3.75 118.309 Ø 4.0/4.3 118.310 Ø 5.0/6.0 118.311 Cacciavite per Cricchetto di Serraggio Neo Il set include un moncone CoCr GM, una vite in titanio e un analogo di impianto GM. Da utilizzare dopo il moncone di guarigione specifico per la gestione dei tessuti molli.			Base in Titanio GM per ponte GH 0.8 mm 135.399 1.5 mm 135.400 2.5 mm 135.401 3.5 mm 135.402 4.5 mm 135.403 Ø 3.5 135.399 Ø 4.5 135.404 Ø 5.5 135.409 1.5 mm 135.405 2.5 mm 135.406 3.5 mm 135.407 4.5 mm 135.408 1.5 mm 135.410 2.5 mm 135.411 3.5 mm 135.412 4.5 mm 135.413 Cacciavite per Cricchetto di Serraggio Neo Consente una divergenza massima di 10° per il Ø 3.5 e di 16° per il Ø 4.5 e il Ø 5.5				
	Scanbody per Impianto GM 108.207 Cappetta per Impronta per Impianto GM Exact Cucchiaino chiuso 108.160 Cucchiaino aperto 108.162 108.161 108.163 Regolare Lungo							Cappetta per Impronta per Impianto GM Exact Cucchiaino chiuso 108.160 Cucchiaino aperto 108.162 108.161 108.163 Regolare Lungo			Scanbody per Impianto GM 108.207 Cappetta per Impronta per Impianto GM Cucchiaino aperto 108.158 108.159 Regolare Lungo				
Produzione del modello	Analogo di Impianto GM Ø 3.5/3.75/4.0/4.3 101.074 Ø 5.0/6.0/7.0 101.075 Convenzionale Ø 3.5/3.75 Ø 4.0/4.3 Ø 5.0/6.0/7.0 101.103 101.089 101.090 Ibrido Riposizionabile (convenzionale/digitale)				Analogo di Impianto GM Ø 3.5/3.75/4.0/4.3 101.074 Ø 5.0/6.0 101.075 Convenzionale			Analogo di Impianto GM Ø 3.5/3.75/4.0/4.3 101.074 Ø 5.0/6.0/7.0 101.075 Convenzionale Ø 3.5/3.75 Ø 4.0/4.3 Ø 5.0/6.0/7.0 101.103 101.089 101.090 Ibrido Riposizionabile (convenzionale/digitale)							
	Moncone Pro Peek GM 0.8 mm 114.874 1.5 mm 114.875 2.5 mm 114.876 Ø 4.5 114.880 Ø 6.0 114.881 114.882 3.5 mm 114.877 4.5 mm 114.878 5.5 mm 114.879 Ø 4.5 114.883 Ø 6.0 114.884 114.885 Cacciavite per Cricchetto di Serraggio Neo Moncone Provvisorio GM per corona 0.8 mm 118.344 1.5 mm 118.345 2.5 mm 118.346 3.5 mm 118.347 Ø 3.5 118.348 Ø 4.5 118.349 118.350 118.351 Cacciavite per Cricchetto di Serraggio Neo Moncone Provvisorio GM per ponte 0.8 mm 118.352 1.5 mm 118.353 2.5 mm 118.354 3.5 mm 118.355 Ø 3.5 118.356 Ø 4.5 118.357 118.358 118.359 Cacciavite per Cricchetto di Serraggio Neo				Moncone di Guarigione GM per Moncone CoCr Ø 3.5/3.75 106.237 Ø 4.0/4.3 106.238 Ø 5.0/6.0 106.239 Cacciavite manuale Neo			Moncone Provvisorio GM per ponte 0.8 mm 118.352 1.5 mm 118.353 2.5 mm 118.354 3.5 mm 118.355 Ø 3.5 118.356 Ø 4.5 118.357 118.358 118.359 Cacciavite per Cricchetto di Serraggio Neo							
Scansione del modello	Scanbody per Impianto GM 108.207				Non applicabile			Scanbody per Impianto GM 108.207							
	Non applicabile				Non applicabile			Non applicabile							
Viti	Vite Neo GM per basi in titanio e Pro Peek GH 0.8/1.5/ 2.5 116.291 GH 3.5/4.5/5.5 e tutte le basi in titanio 116.292 Vite Neo GM Neotorque Titanio 116.285 116.286				Vite per cappetta per moncone Neo CoCr Neotorque 116.282 Titanio 116.283			Vite Neo GM 116.292							
	Cacciavite per Cricchetto di Serraggio Neo Contrangolo Corto 105.135 Lungo 105.167 Extra corto 105.146* Cricchetto di Serraggio Medio 105.132 Corto 105.133 Lungo 105.157														

*Raccomandato per le cappette per impronta a cucchiaino chiuso e a cucchiaino aperto per impianti o monconi, viti di copertura e monconi di guarigione.

TIPI DI RESTAURI		Soluzioni avvitate										
Livello di lavoro		Protesi singola					Protesi multipla					
		Moncone GM Exact					Moncone Conico Mini GM					
Scelta del moncone		 Moncone GM Exact GH 0.8 mm 115.269 1.5 mm 115.270 2.5 mm 115.271 3.5 mm 115.272 4.5 mm 115.273 5.5 mm 115.274 20 N.cm Cacciavite per Cricchetto di Serraggio Neo						 Moncone Conico Mini GM GH 0.8 mm 115.243 1.5 mm 115.244 2.5 mm 115.245 3.5 mm 115.246 4.5 mm 115.247 5.5 mm 115.248 32 N.cm Guida per Monconi Protesici Esagonale				
		 Moncone Conico Mini GM Exact 17°/30° GH 1.5 mm 115.275 2.5 mm 115.276 3.5 mm 115.277 GH 1.5 mm 115.278 2.5 mm 115.279 3.5 mm 115.280 20 N.cm Cacciavite per Cricchetto di Serraggio Neo										
Impronta		Scanbody per Moncone GM  108.220 Cappetta per Impronta Moncone GM  Cucchiaino chiuso 108.179					Scanbody per Moncone Conico Mini  108.218 Moncone Conico Mini Slim Cappetta per Impronta cucchiaino aperto  108.176					
Produzione del modello		 Analogo per Moncone 101.076 Convenzionale 101.101 Ibrido Riposizionabile (convenzionale/digitale)					 Analogo per Moncone Conico Mini 101.020 Convenzionale 101.092 Ibrido Riposizionabile (convenzionale/digitale)					
Provisorio		 Cappetta in Titanio per Moncone Neo 118.300  Cilindro di Protezione per Moncone Neo 106.221 10 N.cm Cacciavite per Cricchetto di Serraggio Neo					 Cappetta in Titanio per Moncone Conico Mini Neo 118.302  Cilindro di Protezione per Moncone Conico Mini Neo 106.268  Barra Distale Neo 125.116  Moncone Conico Mini Neo per cappetta per barra distale 118.308 10 N.cm Cacciavite per Cricchetto di Serraggio Neo					
Scansione del modello		 Scanbody per Moncone GM 108.220					 Scanbody per Moncone Conico Mini 108.218					
Cappetta definitiva		 Cappette per moncone Neo per Corona Calcinabile 118.298 CoCr 118.299 Digitale 118.362 10 N.cm Cacciavite per Cricchetto di Serraggio Neo					Convenzionale  Cappette per Moncone Conico Mini Neo Calcinabile 118.301 CoCr 118.303 10 N.cm		 Cappette per Moncone Conico Mini Neo Tecnica One Step Hybrid Calcinabile 118.340 Ottone 118.331 Titanio 118.382 10 N.cm Cacciavite per Cricchetto di Serraggio Neo		Digitale  Cappetta One Step Hybrid per Moncone Conico Micro Neo Titanio 118.382 10 N.cm Cacciavite per Cricchetto di Serraggio Neo	
Viti e dispositivi di protezione per lucidatura		 Vite Neo GM GH 0.8 116.290 GH 1.5/2.5 116.291 GH 3.5/4.5/5.5 116.292 20 N.cm					 Vite per Cappetta per Moncone Neo Neotorque 116.267 Titanio 116.266 10 N.cm					
		 Vite Neo GM GH 1.5/2.5 116.291 GH 3.5/4.5/5.5 116.292 20 N.cm					 Vite per Cappetta per Moncone Conico Mini Neo Neotorque 116.270 Titanio 116.269 10 N.cm					 Dispositivo di Protezione per Lucidatura per Moncone Conico Mini 123.008  Vite di Lavoro One Step Hybrid Neo 116.271
Inseritori		Cacciavite per Cricchetto di Serraggio Neo  Contrangolo 105.135 Corto 105.167 Lungo 105.146* Extra corto  Cricchetto di Serraggio 105.132 Medio 105.133 Corto 105.157 Lungo					 Guida per Monconi Protesici Esagonale 105.137 Cricchetto di Serraggio 105.138 Contrangolo					

TIPI DI RESTAURI	Livello di lavoro	Soluzioni avvitate				Soluzioni cementate			
		Protesi singola/multipla				Protesi singola			
		Moncone Micro GM				Moncone Anatomico Click GM Exact			
Sceita del moncone	Moncone Micro GM  GH 0.8 mm 1.5 mm 2.5 mm 3.5 mm 4.5 mm 5.5 mm 115.255 115.256 115.257 115.258 115.259 115.260 Guida per Monconi Protetici Esagonale 32 Ncm				Moncone Anatomico Click GM Exact  Standard Stretta 1.5 mm 2.5 mm 3.5 mm 114.862 114.863 114.864 114.868 114.869 114.870 20 Ncm				
	Moncone Anatomico Click GM Exact 17°  Standard Stretta 1.5 mm 2.5 mm 3.5 mm 114.865 114.866 114.867 114.871 114.872 114.873 20 Ncm Cacciavite per Cricchetto di Serraggio Neo								
Impronta	Scanbody per moncone Micro  108.219 Per corone e ponti Cappetta per impronta per moncone Micro  108.182 108.178 Cucchiaino chiuso per corona Cucchiaino aperto Slim per ponte				Cappetta per Impronta per Impianto GM Exact  Cucchiaino chiuso Cucchiaino aperto 108.160 108.161 108.162 108.163 Regolare Lungo				
Produzione del modello	Analogo per Moncone Micro  101.078 101.091 Convenzionale Ibrido Riposizionabile (convenzionale/digitale)				Analogo di Impianto GM  Ø 3.5/3.75/4.0/4.3 Ø 5.0/6.0/7.0 101.074 101.075 Convenzionale Ø 3.5/3.75 Ø 4.0/4.3 Ø 5.0/6.0/7.0 101.103 101.089 101.090 Ibrido Riposizionabile (convenzionale/digitale)				
Provvisorio	Cappetta in titanio per moncone Micro Neo  118.297 118.317 Per ponte Per corona Cilindro di Protezione per Moncone Micro Neo  106.267 Cacciavite per Cricchetto di Serraggio Neo				Cappetta provvisoria per moncone Anatomico Click  118.334 118.335 Standard Stretta				
Scansione del modello	Scanbody per moncone Micro GM  108.219 Per corone e ponti				Non applicabile				
Cappetta definitiva	Convenzionale Cappette per Moncone Micro Neo  Calcinabile CoCr 118.295 118.296 118.315 118.316 Cappette One Step Hybrid per Monconi Micro Neo  Calcinabile Ottone Titanio 118.341 118.333 118.381 Cacciavite per Cricchetto di Serraggio Neo Cappetta One Step Hybrid per Moncone Conico Micro Neo  Titanio 118.381 118.363 Per ponte Per corona Cacciavite per Cricchetto di Serraggio Neo				Non applicabile				
Viti e dispositivi di protezione per lucidatura	Vite per cappetta per moncone Micro Neo  Neotorque Titanio 116.270 116.269 Dispositivo di Protezione per Lucidatura per Moncone Micro  Per ponte 123.015 Vite di Lavoro One Step Hybrid Neo  116.271 Cacciavite per Cricchetto di Serraggio Neo				Vite Neo GM  116.291 116.292 GH 1.5/2.5 GH 3.5 20 Ncm				
Inseritori	Cacciavite per Cricchetto di Serraggio Neo  Contrangolo Corto Lungo Extra corto 105.135 105.167 105.146* Cricchetto di Serraggio  Medio Corto Lungo 105.132 105.133 105.157 Guida per Monconi Protetici Esagonale  Cricchetto di Serraggio Contrangolo 105.137 105.138				Cacciavite per Cricchetto di Serraggio Neo  Contrangolo Corto Lungo Extra corto 105.135 105.167 105.146* Cricchetto di Serraggio  Medio Corto Lungo 105.132 105.133 105.157				

TIPI DI RESTAURI	Livello di lavoro	Soluzioni cementate		Overdenture	
		Protesi singola			
		Moncone Universal Click GM Exact		GM Novaloc	
Sceita del moncone	Moncone Universal Click GM Exact		GM Novaloc		
	</				

RIFERIMENTI

- (1) Al-Nsour MM, Chan HL, Wang HL. Effect of the platform- switching technique on preservation of peri-implant marginal bone: a systematic review. *Int J Oral Maxillofac Implants*. 2012 Jan-Feb;27(1):138-45.
- (2) Annibali S, Bignozzi I, Cristalli MP, et al. Peri-implant marginal bone level: a systematic review and meta-analysis of studies comparing platform switching versus conventionally restored implants. *J Clin Periodontol*. 2012 Nov;39(11):1097-113.
- (3) Hsu YT, Lin GH, Wang HL. Effects of Platform-Switching on Peri-implant Soft and Hard Tissue Outcomes: A Systematic Review and Meta-analysis. *Int J Oral Maxillofac Implants*. 2017;32(1):e9-e24.
- (4) Lazzara RJ, Porter SS. Platform switching: a new concept in implant dentistry for controlling postrestorative crestal bone levels. *Int J Periodontics Restorative Dentistry*. 2006 Feb;26(1):9-17.
- (5) Rocha S, Wagner W, Wiltfang J, Nicolau P, Moergel M, Messias A, Behrens E, Guerra F. Effect of platform switching on crestal bone levels around implants in the posterior mandible: 3 years results from a multicentre randomized clinical trial. *J Clin Periodontol*. 2016 Apr;43(4):374-82.
- (6) Novellino MM, Sesma N, Zanardi PR, Laganá DC. Resonance frequency analysis of dental implants placed at the posterior maxilla varying the surface treatment only: A randomized clinical trial. *Clin Implant Dent Relat Res*. 2017 Jun 20. doi: 10.1111/cid.12510. [Pubblicazione elettronica prima della stampa]
- (7) Sartoretto SC, Alves AT, Resende RF, et al. Early osseointegration driven by the surface chemistry and wettability of dental implants. *J Appl Oral Sci*. 2015 May-Jun;23(3):279-87.
- (8) Sartoretto SC, Alves AT, Zarranz L, et al. Hydrophilic surface of Ti6Al4V-ELI alloy improves the early bone apposition of sheep tibia. *Clin Oral Implants Res*. 2016 Jun 17. doi: 10.1111/clr.12894. [Pubblicazione elettronica prima della stampa]
- (9) Val JE, Gómez-Moreno G, Ruiz-Linares M, et al. Effects of Surface Treatment Modification and Implant Design in Implants Placed Crestal and Subcrestally Applying Delayed Loading Protocol. *J Craniofac Surg*. 2017 Mar;28(2):552-558.

© 2023 - JIGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi elencati nel presente materiale, registrati o meno, sono proprietà di JIGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. La riproduzione del presente materiale senza previo consenso è vietata. Alcuni prodotti potrebbero non essere ancora disponibili per la vendita. Per ulteriori informazioni, contattare il distributore locale.

Neodent, Acqua, Helix GM, Grand Morse sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di JIGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A.. Dentsply Sirona è un marchio commerciale o un marchio commerciale registrato di Dentsply Sirona, Inc. MEDENTIKA è un marchio commerciale o un marchio commerciale registrato di Medentika GmbH. Novaloc è un marchio commerciale o un marchio commerciale registrato di Valoc AG. Amann Girrbach è un marchio commerciale o un marchio commerciale registrato di Amann Girrbach AG.

1020_neodent_gm_brochure_it_it_E00_hr_100223

NUOVI SORRISI OGNI GIORNO

CHAQUE JOUR DE NOUVEAUX SOURIRES

НОВЫЕ УЛЫБКИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

JEDEN TAG EIN NEUES LÄCHELN

NUEVAS SONRISAS TODOS LOS DÍAS

NYA LEENDEN VARJE DAG

NEW SMILES EVERY DAY

NOVOS SORRISOS TODOS OS DIAS

CHAQUE JOUR DE NOUVEAUX SOURIRES

NOVOS SORRISOS TODOS OS DIAS

