


## Soluções Digitais Integradas CARES®

# CARES® Visual para Consultório

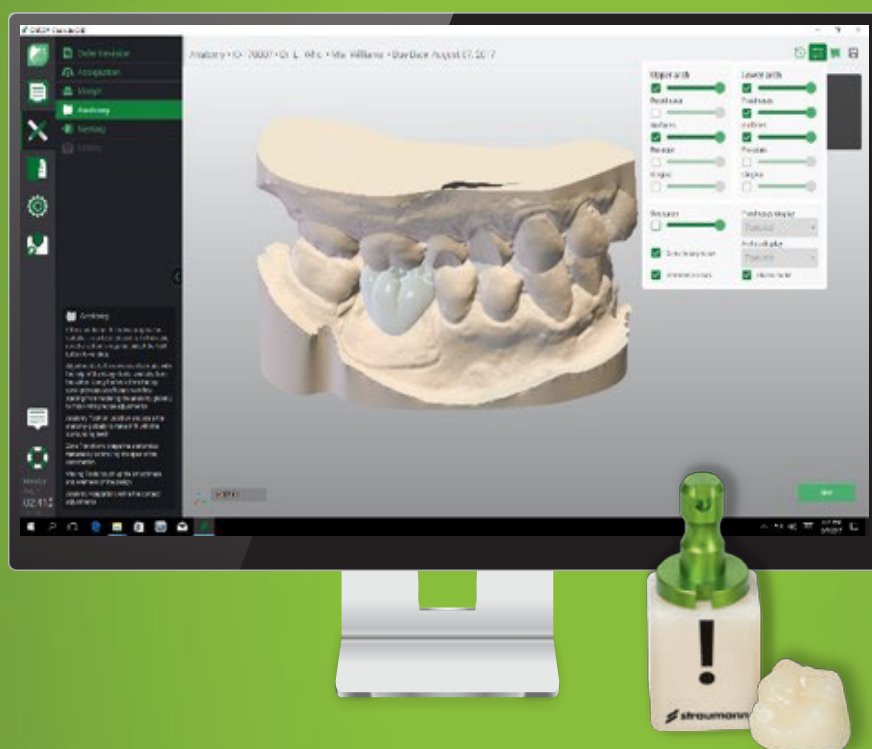

# CARES® Visual para Consultório

- Elaborado para fornecer aos dentistas uma solução intuitiva para projetar próteses em CAD
- Software de design aberto para uma solução no consultório, compatível com:
  - Escaner intraoral
  - Escaner para moldagem
  - Equipamento de usinagem
- Suporte para uma vasta gama de indicações, incluindo:
  - Coroas, inlays, onlays e facetas
  - Próteses fixas múltiplas temporárias
  - Coroas implantossuportadas
- Sistema aberto:
  - Permite a entrada e saída de arquivos .STL, para compatibilidade com sistemas de outros fabricantes
- Conexão otimizada com Série C - Máquina de usinagem para consultórios

## SOFTWARE INTUITIVO PARA CONSULTÓRIO

### Importação direta

Importação direta dos dados escaneados a partir do escaner intraoral CARES® ou outros dispositivos de escaneamento intra-oral aberto.

### Propostas automatizadas

A avançada tecnologia Tooth-Chain da Dental Wings compila o formato da restauração proposta, incluindo a anatomia, as cúspides, os rebordos marginais e o perfil de emergência, analisando e imitando os elementos anatômicos dos dentes adjacentes. A oclusão é automaticamente calculada a partir dos dentes antagonistas.

### Ferramenta de design fácil de utilizar


Identificação da margem, design da anatomia e seleção do eixo de inserção.




Tecnologia Tooth-Chain



Identificação da margem

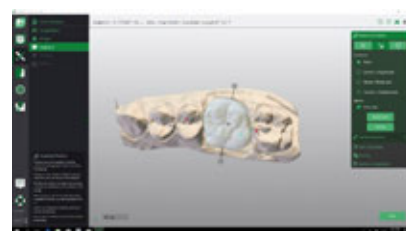




Design da anatomia

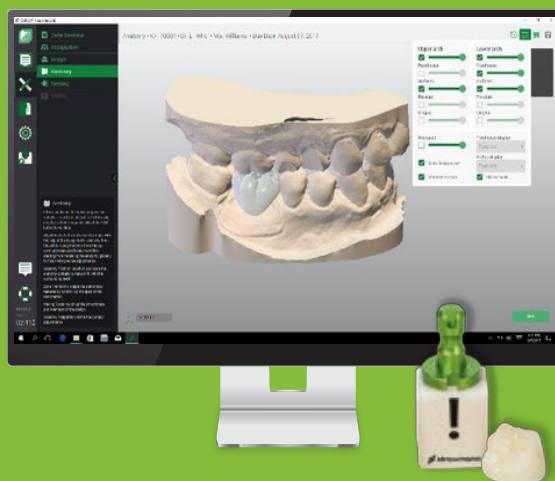

## DIRETAMENTE CONECTADO AO STRAUMANN® CARES® SÉRIE C



### Encaixe e usinagem

Encaixe simples e intuitivo para bloco de restauração, para preparar rapidamente a usinagem no consultório, com a máquina série C ou outra máquina de usinagem.

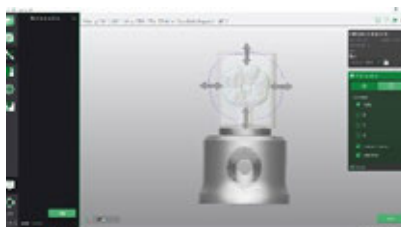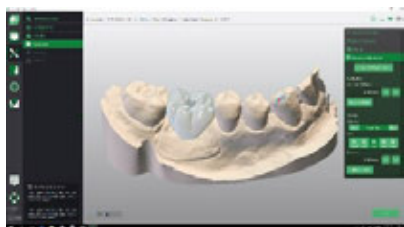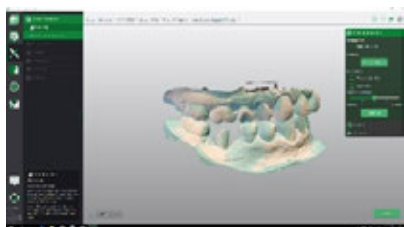

### Envio direto

Depois de projetar sua restauração, você pode enviá-la diretamente para a máquina de usinagem de série C, que permite confeccioná-la de forma rápida e precisa no consultório.

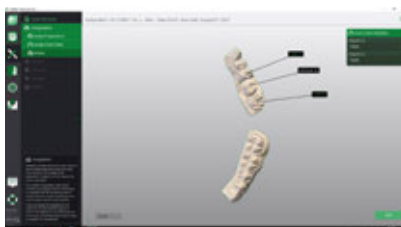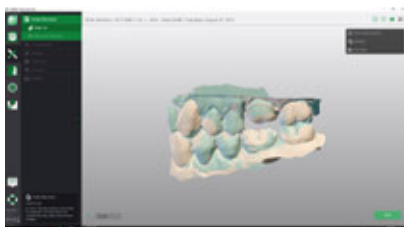

Nº do Item	Item
019.0736	Software CARES® Visual para Consultório sem CAM – para máquinas de usinagem de outros fabricantes
019.0744	CARES® Visual para Consultório com integração CAM – para série C

### **International Headquarters**

Institut Straumann AG  
Peter Merian-Weg 12  
CH-4002 Basel, Switzerland  
Phone +41 (0)61 965 11 11  
Fax +41 (0)61 965 11 01  
[www.straumann.com](http://www.straumann.com)

© Institut Straumann AG, 2017. Todos os direitos reservados.

Straumann® e/ou outras marcas comerciais e logotipos da Straumann® mencionados neste documento são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Straumann Holding AG e/ou suas afiliadas.