

GUIDE DE SÉLECTION

Cassette modulaire Straumann®

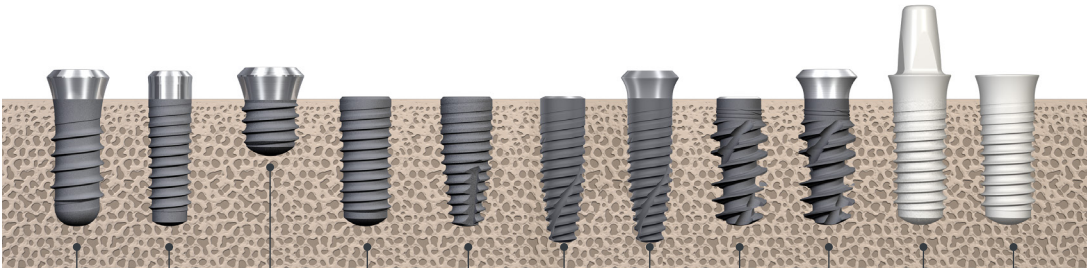


TABLE DES MATIÈRES

| | |
|--|----|
| Module C Cassette auxiliaire | 3 |
| Liste complète du module A | 4 |
| Standard Plus (SP), Standard Plus Short (SPS), Bone Level (BL) | 9 |
| Standard Plus (SP) guidé, Standard Plus Short (SPS) guidé, Bone Level (BL) guidé | 13 |
| Système implantaire Straumann® PURE Ceramic (CIM/CI) | 19 |
| Bone Level Tapered (BLT) | 24 |
| Bone Level Tapered (BLT) guidé | 28 |
| Straumann® iEXCEL (BLX, TLX; BLC, TLC) | 34 |
| BLC, TLC | 38 |
| Straumann® iEXCEL (BLX, TLX; BLC, TLC) guidé | 40 |
| TLX, BLX | 45 |
| TLX, BLX guidé | 49 |

OBJECTIF DE CE GUIDE


Le guide de sélection permet de définir les pièces et les instruments de la cassette modulaire requise pour une indication spécifique. Chaque chapitre comprend une liste de commande, ainsi qu'un aperçu de la configuration qui montre comment assembler les pièces.

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| |  | | | | | | | | | | |
| | SP | SP NNC | SPS | BL | BLT | BLC | TLC | BLX | TLX | CIM | CI |
| | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Intervention chirurgicale sans manipulation | p. 9 | p. 9 | p. 9 | p. 9 | p. 24 | p. 34 | p. 34 | p. 45 | p. 45 | p. 19 | p. 19 |
| Chirurgie guidée | p. 13 | p. 13 | p. 3 | p. 13 | p. 28 | p. 40 | p. 40 | p. 49 | p. 49 | * | * |

* Pour le système implantaire Straumann® PURE Ceramic dans le cadre de la chirurgie guidée, utilisez la configuration des instruments de chirurgie guidée SP/SPS/BL (page 13) pour la préparation guidée du site implantaire. Pour la pose de l'implant, utiliser la configuration CIM/CI sans manipulation (page 19).

MODULE C CASSETTE AUXILIAIRE

Ce chapitre présente une solution alternative au module A, pour une configuration simple, de base.

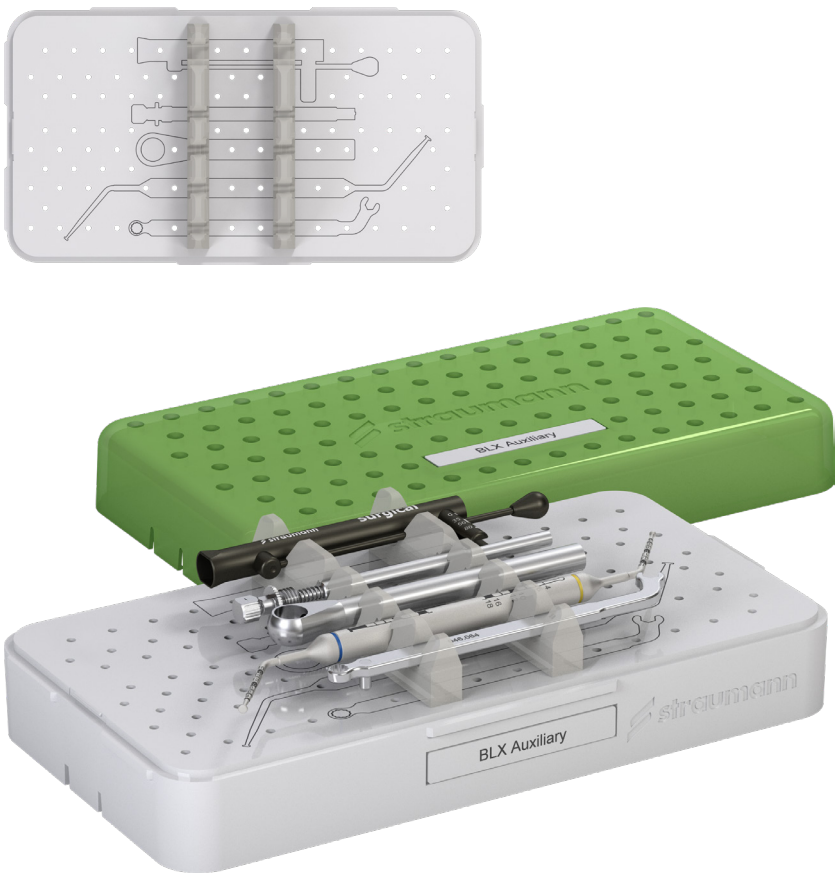

| Module C Cassette auxiliaire | | |
|------------------------------|-------|---|
| Réf. | Image | Produit |
| 041.783 | | Module C Cassette auxiliaire |
| 046.119 | | Clé à cliquet |
| 066.1100 | | Dispositif dynamométrique, 35 Ncm, 50 Ncm, 80 Ncm |
| 046.064 | | Clé de désolidarisation |
| 066.2000 | | Jauge de profondeur de l'implant |

LISTE COMPLÈTE DU MODULE A


Ce chapitre montre tous les instruments obligatoires *et* optionnels pour le module A.

MODULE A




| Module A | | |
|----------|-------|---|
| Réf. | Image | Produit |
| 041.761 | | Straumann® Cassette modulaire, Module A |

PLATEAU POUR CLÉ À CLIQUET

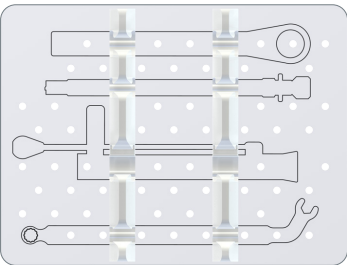


| Plateau pour clé à cliquet | | |
|----------------------------|-------|---|
| Réf. | Image | Produit |
| 041.766 | | Plateau pour clé à cliquet du module A |
| 046.119 | | Clé à cliquet |
| 046.049 | | Dispositif dynamométrique, 15 Ncm, 35 Ncm |
| 066.1100 | | Dispositif dynamométrique, 35 Ncm, 50 Ncm, 80 Ncm |
| 046.064 | | Clé de désolidarisation |

AIDE AU RETRAIT POUR PLATEAU LOXIM®

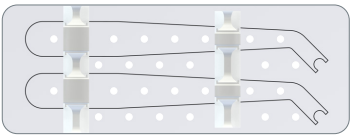


| Plateau pour aide au retrait | | | |
|------------------------------|-------|--|--------------------|
| Réf. | Image | Produit | Indication |
| 041.767 | | Plateau pour aide au retrait | |
| 026.0073 | | Aide au retrait S pour pièce de transfert Loxim® | BLT SC |
| 026.2558 | | Aide au retrait N pour pièce de transfert Loxim® | S, SP, TE, BL, BLT |
| 026.4558 | | Aide au retrait R/W pour pièce de transfert Loxim® | S, SP, TE, BL, BLT |

PLATEAU POUR CLÉ D'ARRÊT

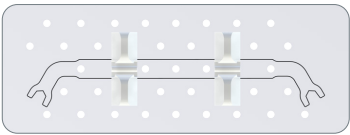


| Plateau pour clé d'arrêt | | |
|--------------------------|-------|--------------------------|
| Réf. | Image | Produit |
| 041.768 | | Plateau pour clé d'arrêt |
| 034.006 | | Clé d'arrêt, guidée |

PLATEAU POUR BRUCELLES

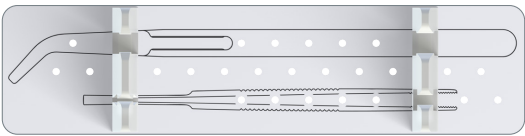


| Plateau pour brucelles | | |
|------------------------|-------|-------------------------------------|
| Réf. | Image | Produit |
| 041.770 | | Plateau pour brucelles |
| 046.095 | | Brucelles sans extrémités en titane |
| 046.820 | | Brucelles à instruments |

PLATEAU POUR AIDE DE PLANIFICATION

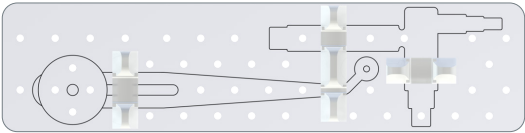


| Plateau pour aide de planification | | | |
|------------------------------------|-------|--|----------------------------|
| Réf. | Image | Produit | Indication |
| 041.769 | | Plateau pour aide de planification | |
| 046.147 | | Diagnostic T | S, SP, TE, CIM/CI, BL, BLT |
| 046.148 | | Indicateur de distance de l'implant Tissue Level | S, SP, TE, CIM/CI |
| 026.0901 | | Indicateur de distance de l'implant Bone Level | BL, BLT |

PLATEAU POUR JAUGE DE PROFONDEUR D'IMPLANT

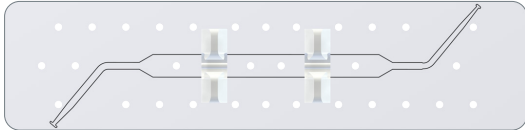

| Plateau pour jauge de profondeur d'implant | | |
|--|-------|--|
| Réf. | Image | Produit |
| 041.771 | | Plateau pour jauge de profondeur d'implant |
| 066.2000 | | Jauge de profondeur de l'implant |

SCS JEU DE TOURNEVIS

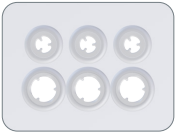

| SCS Jeu de tournevis | | |
|----------------------|-------|---|
| Réf. | Image | Produit |
| 041.764 | | Plateau à œillets, 3 petits + 3 grands |
| 046.400 | | SCS Tournevis pour clé à cliquet, extra court |
| 046.401 | | SCS Tournevis pour clé à cliquet, court |
| 046.402 | | SCS Tournevis pour clé à cliquet, long |
| 046.410 | | SCS Tournevis pour contre-angle, extra court |
| 046.411 | | SCS Tournevis pour contre-angle, court |
| 046.412 | | SCS Tournevis pour contre-angle, long |

SA JEU DE TOURNEVIS



| SA Jeu de tournevis | | |
|---------------------|-------|---|
| Réf. | Image | Produit |
| 041.764 | | Plateau à œillets, 3 petits + 3 grands |
| 046.789 | | SA Tournevis pour contre-angle, extra court |
| 046.790 | | SA Tournevis pour contre-angle, court |
| 046.791 | | SA Tournevis pour contre-angle, long |
| 046.786 | | SA Tournevis pour clé à cliquet, extra court* |
| 046.787 | | SA Tournevis pour clé à cliquet, court* |
| 046.788 | | SA Tournevis pour clé à cliquet, long* |


* Conserver séparément l'auxiliaire de manipulation du tournevis SA pour la clé à cliquet dans le plateau à œillets 041.765

JEU DE TRÉPANS OSSEUX POUR OS



| Jeu de tréfans osseux pour os | | | |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------|-----------------|
| Réf. | Image | Produit | Indication |
| 041.762 | | Plateau à œillets 6 petits | |
| 044.304 | | Trépan osseux RN/RT | S, SP, TLX |
| 044.305 | | Trépan osseux WN/WT | |
| 026.0070 | | Trépan osseux, plate-forme ovale SC | BLT SC Ø 2,9 mm |
| 026.0022 | | BL Trépan osseux 1 | BL, BLT, BLX |
| 026.0023 | | BL Trépan osseux 2 | |
| 026.0024 | | BL Trépan osseux 3 | |

INSTRUMENT D'EXPLANTATION 48H

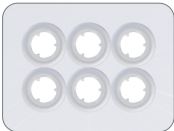

| Instrument d'explantation 48h | | | |
|-------------------------------|-------|--|------------|
| Réf. | Image | Produit | Indication |
| 041.763 | | Plateau à œillets 6 grands | |
| 80103 | | Instrument d'explantation 48h RN/WN | S, SP, TE |
| 80087 | | Instrument d'explantation 48h RN/WN | |
| 031.080 | | Instrument d'explantation 48h, implant Straumann® PURE Ceramic (Monotype) RD | CIM/CI |
| 031.081 | | Instrument d'explantation 48h, implant Straumann® PURE Ceramic (Monotype) ND | |
| 032.053 | | Instrument d'explantation 48h pour implant Straumann® PURE Ceramic RD | |
| 026.0072 | | Instrument d'explantation 48h SC | BLT |
| 026.2048 | | Instrument d'explantation 48h NC | BL, BLT |
| 026.4048 | | Instrument d'explantation 48h RC | |
| 049.361 | | Instrument d'explantation 48h NNC | NNC |
| 066.4205 | | TorcFit™ Instrument de vissage d'implant pour clé à cliquet, court | BLX, TLX |
| 066.4206 | | TorcFit™ Instrument de vissage d'implant pour clé à cliquet, long | |

* Remarque : les instruments d'explantation CIM/CI PURE 48h sont destinés uniquement à un usage unique.



Liste de commandes : Standard Plus, Standard Plus Short, Bone Level

MODULE A – LISTE DE COMMANDES

| SP Standard Plus / SPS Standard Plus Short / BL Bone Level | | |
|--|-------|--|
| Réf. | Image | Produit |
| 041.761 | | Straumann® Cassette modulaire, Module A |
| 041.766 | | Plateau pour clé à cliquet du module A |
| 046.119 | | Clé à cliquet |
| 046.049 | | Dispositif dynamométrique |
| 046.064 | | Clé de désolidarisation |
| 041.767 | | Plateau pour aide au retrait |
| 026.2558 | | Aide au retrait N pour pièce de transfert Loxim® |
| 026.4558 | | Aide au retrait R/W pour pièce de transfert Loxim® |
| 041.764 | | Plateau à œillets, 3 petits + 3 grands |
| 046.400 | | SCS Tournevis pour clé à cliquet, extra court |
| 046.401 | | SCS Tournevis pour clé à cliquet, court |
| 046.402 | | SCS Tournevis pour clé à cliquet, long |
| 046.410 | | SCS Tournevis pour contre-angle, extra court |
| 046.411 | | SCS Tournevis pour contre-angle, court |
| 046.412 | | SCS Tournevis pour contre-angle, long |

INSTRUMENTS SPÉCIFIQUES TISSUE LEVEL DU MODULE A

Ajouter pour la gamme d'implants Standard Plus et Standard Plus Short

| SP Standard Plus / SPS Standard Plus Short / BL Bone Level | | |
|--|-------|--|
| Réf. | Image | Produit |
| 041.764 | | Plateau à œillets, 3 petits + 3 grands |
| 044.304 | | Trépan osseux RN/RT |
| 044.305 | | Trépan osseux WN/WT |
| 80103 | | Instrument d'explantation 48h RN/WN |
| 80087 | | Instrument d'explantation 48h RN/WN |

INSTRUMENTS SPÉCIFIQUES BONE LEVEL DU MODULE A

Ajouter pour la gamme d'implants Bone Level

| SP Standard Plus / SPS Standard Plus Short / BL Bone Level | | |
|--|-------|--|
| Réf. | Image | Produit |
| 041.764 | | Plateau à œillets, 3 petits + 3 grands |
| 026.0022 | | BL Trépan osseux 1 |
| 026.0023 | | BL Trépan osseux 2 |
| 026.0024 | | BL Trépan osseux 3 |
| 026.2048 | | Instrument d'explantation 48h NC |
| 026.4048 | | Instrument d'explantation 48h RC |

Pour les instruments supplémentaires (auxiliaire de planification, brucelles, tournevis SA), veuillez vous référer à la page 4 *Liste complète du module A*.



Liste de commandes : Standard Plus, Standard Plus Short, Bone Level

MODULE B – LISTE DE COMMANDES

| SP Standard Plus / SPS Standard Plus Short / BL Bone Level | | |
|--|-------|---|
| Réf. | Image | Produit |
| 041.776 | | Straumann® Cassette modulaire, Module B |
| 041.779 | | Module B, plateau d'instruments à parois parallèles |
| 040.563 | | Rallonge pour foret |
| 044.003 | | Fraise boule, Ø 2,3 mm |
| 044.004 | | Fraise boule, Ø 3,1 mm |
| 026.0056 | | Foret-aiguille, long, Ø 1,6 mm |
| 044.783* | | Foret hélicoïdal PRO pilote, court, Ø 2,2 mm |
| 044.787* | | Foret hélicoïdal PRO, court, Ø 2,8 mm |
| 044.791* | | Foret hélicoïdal PRO, court, Ø 3,5 mm |
| 044.795* | | Foret hélicoïdal PRO, court, Ø 4,2 mm |
| 044.785* | | Foret hélicoïdal PRO pilote, long, Ø 2,2 mm |
| 044.789* | | Foret hélicoïdal PRO, long, Ø 2,8 mm |
| 044.793* | | Foret hélicoïdal PRO, long, Ø 3,5 mm |
| 044.797* | | Foret hélicoïdal PRO, long, Ø 4,2 mm |
| 046.799 | | Guide de parallélisme, Ø 2,2 mm |
| 046.800 | | Jauge de profondeur, Ø 2,8 mm |
| 046.802 | | Jauge de profondeur, Ø 3,5 mm |
| 046.804 | | Jauge de profondeur, Ø 4,2 mm |
| 046.460 | | Adaptateur pour clé à cliquet, extra court |
| 046.461 | | Instrumente de visage, court |

* Tous les produits ne sont pas toujours disponibles dans tous les pays. Pour obtenir plus d'informations, consulter le document *Système implantaire Straumann® dentaire, Informations de base* (702084/fr).

| | | |
|---------|--|---|
| 046.470 | | Adaptateur pour contre-angle, extra court |
| 046.471 | | Adaptateur pour contre-angle, court |

INSTRUMENTS SPÉCIFIQUES TISSUE LEVEL DU MODULE B

Ajouter pour la gamme d'implants Standard Plus et Standard Plus Short

| SP Standard Plus / SPS Standard Plus Short / BL Bone Level | | |
|--|-------|--|
| Réf. | Image | Produit |
| 034.332 | | SP Fraise profilée, courte, Ø 3,3 mm, compatible avec FIBA |
| 034.333 | | SP Fraise profilée, courte, Ø 4,1 mm, compatible avec FIBA |
| 044.084 | | SP Fraise profilée, courte, Ø 4,8 mm, compatible avec FIBA |
| 034.351 | | S/SP Taraud, court, Ø 3,3 mm, compatible avec FIBA |
| 034.352 | | S/SP Taraud, court, Ø 4,1 mm, compatible avec FIBA |
| 034.353 | | S/SP Taraud, court, Ø 4,8 mm, compatible avec FIBA |

INSTRUMENTS SPÉCIFIQUES BONE LEVEL DU MODULE B

Ajouter pour la gamme d'implants Bone Level


| SP Standard Plus / SPS Standard Plus Short / BL Bone Level | | |
|--|-------|--|
| Réf. | Image | Produit |
| 034.327 | | BL/NNC Fraise profilée, courte, Ø 3,3 mm, compatible avec FIBA |
| 034.328 | | BL Fraise profilée, courte, Ø 4,1 mm, compatible avec FIBA |
| 034.329 | | BL Fraise profilée, courte, Ø 4,8 mm, compatible avec FIBA |
| 034.348 | | BL/NNC Taraud, court, Ø 3,3 mm, compatible avec FIBA |
| 034.349 | | BL Taraud, court, Ø 4,1 mm, compatible avec FIBA |
| 034.350 | | BL Taraud, court, Ø 4,8 mm, compatible avec FIBA |



Configuration du module A : Standard Plus, Standard Plus Short, Bone Level

1/2

Module A
041.761

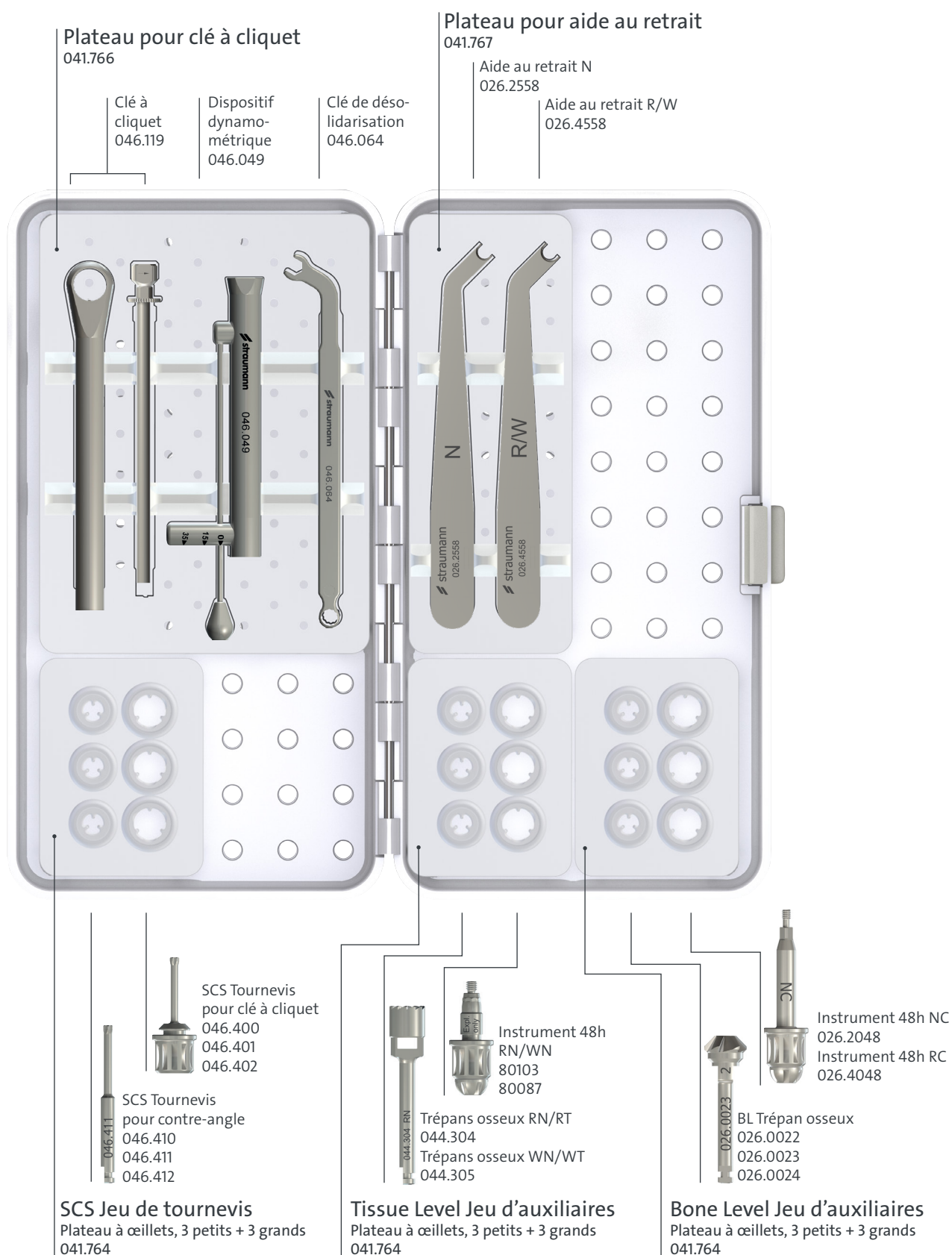



Configuration du module B : Standard Plus, Standard Plus Short, Bone Level

Plateau d'instruments à parois parallèles
041.779





Instrument de visage
046.460
046.461



Adaptateur pour contre-angle
046.470
046.471



Rallonge pour foret
040.563

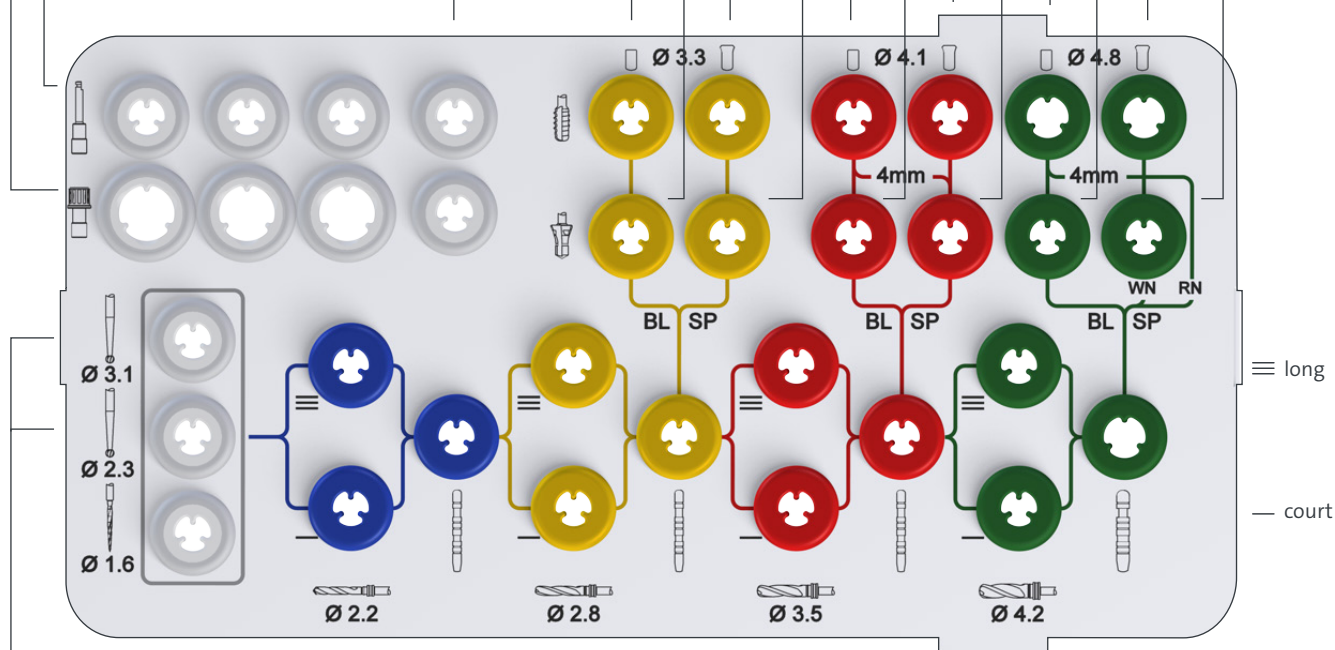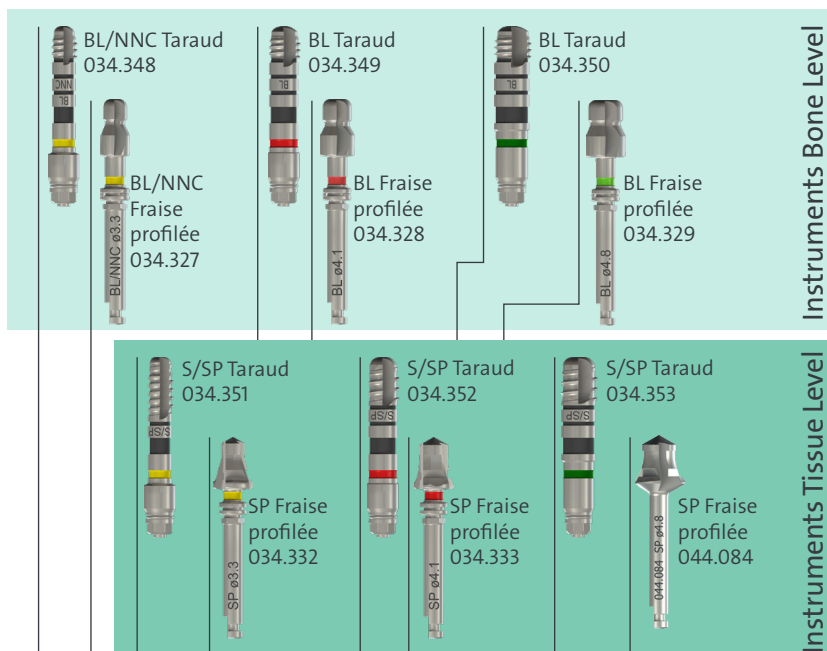

Fraise ronde
044.004
044.003



Foret aiguille
026.0056



Foret hélicoïdal PRO pilote
044.783*
044.785*



Foret hélicoïdal PRO
044.787*
044.789*



Foret hélicoïdal PRO
044.791*
044.793*



Foret hélicoïdal PRO
044.795*
044.797*



Guide de parallélisme
046.799



Jauge de profondeur
046.800



Jauge de profondeur
046.802



Jauge de profondeur
046.804



Liste de commandes : Standard Plus, Standard Plus Short, Bone Level guidé

MODULE A – LISTE DE COMMANDES

| SP Standard Plus / SPS Standard Plus Short / BL Bone Level | | |
|--|-------|--|
| Réf. | Image | Produit |
| 041.761 | | Straumann® Cassette modulaire, Module A |
| 041.766 | | Plateau pour clé à cliquet du module A |
| 046.119 | | Clé à cliquet |
| 046.049 | | Dispositif dynamométrique |
| 046.064 | | Clé de désolidarisation |
| 041.767 | | Plateau pour aide au retrait |
| 026.2558 | | Aide au retrait N pour pièce de transfert Loxim® |
| 026.4558 | | Aide au retrait R/W pour pièce de transfert Loxim® |
| 041.764 | | Plateau à œillets, 3 petits + 3 grands |
| 046.400 | | SCS Tournevis pour clé à cliquet, extra court |
| 046.401 | | SCS Tournevis pour clé à cliquet, court |
| 046.402 | | SCS Tournevis pour clé à cliquet, long |
| 046.410 | | SCS Tournevis pour contre-angle, extra court |
| 046.411 | | SCS Tournevis pour contre-angle, court |
| 046.412 | | SCS Tournevis pour contre-angle, long |

INSTRUMENTS SPÉCIFIQUES TISSUE LEVEL DU MODULE A

Ajouter pour la gamme d'implants Standard Plus et Standard Plus Short

| SP Standard Plus / SPS Standard Plus Short / BL Bone Level | | |
|--|-------|--|
| Réf. | Image | Produit |
| 041.764 | | Plateau à œillets, 3 petits + 3 grands |
| 044.304 | | Trépan osseux RN/RT |
| 044.305 | | Trépan osseux WN/WT |
| 80103 | | Instrument d'explantation 48h RN/WN |
| 80087 | | Instrument d'explantation 48h RN/WN |

INSTRUMENTS SPÉCIFIQUES BONE LEVEL DU MODULE A

Ajouter pour la gamme d'implants Bone Level

| SP Standard Plus / SPS Standard Plus Short / BL Bone Level | | |
|--|-------|--|
| Réf. | Image | Produit |
| 041.764 | | Plateau à œillets, 3 petits + 3 grands |
| 026.0022 | | BL Trépan osseux 1 |
| 026.0023 | | BL Trépan osseux 2 |
| 026.0024 | | BL Trépan osseux 3 |
| 026.2048 | | Instrument d'explantation 48h NC |
| 026.4048 | | Instrument d'explantation 48h RC |

Pour les instruments supplémentaires (auxiliaire de planification, brucelles, tournevis SA), veuillez vous référer à la page 4 *Liste complète du module A*.



Liste de commandes : Standard Plus, Standard Plus Short, Bone Level guidé

MODULE B – LISTE DE COMMANDES

| SP Standard Plus / SPS Standard Plus Short / BL Bone Level | | |
|--|-------|--|
| Réf. | Image | Produit |
| 041.776 | | Straumann® Cassette modulaire, Module B |
| 041.782 | | Module B, plateau d'instruments à parois parallèles guidés |
| 034.010 | | Emporte-pièce pour muqueuse, Ø 3,4 mm guidé |
| 034.011 | | Emporte-pièce pour muqueuse, Ø 4,0 mm guidé |
| 034.012 | | Emporte-pièce pour muqueuse, Ø 4,7 mm guidé |
| 034.215 | | Fraise plate Ø 2,8 mm |
| 034.415 | | Fraise plate Ø 3,5 mm |
| 034.615 | | Fraise plate Ø 4,2 mm |
| 044.783* | | Foret hélicoïdal PRO pilote, court, Ø 2,2 mm |
| 044.787* | | Foret hélicoïdal PRO, court, Ø 2,8 mm |
| 044.791* | | Foret hélicoïdal PRO, court, Ø 3,5 mm |
| 044.795* | | Foret hélicoïdal PRO, court, Ø 4,2 mm |
| 044.784* | | Foret hélicoïdal PRO pilote, moyen, Ø 2,2 mm |
| 044.788* | | Foret hélicoïdal PRO, moyen, Ø 2,8 mm |
| 044.792* | | Foret hélicoïdal PRO, moyen, Ø 3,5 mm |
| 044.796* | | Foret hélicoïdal PRO, moyen, Ø 4,2 mm |
| 044.785* | | Foret hélicoïdal PRO pilote, long, Ø 2,2 mm |
| 044.789* | | Foret hélicoïdal PRO, long, Ø 2,8 mm |
| 044.793* | | Foret hélicoïdal PRO, long, Ø 3,5 mm |
| 044.797* | | Foret hélicoïdal PRO, long, Ø 4,2 mm |
| 046.799 | | Guide de parallélisme, Ø 2,2 mm, BLT |
| 046.800 | | Jauge de profondeur, Ø 2,8 mm, BLT |
| 046.802 | | Jauge de profondeur, Ø 3,5 mm, BLT |
| 046.804 | | Jauge de profondeur, Ø 4,2 mm, BLT |
| 034.354 | | Adaptateur guidé pour fraise profilée, FIBA, H2 |
| 034.355 | | Adaptateur guidé pour fraise profilée, FIBA, H4 |
| 034.356 | | Adaptateur guidé pour fraise profilée, FIBA, H6 |

| | | |
|---------|--|--|
| 034.357 | | Adaptateur guidé pour taraud, FIBA, H2 |
| 034.358 | | Adaptateur guidé pour taraud, FIBA, H4 |
| 034.359 | | Adaptateur guidé pour taraud, FIBA, H6 |

INSTRUMENTS SPÉCIFIQUES BONE LEVEL DU MODULE B

Ajouter pour la gamme d'implants Bone Level

| SP Standard Plus / SPS Standard Plus Short / BL Bone Level | | |
|--|-------|--|
| Réf. | Image | Produit |
| 034.327 | | BL/NNC Fraise profilée, courte, Ø 3,3 mm, compatible avec FIBA |
| 034.328 | | BL Fraise profilée, courte, Ø 4,1 mm, compatible avec FIBA |
| 034.329 | | BL Fraise profilée, courte, Ø 4,8 mm, compatible avec FIBA |
| 034.348 | | BL/NNC Taraud, court, Ø 3,3 mm, compatible avec FIBA |
| 034.349 | | BL Taraud, court, Ø 4,1 mm, compatible avec FIBA |
| 034.350 | | BL Taraud, court, Ø 4,8 mm, compatible avec FIBA |
| 026.0083 | | BL/BLT Adaptateur guidé, pour contre-angle |
| 026.0084 | | BL/BLT Adaptateur guidé, pour clé à cliquet |

INSTRUMENTS SPÉCIFIQUES TISSUE LEVEL DU MODULE B

Ajouter pour la gamme d'implants Standard Plus et Standard Plus Short

| SP Standard Plus / SPS Standard Plus Short / BL Bone Level | | |
|--|-------|--|
| Réf. | Image | Produit |
| 034.332 | | SP Fraise profilée, courte, Ø 3,3 mm, compatible avec FIBA |
| 034.333 | | SP Fraise profilée, courte, Ø 4,1 mm, compatible avec FIBA |
| 044.084 | | SP Fraise profilée, courte, Ø 4,8 mm, compatible avec FIBA |
| 034.351 | | S/SP Taraud, court, Ø 3,3 mm, compatible avec FIBA |
| 034.352 | | S/SP Taraud, court, Ø 4,1 mm, compatible avec FIBA |
| 034.353 | | S/SP Taraud, court, Ø 4,8 mm, compatible avec FIBA |
| 046.708 | | SP/NNC Adaptateur guidé, pour contre-angle |
| 046.710 | | SP/NNC Adaptateur guidé, pour clé à cliquet |

* Tous les produits ne sont pas toujours disponibles dans tous les pays. Pour obtenir plus d'informations, consulter le document *Système implantaire Straumann® dentaire, Informations de base* (702084/fr).



Liste de commandes : Standard Plus, Standard Plus Short, Bone Level guidé

MODULE C – LISTE DE COMMANDES


| TLX/BLX Guidé | | |
|---------------|-------|---|
| Réf. | Image | Produit |
| 041.772 | | Straumann® Cassette modulaire, Module C, Guided Surgery |
| 026.0147 | | Poignée de perçage, Ø 2,2 mm, 1 mm/3 mm |
| 026.0148 | | Poignée de perçage, Ø 2,8 mm, 1 mm/3 mm |
| 026.0150 | | Poignée de perçage, Ø 3,5 mm, 1 mm/3 mm |
| 026.0152 | | Poignée de perçage, Ø 4,2 mm, 1 mm/3 mm |
| 034.284 | | Foret pour pivot de fixation pour gabarit, Ø 1,3 mm |
| 034.282 | | Pivot de fixation pour gabarit, Ø 1,3 mm |
| 034.298 | | Pivot de fixation pour gabarit, Ø 2,8/2,8 mm |
| 034.285 | | Pivot de fixation pour gabarit, Ø 5/2,8 mm |
| 034.287 | | Pivot de fixation pour gabarit, Ø 5/3,5 mm |
| 034.289 | | Pivot de fixation pour gabarit, Ø 5/4,2 mm |



Configuration du module A : Standard Plus, Standard Plus Short, Bone Level guidé

1/3

Module A
041.761

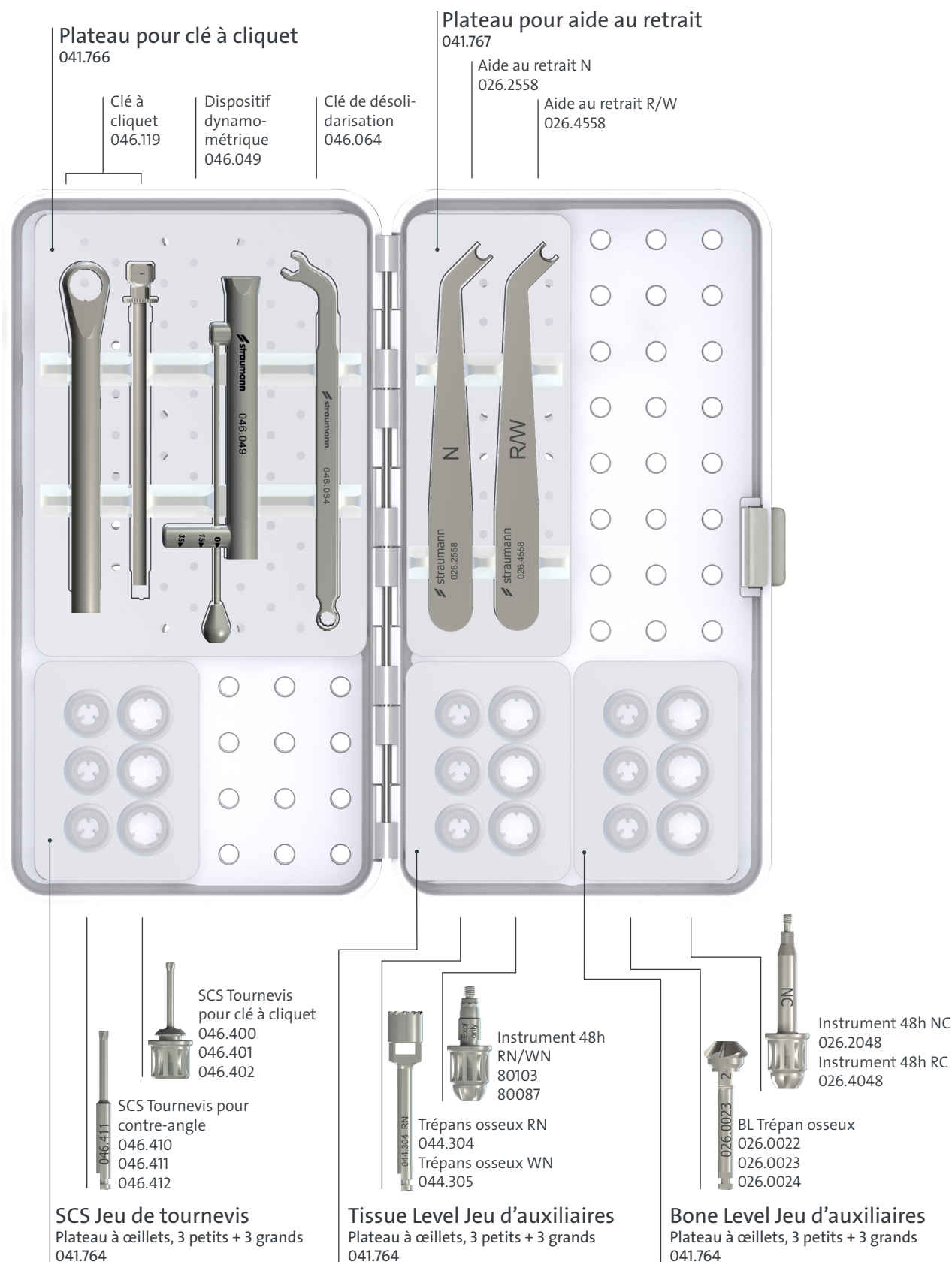





Configuration du module B : Standard Plus, Standard Plus Short, Bone Level guidé

Plateau d'instruments à parois parallèles guidés 041.782

BL/BLT Adaptateur guidé
026.0083
026.0084

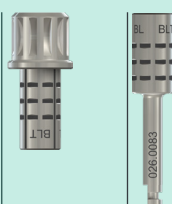

SP/NNC Adaptateur guidé
046.708
046.710

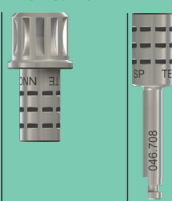

Adaptateur guidé pour fraise profilée
034.354
034.355
034.356



Adaptateur guidé pour taraud
034.357
034.358
034.359



BL/NNC Taraud
034.348



BL Taraud
034.349



BL Taraud
034.350



BL/NNC Fraise profilée
034.327



BL Fraise profilée
034.328



BL Fraise profilée
034.329




Instruments Bone Level

S/SP Taraud
034.351



S/SP Taraud
034.352

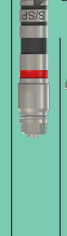

S/SP Taraud
034.353



SP Fraise profilée
034.332




SP Fraise profilée
034.333



SP Fraise profilée
044.084



Instruments Tissue Level

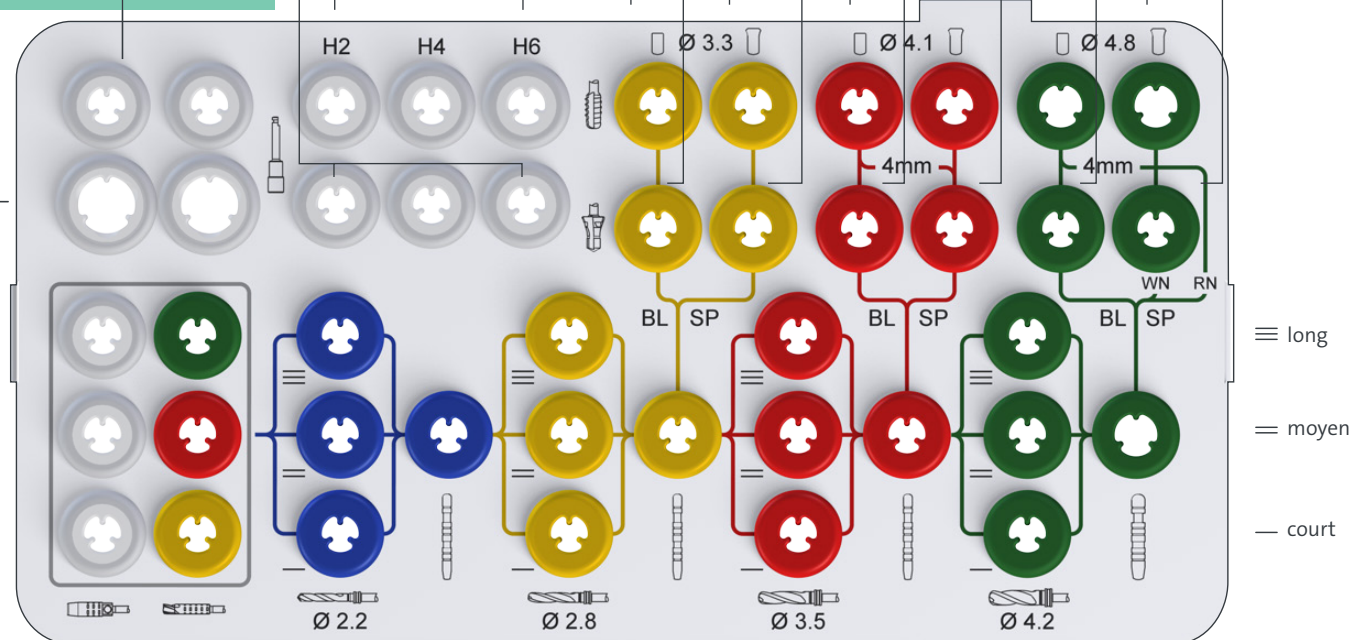

Emporte-pièce pour muqueuse
034.012
034.011
034.010



Fraise plate
034.615
034.415
034.215




Foret hélicoïdal PRO pilote
044.783*
044.784*
044.785*



Guide de parallélisme
046.799




Foret hélicoïdal PRO
044.787*
044.788*
044.789*

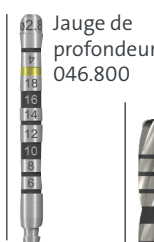

Jauge de profondeur
046.800




Foret hélicoïdal PRO
044.791*
044.792*
044.793*

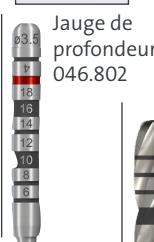

Jauge de profondeur
046.802



Foret hélicoïdal PRO
044.795*
044.796*
044.797*

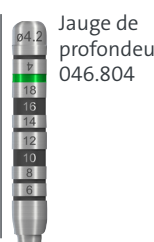


Jauge de profondeur
046.804

* Tous les produits ne sont pas toujours disponibles dans tous les pays. Pour obtenir plus d'informations, consulter le document *Système implantaire Straumann® dentaire, Informations de base (702084/fr)*.

Configuration du module A : 3/3

Standard Plus, Standard Plus Short,
Bone Level **guidé**

041.772

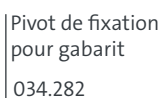

| | | | |
|--------------------------------|---------|---------|---------|
| Pivot de fixation pour gabarit | 034.285 | 034.287 | 034.289 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|

Poignée de forage
026.0147 | 026.0148

| 026.0150

| 026.0152

| | |
|---------|---------|
| | 034.282 |
| Foret | |
| 034.284 | |

034.298



Liste de commandes : Système implantaire Straumann® PURE Ceramic

MODULE A – LISTE DE COMMANDES

| Système implantaire Straumann® PURE Ceramic | | |
|---|-------|---|
| Réf. | Image | Produit |
| 041.761 | | Straumann® Cassette modulaire, Module A |
| 041.766 | | Plateau pour clé à cliquet du module A |
| 046.119 | | Clé à cliquet |
| 046.049 | | Dispositif dynamométrique |
| 046.064 | | Clé de désolidarisation |
| 041.764 | | Plateau à œillets, 3 petits + 3 grands |
| 046.400 | | SCS Tournevis pour clé à cliquet, extra court |
| 046.401 | | SCS Tournevis pour clé à cliquet, court |
| 046.402 | | SCS Tournevis pour clé à cliquet, long |
| 046.410 | | SCS Tournevis pour contre-angle, extra court |
| 046.411 | | SCS Tournevis pour contre-angle, court |
| 046.412 | | SCS Tournevis pour contre-angle, long |
| 041.763 | | Plateau à œillets, 6 grands |
| 031.080 | | Instrument d'explantation 48h, implant Straumann® PURE Ceramic (Monotype) RD* |
| 031.081 | | Instrument d'explantation 48h, implant Straumann® PURE Ceramic (Monotype) ND* |
| 032.053 | | Instrument d'explantation 48h pour implant Straumann® PURE Ceramic RD* |

* Remarque : Les instruments d'explantation PURE 48h sont destinés uniquement à un usage unique.

Pour les instruments supplémentaires (auxiliaire de planification, brucelles, tournevis SA), veuillez vous référer à la page 4 *Liste complète du module A*.



Liste de commandes : Système implantaire Straumann® PURE Ceramic

MODULE B – LISTE DE COMMANDES

| Système implantaire Straumann® PURE Ceramic | | |
|---|-------|--|
| Réf. | Image | Produit |
| 041.776 | | Straumann® Cassette modulaire, Module B, Base + Couvercle |
| 041.778 | | Module B, Plateau d'instruments de base |
| 040.563 | | Rallonge pour foret |
| 044.003 | | Fraise boule, Ø 2,3 mm |
| 044.004 | | Fraise boule, Ø 3,1 mm |
| 026.0056 | | Foret-aiguille, long, Ø 1,6 mm |
| 044.783* | | Foret hélicoïdal PRO pilote, court, Ø 2,2 mm |
| 044.787* | | Foret hélicoïdal PRO, court, Ø 2,8 mm |
| 044.791* | | Foret hélicoïdal PRO, court, Ø 3,5 mm |
| 044.795* | | Foret hélicoïdal PRO, court, Ø 4,2 mm |
| 044.785* | | Foret hélicoïdal PRO pilote, long, Ø 2,2 mm |
| 044.789* | | Foret hélicoïdal PRO, long, Ø 2,8 mm |
| 044.793* | | Foret hélicoïdal PRO, long, Ø 3,5 mm |
| 044.797* | | Foret hélicoïdal PRO, long, Ø 4,2 mm |
| 034.327 | | BL/NNC Fraise profilée, courte, Ø 3,3 mm, compatible avec FIBA |
| 034.328 | | BL Fraise profilée, courte, Ø 4,1 mm, compatible avec FIBA |
| 034.329 | | BL Fraise profilée, courte, Ø 4,8 mm, compatible avec FIBA |
| 034.348 | | BL/NNC Taraud, court, Ø 3,3 mm, compatible avec FIBA |
| 034.349 | | BL Taraud, court, Ø 4,1 mm, compatible avec FIBA |
| 034.350 | | BL Taraud, court, Ø 4,8 mm, compatible avec FIBA |

| | | |
|---------|--|--|
| 046.799 | | Guide de parallélisme, Ø 2,2 mm, BLT |
| 046.800 | | Jauge de profondeur, Ø 2,8 mm, BLT |
| 046.802 | | Jauge de profondeur, Ø 3,5 mm, BLT |
| 046.804 | | Jauge de profondeur, Ø 4,2 mm, BLT |
| 046.460 | | Adaptateur pour clé à cliquet, extra court |
| 046.461 | | Instrumente de visage, court |
| 046.470 | | Adaptateur pour contre-angle, extra court |
| 046.471 | | Adaptateur pour contre-angle, court |

MODULE C – LISTE DE COMMANDES

| Système implantaire Straumann® PURE Ceramic | | |
|---|-------|---|
| Réf. | Image | Produit |
| 041.773 | | Cassette modulaire Straumann®, Module C, instruments de réserve |
| 031.102 | | Indicateur de position, PURE ND, AH 4 mm, Ø 2.2 mm |
| 031.103 | | Indicateur de position, PURE ND, AH 4 mm, Ø 2.8 mm |
| 031.112 | | Indicateur de position, PURE ND, AH 5,5 mm, Ø 2.2 mm |
| 031.113 | | Indicateur de position, PURE ND, AH 5,5 mm, Ø 2.8 mm |
| 031.123 | | Indicateur de position, PURE RD, AH 4 mm, Ø 2.2 mm |
| 031.125 | | Indicateur de position, PURE RD, AH 4 mm, Ø 3.5 mm |
| 031.143 | | Indicateur de position, PURE RD, AH 5,5 mm, Ø 2.2 mm |
| 031.145 | | Indicateur de position, PURE RD, AH 5,5 mm, Ø 3.5 mm |


* Tous les produits ne sont pas toujours disponibles dans tous les pays. Pour obtenir plus d'informations, consulter le document *Système implantaire Straumann® dentaire, Informations de base* (702084/fr).




Configuration du module A : Système implantaire Straumann® PURE Ceramic

1/3

Module A
041.761

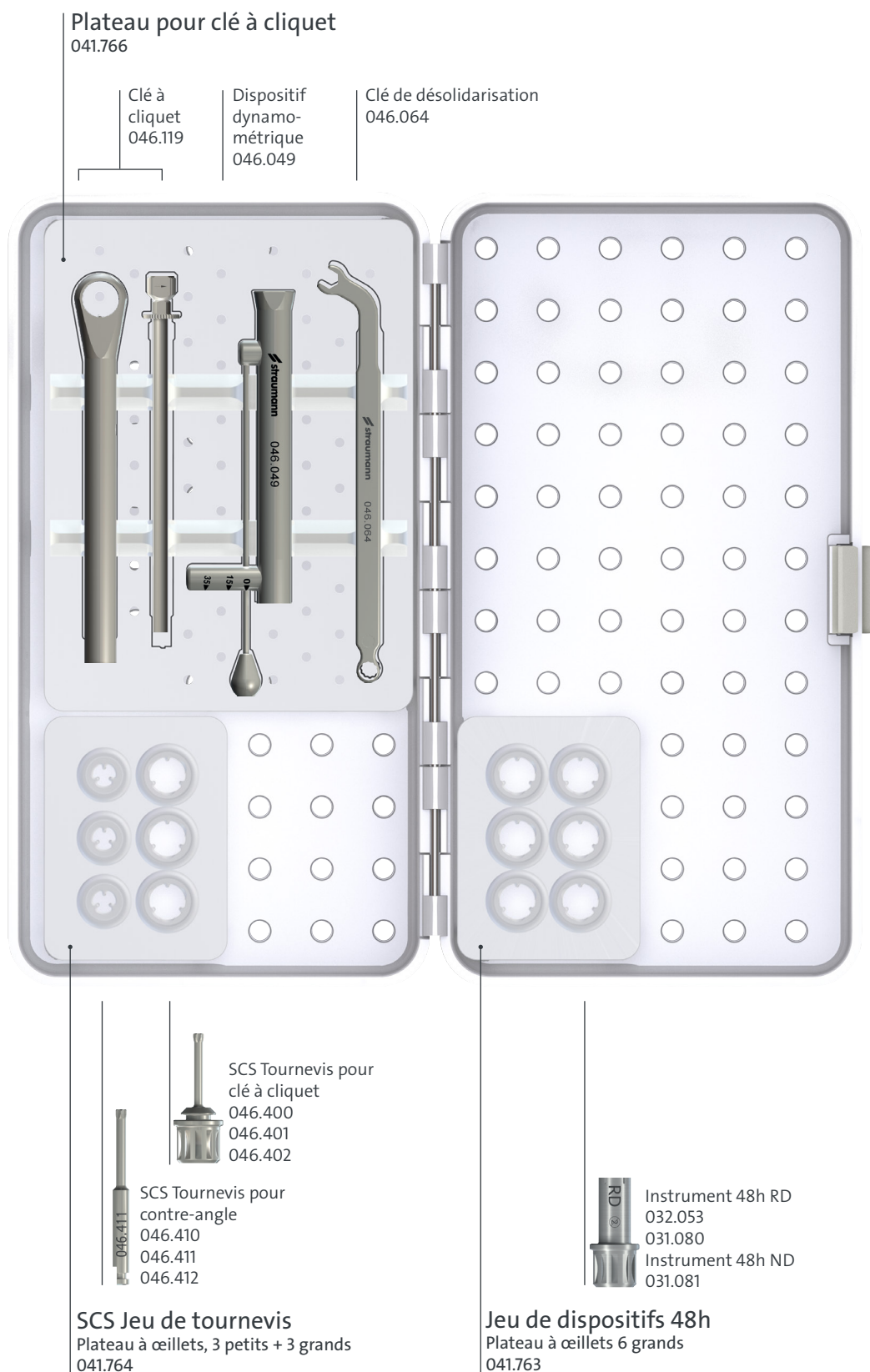

Plateau d'instruments de base 041.778

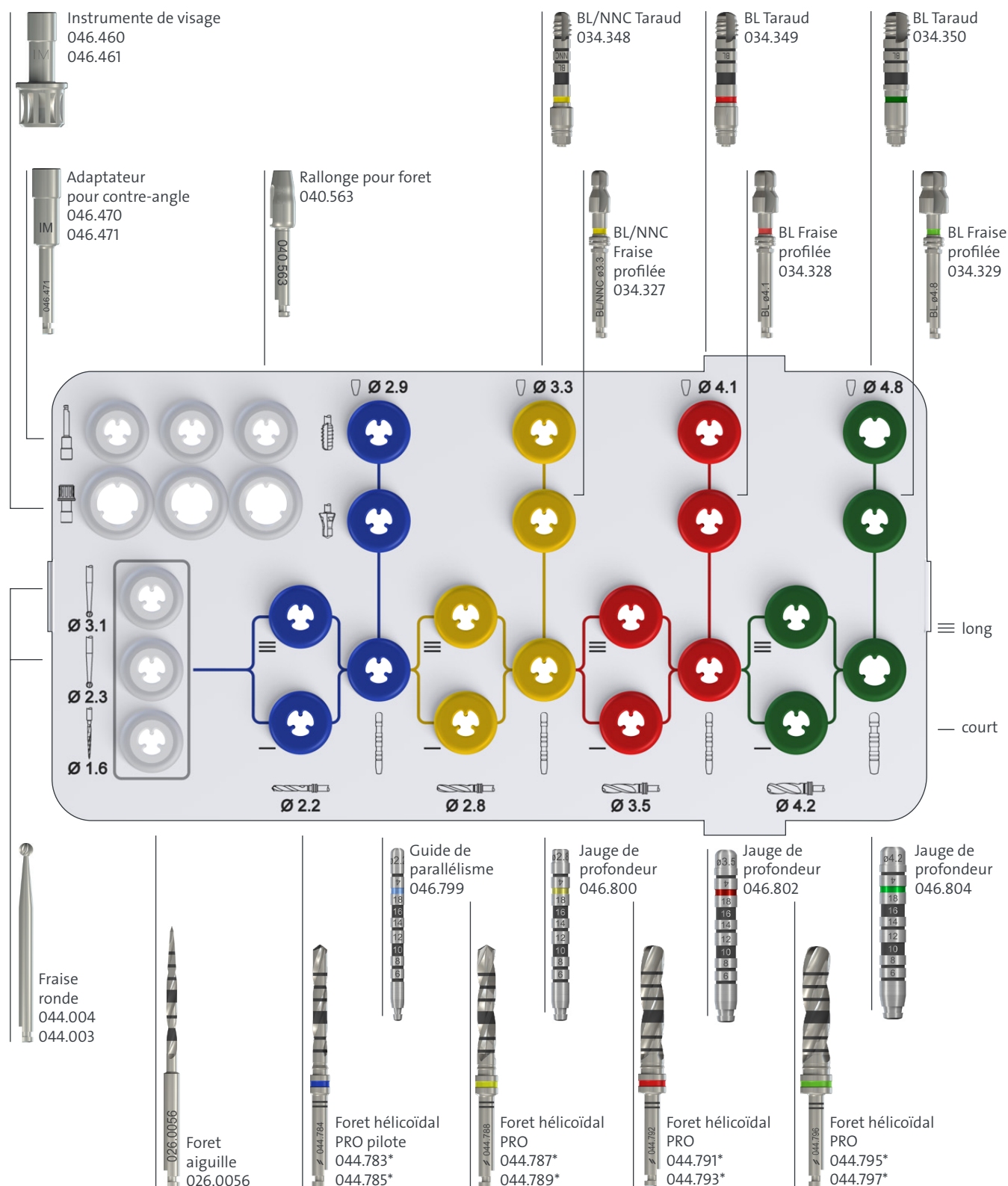


* Tous les produits ne sont pas toujours disponibles dans tous les pays. Pour obtenir plus d'informations, consulter le document *Système implantaire Straumann® dentaire, Informations de base* (702084/fr).



Configuration du module C : Système implantaire Straumann® PURE Ceramic

3/3

Instruments de réserve du module C
041.773

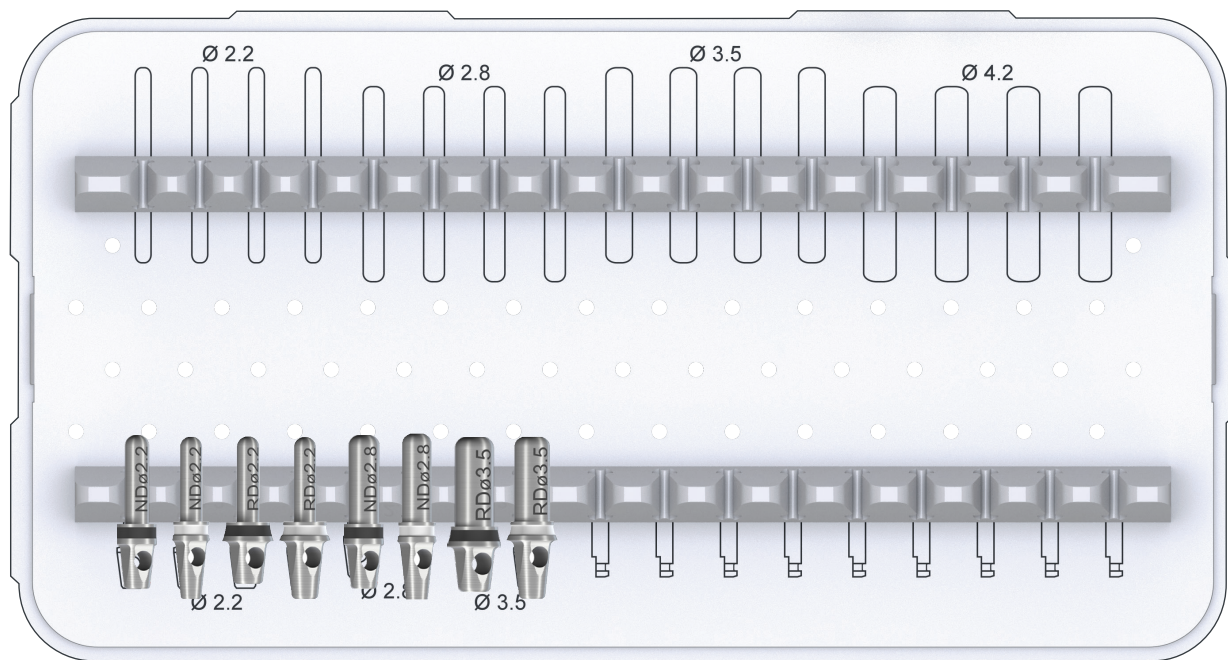

Indicateurs
de position
031.102
031.112
031.123
031.143

031.103
031.113

031.125
031.145



Liste de commandes : Bone Level Tape- red

MODULE A – LISTE DE COMMANDES

| BLT Bone Level Tapered | | |
|------------------------|-------|--|
| Réf. | Image | Produit |
| 041.761 | | Straumann® Cassette modulaire, Module A |
| 041.763 | | Plateau à œillets, 6 grands |
| 026.2048 | | Instrument 48h NC, BLT |
| 026.4048 | | Instrument 48h RC, BLT |
| 041.766 | | Plateau pour clé à cliquet du module A |
| 046.119 | | Clé à cliquet |
| 046.049 | | Dispositif dynamométrique |
| 046.064 | | Clé de désolidarisation |
| 041.767 | | Plateau pour aide au retrait |
| 026.2558 | | Aide au retrait N pour pièce de transfert Loxim® |
| 026.4558 | | Aide au retrait R/W pour pièce de transfert Loxim® |
| 041.764 | | Plateau à œillets, 3 petits + 3 grands |
| 046.400 | | SCS Tournevis pour clé à cliquet, extra court |
| 046.401 | | SCS Tournevis pour clé à cliquet, court |
| 046.402 | | SCS Tournevis pour clé à cliquet, long |
| 046.410 | | SCS Tournevis pour contre-angle, extra court |
| 046.411 | | SCS Tournevis pour contre-angle, court |
| 046.412 | | SCS Tournevis pour contre-angle, long |

| | | |
|----------|--|-----------------------------|
| 041.762 | | Plateau à œillets, 6 petits |
| 026.0022 | | BL Trépan osseux 1 |
| 026.0023 | | BL Trépan osseux 2 |
| 026.0024 | | BL Trépan osseux 3 |

INSTRUMENTS SPÉCIFIQUES AU MODULE A BLT Ø 2,9 MM

Ajouter pour la gamme d'implants BLT Ø 2,9

| BLT Bone Level Tapered Ø 2,9 | | |
|------------------------------|-------|--|
| Réf. | Image | Produit |
| 041.767 | | Plateau de l'aide au retrait* |
| 026.0073 | | Aide au retrait S pour pièce de transfert Loxim® |
| 041.764 | | Plateau à œillets, 3 petits + 3 grands* |
| 026.0070 | | Trépan osseux, plate-forme ovale, BLT SC* |
| 026.0072 | | Instrument 48h SC, BLT SC* |
| 025.0042 | | SC Adaptateur pour contre-angle, long, BLT SC* |
| 025.0043 | | SC Adaptateur pour clé à cliquet, long, BLT SC* |

*Uniquement pour la gamme d'implants Bone Level Tapered Small CrossFit®

Pour les instruments supplémentaires (auxiliaire de planification, brucelles, tournevis SA), veuillez vous référer à la page 4 *Liste complète du module A*.



Liste de commandes : Bone Level Tape-

red

MODULE B – LISTE DE COMMANDES

| BLT Bone Level Tapered | | |
|------------------------|-------|---|
| Réf. | Image | Produit |
| 041.776 | | Straumann® Cassette modulaire, Module B, Base + Couvercle |
| 041.778 | | Module B, Plateau d'instruments de base |
| 040.563 | | Rallonge pour foret |
| 044.003 | | Fraise boule, Ø 2,3 mm |
| 044.004 | | Fraise boule, Ø 3,1 mm |
| 026.0056 | | Foret-aiguille, long, Ø 1,6 mm |
| 066.1301 | | X VeloDrill™, court, Ø 2,2 mm |
| 066.1302 | | X VeloDrill™, court, Ø 2,8 mm |
| 066.1304 | | X VeloDrill™, court, Ø 3,5 mm |
| 066.1306 | | X VeloDrill™, court, Ø 4,2 mm |
| 066.1701 | | X VeloDrill™, long, Ø 2,2 mm |
| 066.1702 | | X VeloDrill™, long, Ø 2,8 mm |
| 066.1704 | | X VeloDrill™, long, Ø 3,5 mm |
| 066.1706 | | X VeloDrill™, long, Ø 4,2 mm |
| 026.0061 | | BLT Fraise profilée, courte, Ø 2,9 mm |
| 034.324 | | BLT Fraise profilée, courte, Ø 3,3 mm, compatible avec FIBA |
| 034.325 | | BLT Fraise profilée, courte, Ø 4,1 mm, compatible avec FIBA |
| 034.326 | | BLT Fraise profilée, courte, Ø 4,8 mm, compatible avec FIBA |

| | | |
|----------|--|---|
| 026.0063 | | BLT Taraud, long, Ø 2,9 mm |
| 034.345 | | BLT Taraud, court, Ø 3,3 mm, compatible avec FIBA |
| 034.346 | | BLT Taraud, court, Ø 4,1 mm, compatible avec FIBA |
| 034.347 | | BLT Taraud, court, Ø 4,8 mm, compatible avec FIBA |
| 046.799 | | Guide de parallélisme, Ø 2,2 mm |
| 046.800 | | Jauge de profondeur, Ø 2,8 mm |
| 046.802 | | Jauge de profondeur, Ø 3,5 mm |
| 046.804 | | Jauge de profondeur, Ø 4,2 mm |
| 046.460 | | Adaptateur pour clé à cliquet, extra court |
| 046.461 | | Instrumente de visage, court |
| 046.470 | | Adaptateur pour contre-angle, extra court |
| 046.471 | | Adaptateur pour contre-angle, court |



Configuration du module A : Bone Level Tapered



Module A

041.761

Plateau pour clé à cliquet 041.766

Clé à
cliquet
046.119Dispositif
dynamo-
métrique
046.049Clé de désoli-
darisation
046.064


Plateau pour aide au retrait 041.767

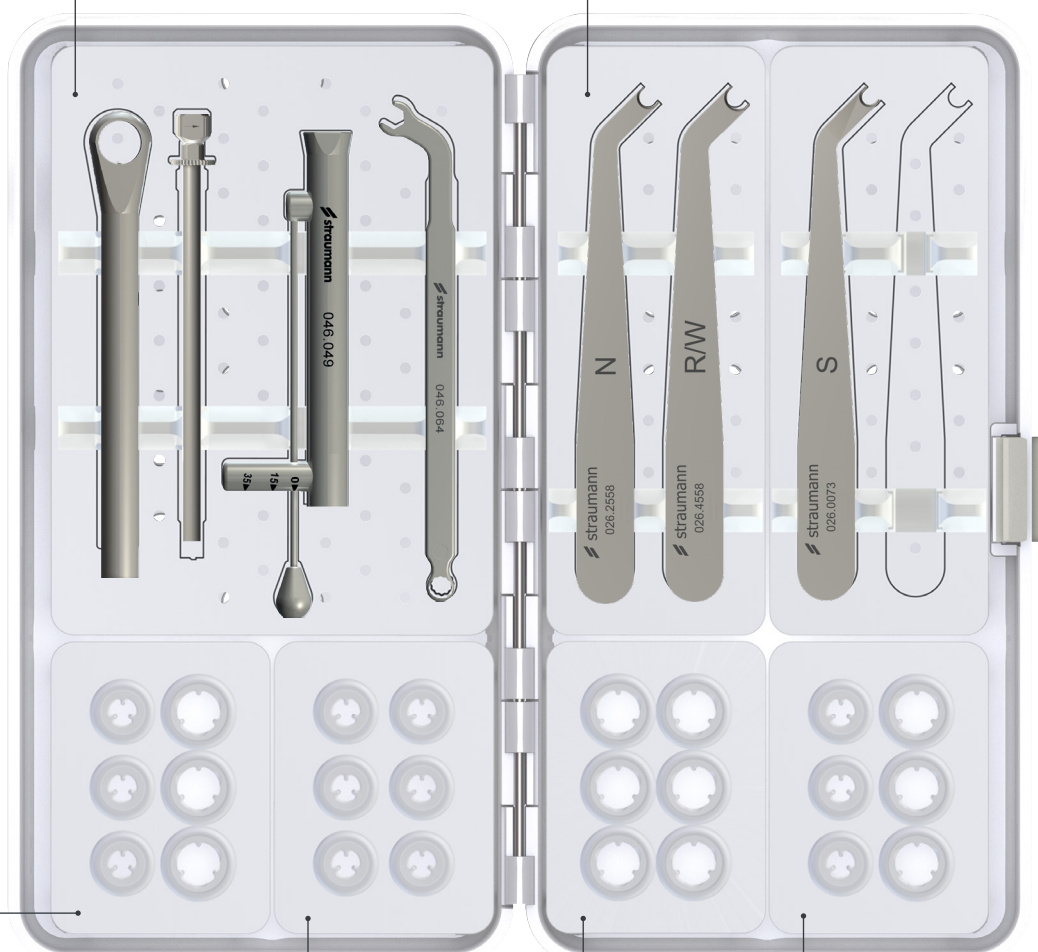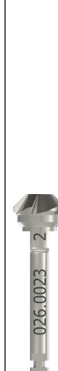Aide au retrait N
026.2558Aide au retrait R/W
026.4558Aide au retrait S*
026.0073SC Adaptateur*
pour clé à cliquet
025.0043Instrument 48h SC*
026.0072SCS Tournevis
pour clé à
cliquet
046.400
046.401
046.402SCS Tournevis
pour contre-angle
046.410
046.411
046.412BL Trépan osseux
026.0022
026.0023
026.0024Jeu de trépan
osseux pour os
Plateau à œillets 6 petits
041.762Instrument
48h
NC/RC
026.2048
026.4048Jeu de dispositifs
48h
Plateau à œillets
6 grands
041.763SC Profil osseux*
026.0070Adaptateur SC* pour
contre-angle
025.0042SCS Jeu de tournevis
Plateau à œillets, 3 petits + 3 grands
041.764SC Jeu d'auxiliaires*
Plateau à œillets, 3 petits + 3 grands
041.764



Configuration du module B : Bone Level Tapered



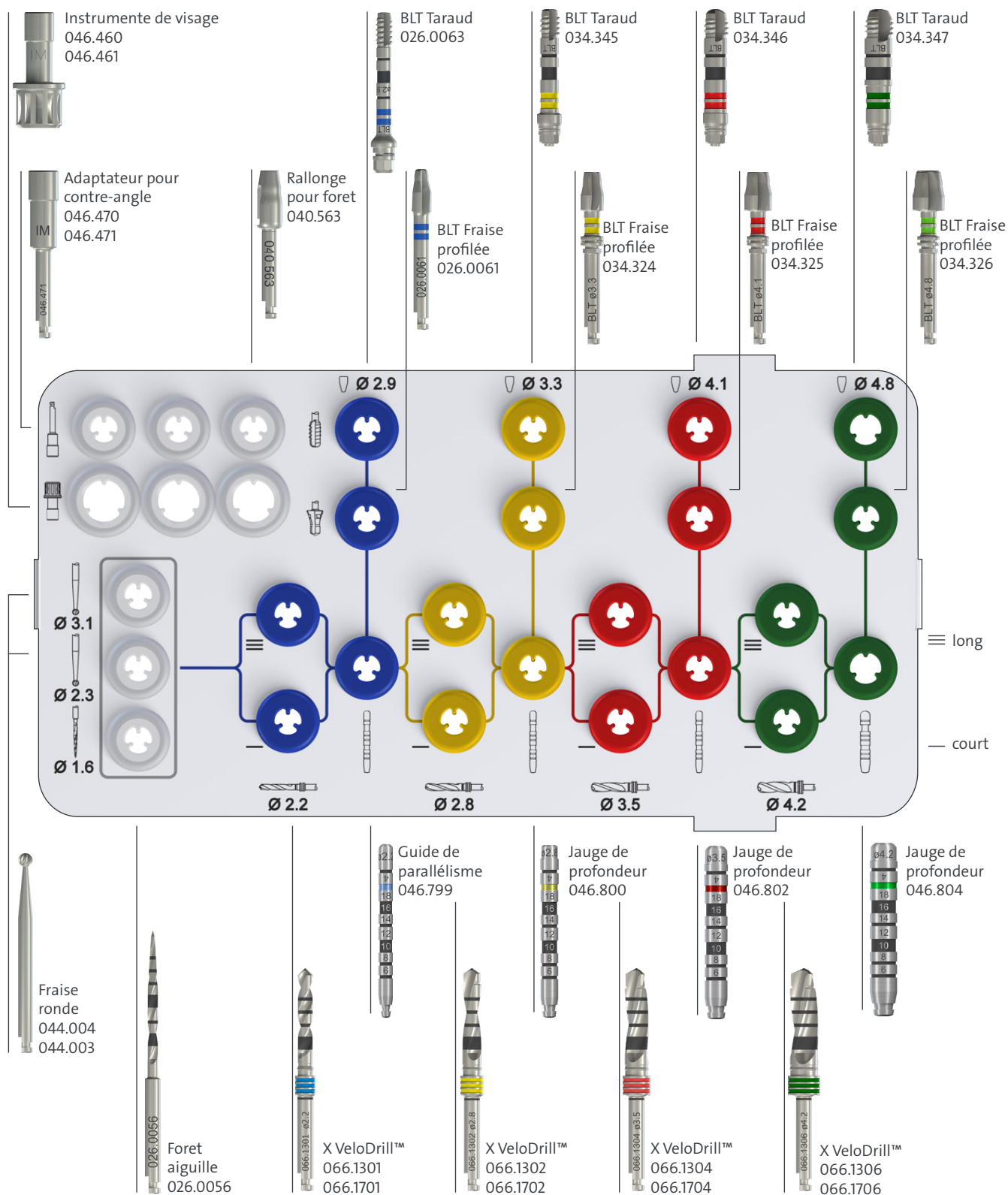

Plateau d'instruments de base
041.778



BLT Liste de commandes : Bone Level Tapered guidé

MODULE A – LISTE DE COMMANDES

| BLT Bone Level Tapered | | |
|------------------------|---|--|
| Réf. | Image | Produit |
| 041.761 |  | Straumann® Cassette modulaire, Module A |
| 041.763 |  | Plateau à œillets, 6 grands |
| 026.2048 |  | Instrument 48h NC, BLT |
| 026.4048 |  | Instrument 48h RC, BLT |
| 041.766 |  | Plateau pour clé à cliquet du module A |
| 046.119 |  | Clé à cliquet |
| 046.049 |  | Dispositif dynamométrique |
| 046.064 |  | Clé de désolidarisation |
| 041.767 |  | Plateau pour aide au retrait |
| 026.2558 |  | Aide au retrait N pour pièce de transfert Loxim® |
| 026.4558 |  | Aide au retrait R/W pour pièce de transfert Loxim® |
| 041.764 |  | Plateau à œillets, 3 petits + 3 grands |
| 046.400 |  | SCS Tournevis pour clé à cliquet, extra court |
| 046.401 |  | SCS Tournevis pour clé à cliquet, court |
| 046.402 |  | SCS Tournevis pour clé à cliquet, long |
| 046.410 |  | SCS Tournevis pour contre-angle, extra court |
| 046.411 |  | SCS Tournevis pour contre-angle, court |
| 046.412 |  | SCS Tournevis pour contre-angle, long |

| | | |
|----------|---|-----------------------------|
| 041.762 |  | Plateau à œillets, 6 petits |
| 026.0022 |  | BL Trépan osseux 1 |
| 026.0023 |  | BL Trépan osseux 2 |
| 026.0024 |  | BL Trépan osseux 3 |

Pour les instruments supplémentaires (auxiliaire de planification, brucelles, tournevis SA), veuillez vous référer à la page 4 *Liste complète du module A*.



Liste de commandes : Bone Level Tapered guidé

MODULE B – LISTE DE COMMANDES

| BLT Bone Level Tapered | | |
|------------------------|-------|--|
| Réf. | Image | Produit |
| 041.776 | | Straumann® Cassette modulaire, Module B, Base + Couverture |
| 041.781 | | Module B, plateau d'instruments de base guidés |
| 034.010 | | Emporte-pièce pour muqueuse, Ø 3,4 mm guidé |
| 034.011 | | Emporte-pièce pour muqueuse, Ø 4,0 mm guidé |
| 034.012 | | Emporte-pièce pour muqueuse, Ø 4,7 mm guidé |
| 034.215 | | Fraise plate Ø 2,8 mm |
| 034.415 | | Fraise plate Ø 3,5 mm |
| 034.615 | | Fraise plate Ø 4,2 mm |
| 066.1301 | | X VeloDrill™, court, Ø 2,2 mm |
| 066.1302 | | X VeloDrill™, court, Ø 2,8 mm |
| 066.1304 | | X VeloDrill™, court, Ø 3,5 mm |
| 066.1306 | | X VeloDrill™, court, Ø 4,2 mm |
| 066.1501 | | X VeloDrill™, moyen, Ø 2,2 mm |
| 066.1502 | | X VeloDrill™, moyen, Ø 2,8 mm |
| 066.1504 | | X VeloDrill™, moyen, Ø 3,5 mm |
| 066.1506 | | X VeloDrill™, moyen, Ø 4,2 mm |
| 066.1701 | | X VeloDrill™, long, Ø 2,2 mm |
| 066.1702 | | X VeloDrill™, long, Ø 2,8 mm |
| 066.1704 | | X VeloDrill™, long, Ø 3,5 mm |
| 066.1706 | | X VeloDrill™, long, Ø 4,2 mm |

| | | |
|----------|--|---|
| 034.354 | | Adaptateur guidé pour fraise profilée, FIBA, H2 |
| 034.355 | | Adaptateur guidé pour fraise profilée, FIBA, H4 |
| 034.356 | | Adaptateur guidé pour fraise profilée, FIBA, H6 |
| 034.357 | | Adaptateur guidé pour taraud, H2 |
| 034.358 | | Adaptateur guidé pour taraud, H4 |
| 034.359 | | Adaptateur guidé pour taraud, H6 |
| 034.324 | | BLT Fraise profilée, courte, Ø 3,3 mm, compatible avec FIBA |
| 034.325 | | BLT Fraise profilée, courte, Ø 4,1 mm, compatible avec FIBA |
| 034.326 | | BLT Fraise profilée, courte, Ø 4,8 mm, compatible avec FIBA |
| 034.345 | | BLT Taraud, court, Ø 3,3 mm, compatible avec FIBA |
| 034.346 | | BLT Taraud, court, Ø 4,1 mm, compatible avec FIBA |
| 034.347 | | BLT Taraud, court, Ø 4,8 mm, compatible avec FIBA |
| 046.799 | | Guide de parallélisme, Ø 2,2 mm |
| 046.800 | | Jauge de profondeur, Ø 2,8 mm |
| 046.802 | | Jauge de profondeur, Ø 3,5 mm |
| 046.804 | | Jauge de profondeur, Ø 4,2 mm |
| 026.0083 | | BL/BLT Adaptateur guidé, pour contre-angle |
| 026.0084 | | BL/BLT Adaptateur guidé, pour clé à cliquet |



Liste de commandes : Bone Level Tapered guidé


MODULE C – LISTE DE COMMANDES

| TLX/BLX Guidé | | |
|---------------|-------|---|
| Réf. | Image | Produit |
| 041.772 | | Straumann® Cassette modulaire, Module C, Guided Surgery |
| 026.0147 | | Poignée de perçage, Ø 2,2 mm, 1 mm/3 mm |
| 026.0148 | | Poignée de perçage, Ø 2,8 mm, 1 mm/3 mm |
| 026.0150 | | Poignée de perçage, Ø 3,5 mm, 1 mm/3 mm |
| 026.0152 | | Poignée de perçage, Ø 4,2 mm, 1 mm/3 mm |
| 034.284 | | Foret pour pivot de fixation pour gabarit, Ø 1,3 mm |
| 034.282 | | Pivot de fixation pour gabarit, Ø 1,3 mm |
| 034.298 | | Pivot de fixation pour gabarit, Ø 2,8/2,8 mm |
| 034.285 | | Pivot de fixation pour gabarit, Ø 5/2,8 mm |
| 034.287 | | Pivot de fixation pour gabarit, Ø 5/3,5 mm |
| 034.289 | | Pivot de fixation pour gabarit, Ø 5/4,2 mm |



Configuration du module A : Bone Level Tapered guidé


Module A
041.761

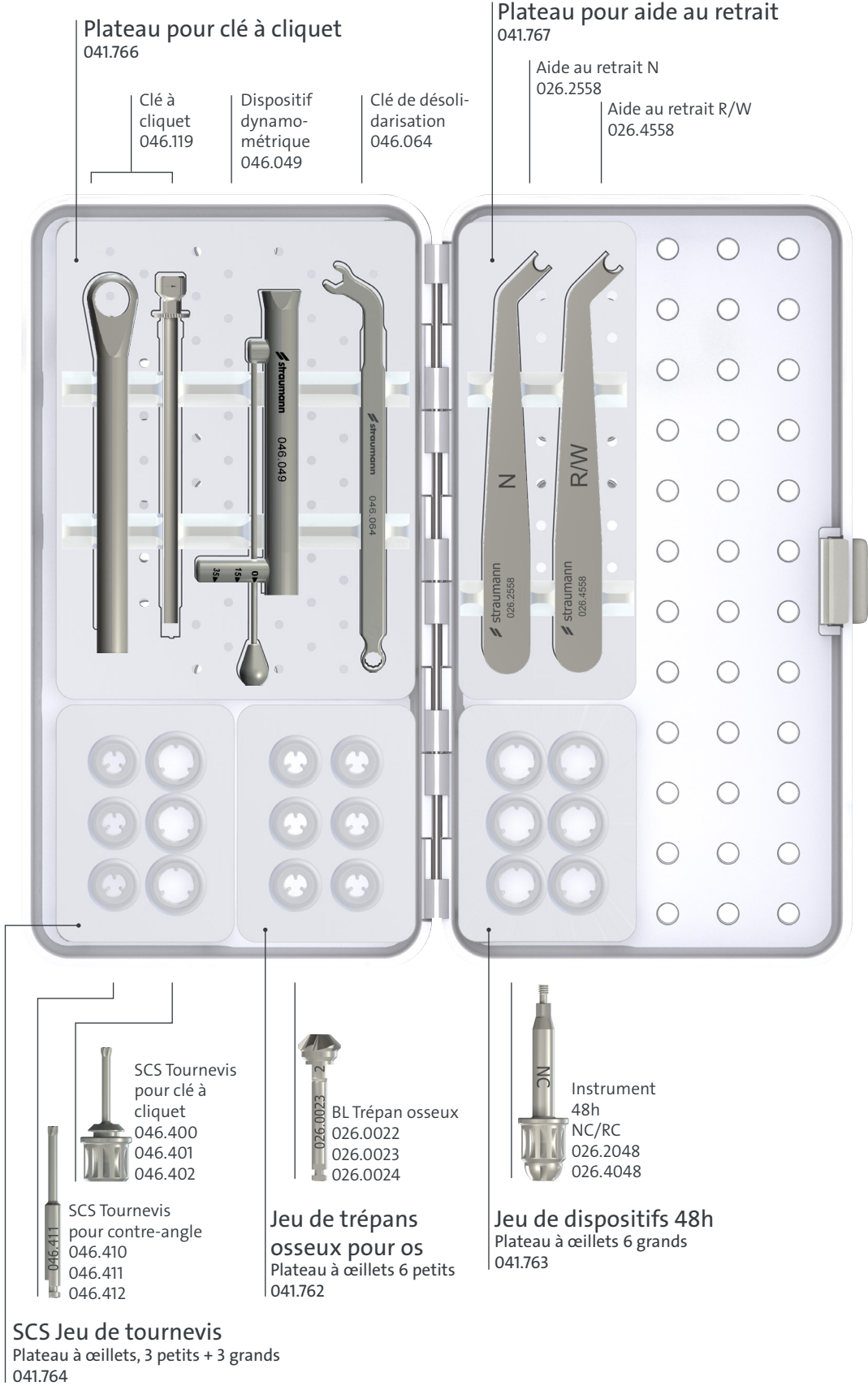



Configuration du module B : Bone Level Tapered guidé


Plateau d'instruments de base guidés
041.781

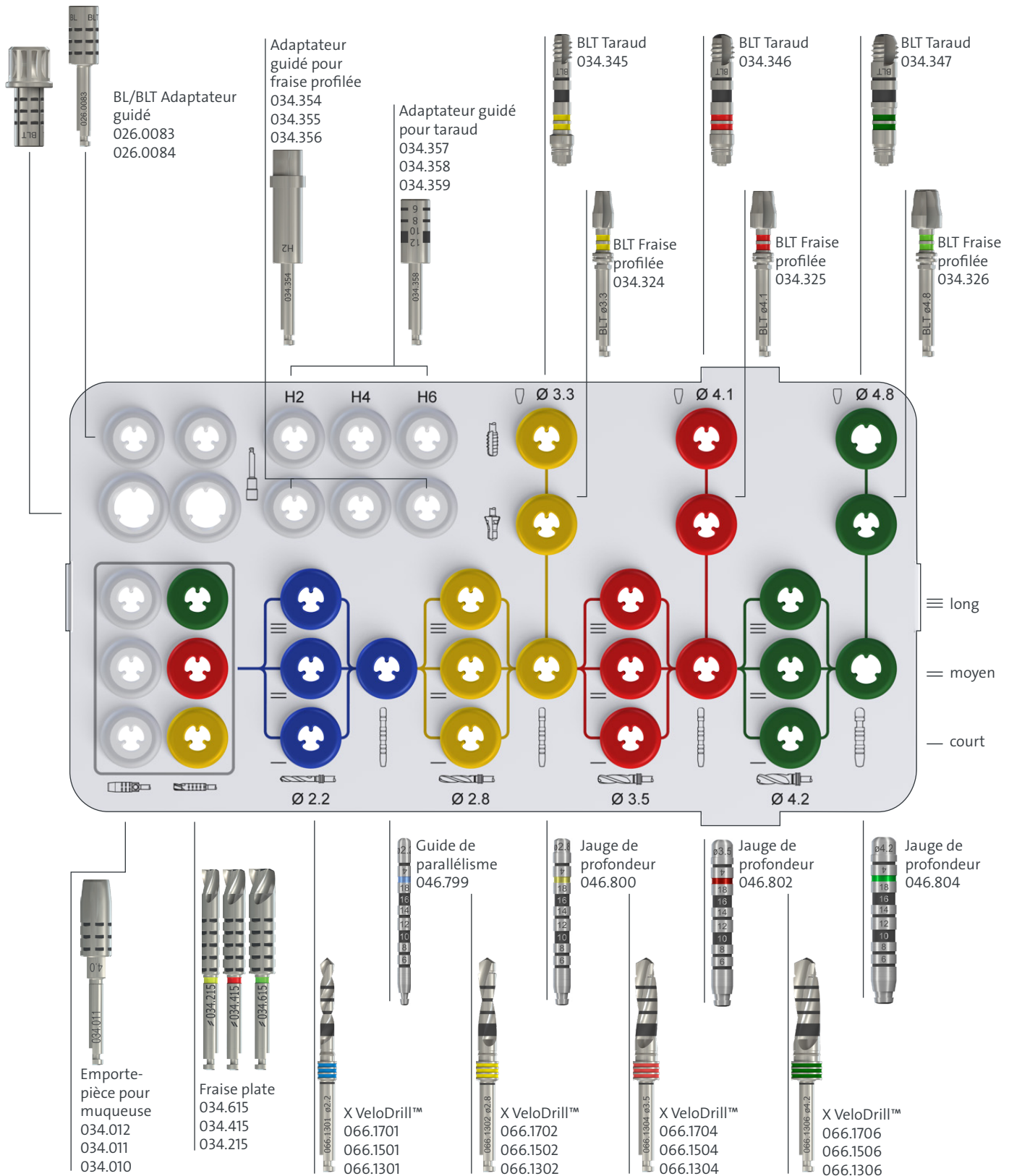



Configuration du module C : Bone Level Tapered guidé

Module C Guided Surgery
041.772

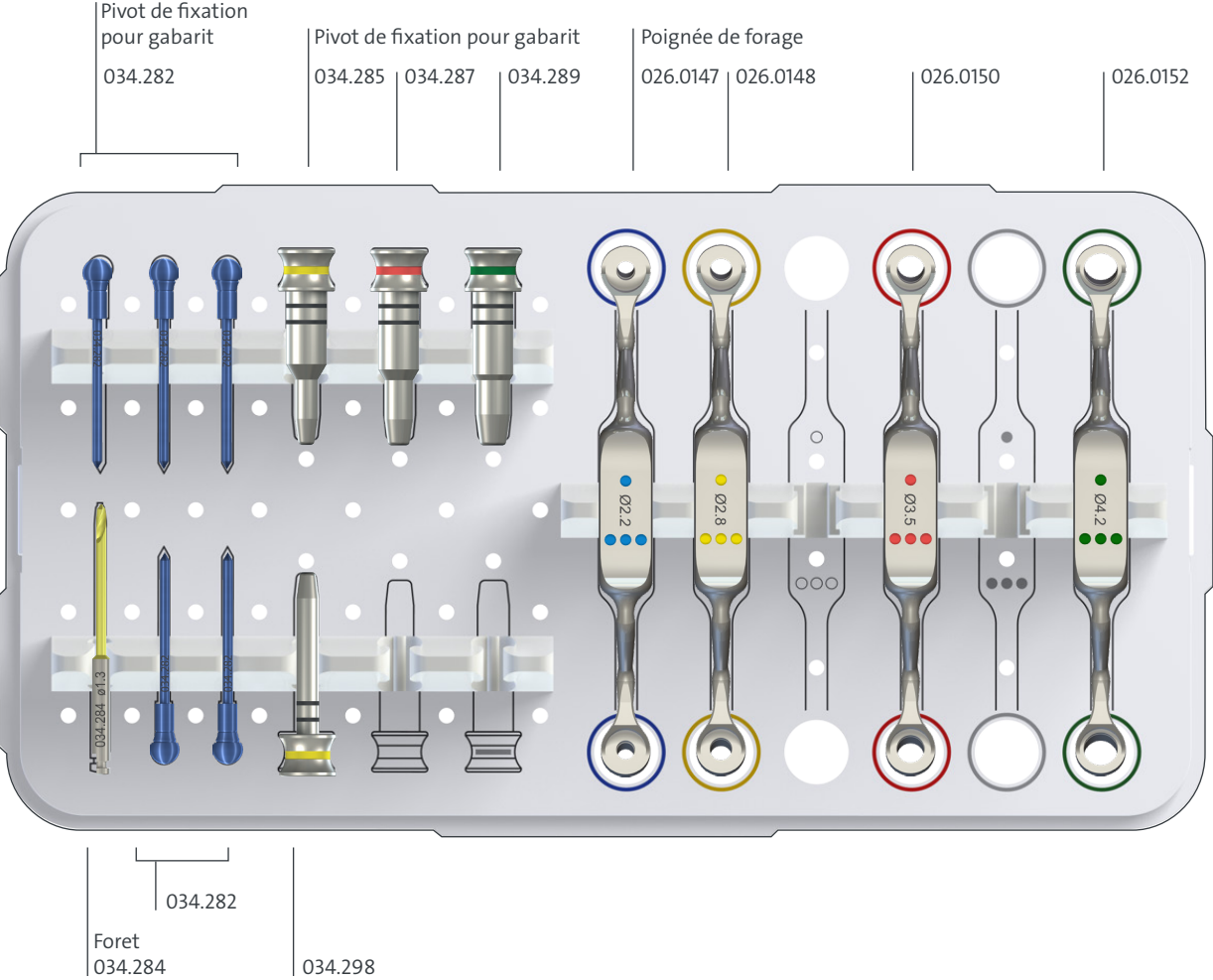



Liste de commandes : Straumann® iEXCEL (BLX, TLX; BLC, TLC)

MODULE A – LISTE DE COMMANDES

| BLC/TLC | | |
|----------|-------|---|
| Réf. | Image | Produit |
| 041.761 | | Straumann® Cassette modulaire, Module A |
| 041.766 | | Plateau pour clé à cliquet du module A |
| 046.119 | | Clé à cliquet |
| 066.1100 | | Dispositif dynamométrique |
| 046.064 | | Clé de désolidarisation |
| 041.764 | | Plateau à œillets, 3 petits + 3 grands |
| 046.400 | | SCS Tournevis pour clé à cliquet, extra court |
| 046.401 | | SCS Tournevis pour clé à cliquet, court |
| 046.402 | | SCS Tournevis pour clé à cliquet, long |
| 046.410 | | SCS Tournevis pour contre-angle, extra court |
| 046.411 | | SCS Tournevis pour contre-angle, court |
| 046.412 | | SCS Tournevis pour contre-angle, long |
| 041.771 | | Plateau pour jauge de profondeur d'implant |
| 066.2000 | | Jauge de profondeur de l'implant |
| 041.762 | | Plateau à œillets, 6 petits |

| | | |
|----------|--|---|
| 026.0022 | | BL Trépan osseux 1 |
| 026.0023 | | BL Trépan osseux 2 |
| 026.0024 | | BL Trépan osseux 3 |
| 044.304 | | Trépans osseux RN/RT |
| 044.305 | | Trépans osseux WN/WT |
| 041.762 | | Module A, plateau à œillets, 6 petits |
| 036.3300 | | RT Fraise profilée, courte, pour implants Ø 3,75/Ø 4,8 mm |
| 036.3301 | | RT Fraise profilée, longue, pour implants Ø 3,75/Ø 4,8 mm |
| 036.3302 | | WT Fraise profilée, courte, pour implants Ø 5,5/Ø 6,5 mm |
| 036.3303 | | WT Fraise profilée, longue, pour implants Ø 5,5/Ø 6,5 mm |

Pour les instruments supplémentaires, brucelles, tournevis SA, veuillez vous référer à la page 4 *Liste complète du module A.*

MODULE B – LISTE DE COMMANDES

| TLX/BLX | | |
|----------|-------|--|
| Réf. | Image | Produit |
| 041.776 | | Straumann® Cassette modulaire, Module B, Base + Couvercle |
| 041.787 | | Module B, Plateau TorcFit™ BLC, TLC, BLX, TLX |
| 044.003 | | Fraise boule, Ø 2,3 mm |
| 044.004 | | Fraise boule, Ø 3,1 mm |
| 026.0056 | | Foret-aiguille, long, Ø 1,6 mm |
| 066.1501 | | X VeloDrill™, moyen, Ø 2,2 mm |
| 066.1502 | | X VeloDrill™, moyen, Ø 2,8 mm |
| 066.1503 | | X VeloDrill™, moyen, Ø 3,2 mm |
| 066.1504 | | X VeloDrill™, moyen, Ø 3,5 mm |
| 066.1505 | | X VeloDrill™, moyen, Ø 3,7 mm |
| 066.1506 | | X VeloDrill™, moyen, Ø 4,2 mm |
| 066.1507 | | X VeloDrill™, moyen, Ø 4,7 mm |
| 066.1508 | | X VeloDrill™, moyen, Ø 5,2 mm |
| 066.1509 | | X VeloDrill™, moyen, Ø 6,2 mm |
| 034.362 | | BLC/TLC Fraise profilée, courte, Ø 3,3 mm, compatible avec FIBA |
| 034.363 | | BLC/TLC Fraise profilée, courte, Ø 3,75 mm, compatible avec FIBA |
| 034.365 | | BLC/TLC Fraise profilée, courte, Ø 4,5 mm, compatible avec FIBA |
| 034.366 | | BLC/TLC Fraise profilée, courte, Ø 5,5 mm, compatible avec FIBA |
| 034.367 | | BLC/TLC Fraise profilée, courte, Ø 6,5 mm, compatible avec FIBA |

| | | |
|----------|--|---|
| 046.799 | | Guide de parallélisme, Ø 2,2 mm |
| 046.800 | | Jauge de profondeur, Ø 2,8 mm |
| 046.801 | | Jauge de profondeur, Ø 3,2 mm |
| 046.802 | | Jauge de profondeur, Ø 3,5 mm |
| 046.803 | | Jauge de profondeur, Ø 3,7 mm |
| 046.804 | | Jauge de profondeur, Ø 4,2 mm |
| 046.805 | | Jauge de profondeur, Ø 4,7 mm |
| 046.806 | | Jauge de profondeur, Ø 5,2 mm |
| 046.807 | | Jauge de profondeur, Ø 6,2 mm |
| 066.4201 | | Instrument de vissage d'implant pour clé à cliquet, court |
| 066.4207 | | Instrument de vissage d'implant pour clé à cliquet, moyen |
| 066.4202 | | Instrument de vissage d'implant pour clé à cliquet, long |
| 066.4101 | | Instrument de vissage d'implant pour contre-angle, court |
| 066.4107 | | Instrument de vissage d'implant pour contre-angle, moyen |
| 066.4102 | | Instrument de vissage d'implant pour contre-angle, long |
| 040.563 | | Rallonge pour foret* |
| 046.401 | | SCS Tournevis pour clé à cliquet, court |
| 046.411 | | SCS Tournevis pour contre-angle, court |

Remarque : les Velodrills™ existent également en versions courte (pour des implants de 4 à 12 mm) et longue (pour des implants de 4 à 18 mm). Selon la longueur typique de l'implant placé, le plateau peut être configuré avec la longueur Velodrill™ souhaitée.

*La rallonge pour foret peut être utilisée pour rallonger le foret de 14.5 mm.



Configuration du module A : Straumann® iEXCEL (BLX, TLX; BLC, TLC)

Module A
041.761

Plateau pour clé à cliquet
041.766


Clé à
cliquet
046.119

Dispositif
dynamo-
métrique
066.1100

Clé de désol-
idarisation
046.064

Plateau pour jauge de profondeur d'implant
041.771

Jauge de profondeur de l'implant
066.2000

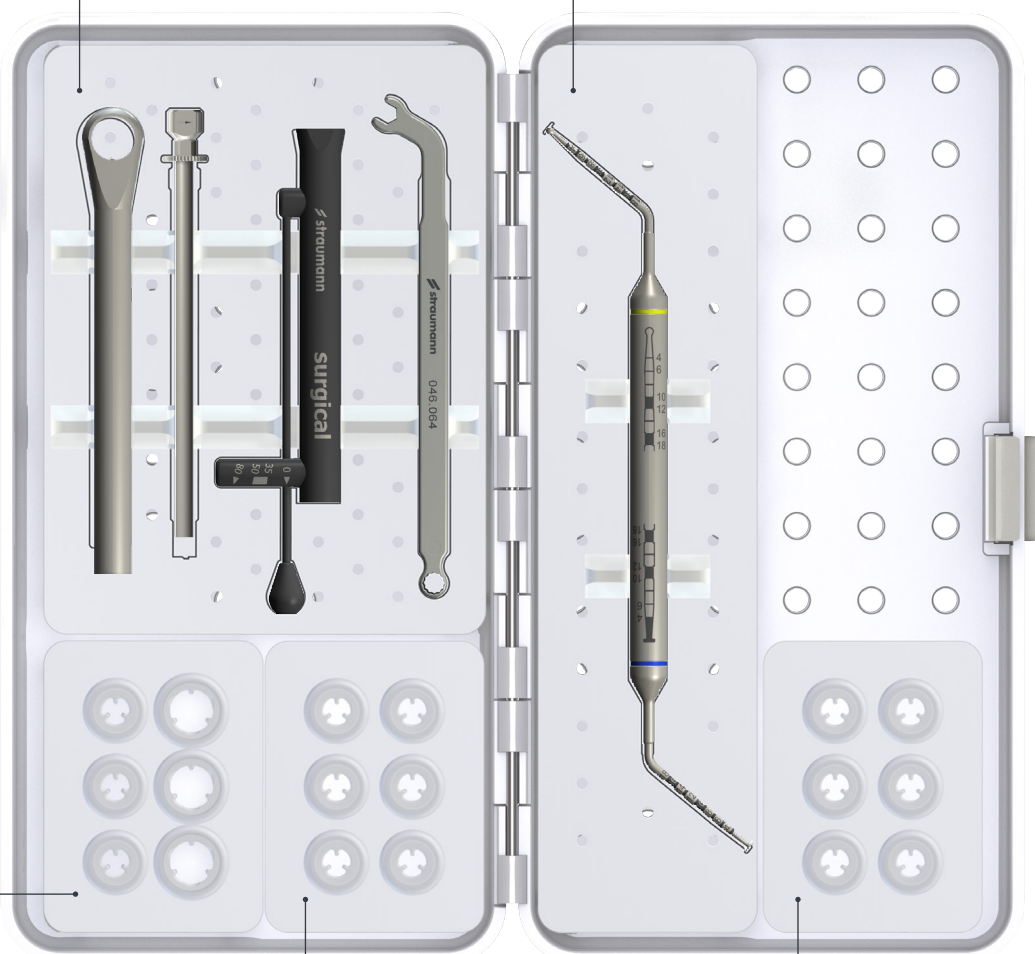

SCS Tournevis
pour clé à
cliquet
046.400
046.401
046.402

SCS Tournevis pour
contre-angle
046.410
046.411
046.412

Trépan osseux
026.0022
026.0023
026.0024
044.304
044.305

Jeu de trépan osseux pour os
Plateau à œillets 6 petits
041.762

Fraise profilée
036.3300
036.3301
036.3302
036.3303

RT/WT Jeu de fraises profilées
Plateau à œillets, 6 petits
041.762

Remarque : uniquement
pour TLC/TLX avec pose
enfouie.

SCS Jeu de tournevis
Plateau à œillets, 3 petits + 3 grands
041.764



Configuration du module B : Straumann® iEXCEL (BLX, TLX; BLC, TLC)

Module B, plateau TorcFit™ BLC, TLC, BLX, TLX
041.787

BLC/TLC Fraises profilées

Fraise profilée 034.362 Fraise profilée 034.363 Fraise profilée 034.365 Fraise profilée 034.366 Fraise profilée 034.367

Guide de parallélisme et jauge de profondeur

Guide de parallélisme 046.799 Jauge de profondeur 046.800 Jauge de profondeur 046.801 Jauge de profondeur 046.802 Jauge de profondeur 046.803 Jauge de profondeur 046.804 Jauge de profondeur 046.805 Jauge de profondeur 046.806 Jauge de profondeur 046.807

Pièces de rechange (facultatif)

SCS Tournevis 046.401 Rallonge pour foret 040.563 SCS Tournevis pour contre-angle 046.411

Instrument de vissage d'implant pour clé à cliquet
066.4201
066.4207
066.4202

Instrument de vissage d'implant pour contre-angle
066.4101
066.4107
066.4102

BLC - TLC - BLX - TLX

Pièces de rechange

Fraises profilées

Code QR

Guide de parallélisme/ Jauges de profondeur

VeloDrills™

Illustration des repères de profondeur de forage

Ø 2.2 Ø 2.8 Ø 3.2 Ø 3.5 Ø 3.7 Ø 4.2 Ø 4.7 Ø 5.2 Ø 6.2

4 6 10 12 16 18

Fraise ronde
044.003
044.004

Foret aiguille
026.0056

Forets aiguilles et fraises rondes

VeloDrills™

066.1702
066.1502
066.1302

066.1704
066.1504
066.1304

066.1706
066.1506
066.1306

066.1508
066.1308

066.1701
066.1501
066.1301

066.1703
066.1503
066.1303

066.1705
066.1505
066.1305

066.1507
066.1307

066.1509
066.1309

Choisissez une longueur de foret parmi les versions courte, moyenne ou longue, selon la longueur de l'implant utilisé.



Liste de commandes : BLC, TLC

Pour des implants de jusqu'à 4,5 mm

MODULE B – LISTE DE COMMANDES

| BLC/TLC | | |
|----------|-------|--|
| Réf. | Image | Produit |
| 041.776 | | Straumann® Cassette modulaire, Module B, Base + Couvercle |
| 041.785 | | Module B, Plateau TorcFit™ BLC, TLC |
| 044.003 | | Fraise boule, Ø 2,3 mm |
| 044.004 | | Fraise boule, Ø 3,1 mm |
| 026.0056 | | Foret-aiguille, long, Ø 1,6 mm |
| 066.1501 | | X VeloDrill™, moyen, Ø 2,2 mm |
| 066.1502 | | X VeloDrill™, moyen, Ø 2,8 mm |
| 066.1503 | | X VeloDrill™, moyen, Ø 3,2 mm |
| 066.1504 | | X VeloDrill™, moyen, Ø 3,5 mm |
| 066.1505 | | X VeloDrill™, moyen, Ø 3,7 mm |
| 066.1506 | | X VeloDrill™, moyen, Ø 4,2 mm |
| 034.362 | | BLC/TLC Fraise profilée, courte, Ø 3,3 mm, compatible avec FIBA |
| 034.363 | | BLC/TLC Fraise profilée, courte, Ø 3,75 mm, compatible avec FIBA |
| 034.365 | | BLC/TLC Fraise profilée, courte, Ø 4,5 mm, compatible avec FIBA |

| | | |
|----------|--|---|
| 046.799 | | Guide de parallélisme, Ø 2,2 mm |
| 046.800 | | Jauge de profondeur, Ø 2,8 mm |
| 046.801 | | Jauge de profondeur, Ø 3,2 mm |
| 046.802 | | Jauge de profondeur, Ø 3,5 mm |
| 046.803 | | Jauge de profondeur, Ø 3,7 mm |
| 046.804 | | Jauge de profondeur, Ø 4,2 mm |
| 066.4207 | | Instrument de vissage d'implant pour clé à cliquet, moyen |
| 066.4102 | | Instrument de vissage d'implant pour contre-angle, long |
| 046.401 | | SCS Tournevis pour clé à cliquet, court |
| 040.563 | | Rallonge pour foret* |

Remarque : les Velodrills™ existent également en versions courte (pour des implants de 4 à 12 mm) et longue (pour des implants de 4 à 18 mm). Selon la longueur typique de l'implant placé, le plateau peut être configuré avec la longueur Velodrill™ souhaitée.

*La rallonge pour foret peut être utilisée pour rallonger le foret de 14.5 mm.



Configuration du module B : BLC, TLC

Module B, plateau TorcFit™ BLC, TLC
041.785

Fraise
profilée
034.362

Fraise
profilée
034.363

Fraise
profilée
034.365

Instrument de
vissage d'im-
plant pour clé à
cliquet
066.4207

Instrument
de vissage
d'implant pour
contre-angle
066.4102



Guide de
parallélisme
046.799



Jauge de
profondeur
046.800



Jauge de
profondeur
046.801



Jauge de
profondeur
046.802



Jauge de
profondeur
046.803



Jauge de
profondeur
046.804



SCS Tournevis
046.401





Rallonge pour
foret
040.563

Pièces
de rechange

Fraises profilées

Guide de paral-
lélisme/jauges de
profondeur

VeloDrills™

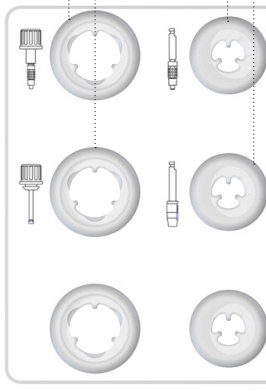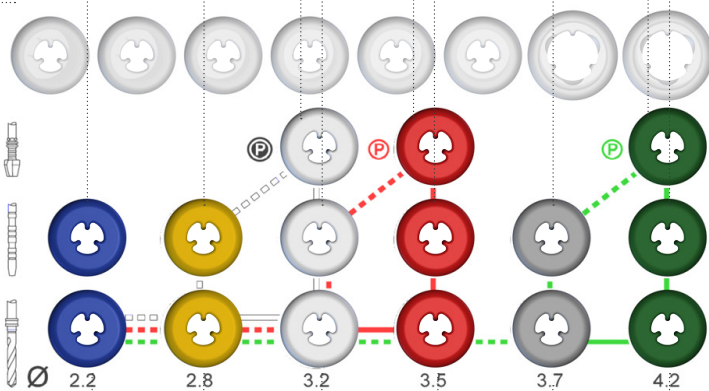

BLC / TLC

| | ▽ Ø3.3 | ▽ Ø3.75 | ▽ Ø4.5 |
|--------|---------|---------|---------|
| soft | ● | ● | ○ |
| medium | ● + (P) | ○ + (P) | ● + (P) |
| hard | ○ + (P) | ● + (P) | ● + (P) |

4 6 10 12 16 18

Code QR

Illustration des
repères de profon-
deur de forage

Protocole de fraisage



Foret
aiguille
026.0056



Fraise
ronde
044.003
044.004



X VeloDrill™
066.1501



X VeloDrill™
066.1502



X VeloDrill™
066.1503



X VeloDrill™
066.1504



X VeloDrill™
066.1505



X VeloDrill™
066.1506



Liste de commandes : Straumann® iEXCEL (BLX, TLX; BLC, TLC) guidé

MODULE A – LISTE DE COMMANDES

| BLC/TLC/TLX/BLX Guidé | | |
|-----------------------|-------|---|
| Réf. | Image | Produit |
| 041.761 | | Straumann® Cassette modulaire, Module A |
| 041.766 | | Plateau pour clé à cliquet du module A |
| 046.119 | | Clé à cliquet |
| 066.1100 | | Dispositif dynamométrique |
| 046.064 | | Clé de désolidarisation |
| 041.764 | | Plateau à œillets, 3 petits + 3 grands |
| 046.400 | | SCS Tournevis pour clé à cliquet, extra court |
| 046.401 | | SCS Tournevis pour clé à cliquet, court |
| 046.402 | | SCS Tournevis pour clé à cliquet, long |
| 046.410 | | SCS Tournevis pour contre-angle, extra court |
| 046.411 | | SCS Tournevis pour contre-angle, court |
| 046.412 | | SCS Tournevis pour contre-angle, long |
| 041.771 | | Plateau pour jauge de profondeur d'implant |
| 066.2000 | | Jauge de profondeur de l'implant |
| 041.762 | | Plateau à œillets, 6 petits |
| 026.0022 | | BL Trépan osseux 1 |
| 026.0023 | | BL Trépan osseux 2 |
| 026.0024 | | BL Trépan osseux 3 |
| 044.304 | | Trépans osseux RN/RT |
| 044.305 | | Trépans osseux WN/WT |
| 041.762 | | Module A, plateau à œillets, 6 petits |

| | | |
|----------|--|---|
| 036.3300 | | RT Fraise profilée, courte, pour implants Ø 3,75/Ø 4,8 mm |
| 036.3301 | | RT Fraise profilée, longue, pour implants Ø 3,75/Ø 4,8 mm |
| 036.3302 | | WT Fraise profilée, courte, pour implants Ø 5,5/Ø 6,5 mm |
| 036.3303 | | WT Fraise profilée, longue, pour implants Ø 5,5/Ø 6,5 mm |

Pour les instruments supplémentaires, brucelles, tournevis SA, se référer à la page 4 *Liste complète du module A*.

MODULE B – LISTE DE COMMANDES

| BLC/TLC/TLX/BLX Guidé | | |
|-----------------------|-------|---|
| Réf. | Image | Produit |
| 041.776 | | Straumann® Cassette modulaire, Module B, Base + Couvercle |
| 041.788 | | Module B plateau TorcFit™ BLC, TLC, BLX, TLX |
| 034.010 | | Emporte-pièce pour muqueuse, Ø 3,4 mm guidé |
| 034.011 | | Emporte-pièce pour muqueuse, Ø 4,0 mm guidé |
| 034.012 | | Emporte-pièce pour muqueuse, Ø 4,7 mm guidé |
| 034.215 | | Fraise plate Ø 2,8 mm |
| 034.415 | | Fraise plate Ø 3,5 mm |
| 034.615 | | Fraise plate Ø 4,2 mm |
| 066.1301 | | X VeloDrill™, court, Ø 2,2 mm |
| 066.1302 | | X VeloDrill™, court, Ø 2,8 mm |
| 066.1303 | | X VeloDrill™, court, Ø 3,2 mm |
| 066.1304 | | X VeloDrill™, court, Ø 3,5 mm |
| 066.1305 | | X VeloDrill™, court, Ø 3,7 mm |
| 066.1306 | | X VeloDrill™, court, Ø 4,2 mm |
| 066.1307 | | X VeloDrill™, court, Ø 4,7 mm |
| 066.1308 | | X VeloDrill™, court, Ø 5,2 mm |
| 066.1309 | | X VeloDrill™, court, Ø 6,2 mm |



Liste de commandes : Straumann® iEXCEL (BLX, TLX; BLC, TLC) guidé


| | | |
|----------|--|--|
| 066.1501 | | X VeloDrill™, moyen, Ø 2,2 mm |
| 066.1502 | | X VeloDrill™, moyen, Ø 2,8 mm |
| 066.1503 | | X VeloDrill™, moyen, Ø 3,2 mm |
| 066.1504 | | X VeloDrill™, moyen, Ø 3,5 mm |
| 066.1505 | | X VeloDrill™, moyen, Ø 3,7 mm |
| 066.1506 | | X VeloDrill™, moyen, Ø 4,2 mm |
| 066.1507 | | X VeloDrill™, moyen, Ø 4,7 mm |
| 066.1508 | | X VeloDrill™, moyen, Ø 5,2 mm |
| 066.1509 | | X VeloDrill™, moyen, Ø 6,2 mm |
| 066.1701 | | X VeloDrill™, long, Ø 2,2 mm |
| 066.1702 | | X VeloDrill™, long, Ø 2,8 mm |
| 066.1703 | | X VeloDrill™, long, Ø 3,2 mm |
| 066.1704 | | X VeloDrill™, long, Ø 3,5 mm |
| 066.1705 | | X VeloDrill™, long, Ø 3,7 mm |
| 066.1706 | | X VeloDrill™, long, Ø 4,2 mm |
| 066.1707 | | X VeloDrill™, long, Ø 4,7 mm |
| 034.362 | | BLC/TLC Fraise profilée, courte, Ø 3,3 mm, compatible avec FIBA |
| 034.363 | | BLC/TLC Fraise profilée, courte, Ø 3,75 mm, compatible avec FIBA |
| 034.365 | | BLC/TLC Fraise profilée, courte, Ø 4,5 mm, compatible avec FIBA |
| 034.366 | | BLC/TLC Fraise profilée, courte, Ø 5,5 mm, compatible avec FIBA |
| 034.367 | | BLC/TLC Fraise profilée, courte, Ø 6,5 mm, compatible avec FIBA |
| 046.799 | | Guide de parallélisme, Ø 2,2 mm |
| 046.800 | | Jauge de profondeur, Ø 2,8 mm |
| 046.801 | | Jauge de profondeur, Ø 3,2 mm |
| 046.802 | | Jauge de profondeur, Ø 3,5 mm |
| 046.803 | | Jauge de profondeur, Ø 3,7 mm |
| 046.804 | | Jauge de profondeur, Ø 4,2 mm |
| 046.805 | | Jauge de profondeur, Ø 4,7 mm |
| 046.806 | | Jauge de profondeur, Ø 5,2 mm |
| 046.807 | | Jauge de profondeur, Ø 6,2 mm |

| | | |
|----------|--|--|
| 066.4404 | | BLC/BLX Instrument de vissage d'implant guidé pour clé à cliquet |
| 066.4403 | | BLC/BLX Instrument de vissage d'implant guidé pour contre-angle |
| 037.3000 | | TLC/TLX Instrument de vissage d'implant guidé pour clé à cliquet, S |
| 037.3001 | | TLC/TLX Instrument de vissage d'implant guidé pour contre-angle, S |
| 037.3002 | | TLC/TLX Instrument de vissage d'implant guidé pour clé à cliquet, SP |
| 037.3003 | | TLC/TLX Instrument de vissage d'implant guidé pour contre-angle, SP |

MODULE C – LISTE DE COMMANDES

| BLC/TLC/TLX/BLX Guidé | | |
|-----------------------|-------|---|
| Réf. | Image | Produit |
| 041.772 | | Straumann® Cassette modulaire, Module C, Guided Surgery |
| 026.0147 | | Poignée de perçage, Ø 2,2 mm, 1 mm/3 mm* |
| 026.0148 | | Poignée de perçage, Ø 2,8 mm, 1 mm/3 mm* |
| 026.0149 | | Poignée de perçage, Ø 3,2 mm, 1 mm/3 mm* |
| 026.0150 | | Poignée de perçage, Ø 3,5 mm, 1 mm/3 mm* |
| 026.0151 | | Poignée de perçage, Ø 3,7 mm, 1 mm/3 mm* |
| 026.0152 | | Poignée de perçage, Ø 4,2 mm, 1 mm/3 mm* |
| 034.284 | | Foret pour pivot de fixation pour gabarit, Ø 1,3 mm |
| 034.282 | | Pivot de fixation pour gabarit, Ø 1,3 mm |
| 034.298 | | Pivot de fixation pour gabarit, Ø 2,8/2,8 mm |
| 034.285 | | Pivot de fixation pour gabarit, Ø 5/2,8 mm |
| 034.286 | | Pivot de fixation pour gabarit, Ø 5/3,2 mm |
| 034.287 | | Pivot de fixation pour gabarit, Ø 5/3,5 mm |
| 034.288 | | Pivot de fixation pour gabarit, Ø 5/3,7 mm |
| 034.289 | | Pivot de fixation pour gabarit, Ø 5/4,2 mm |

*Poignée de perçage compatible avec des douilles métalliques. Pour une utilisation avec des douilles en PEEK, utilisez les poignées autobloquantes avec les références 034.291 - 034.296.

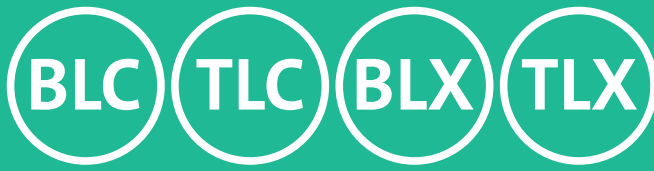

Configuration du module A : Straumann® iEXCEL (BLX, TLX; BLC, TLC) guidé

Module A
041.761

Plateau pour clé à cliquet
041.766


Clé à
cliquet
046.119

Dispositif
dynamo-
métrique
066.1100

Clé de désol-
idarisation
046.064

Plateau pour jauge de profondeur d'implant
041.771

Jauge de profondeur de l'implant
066.2000

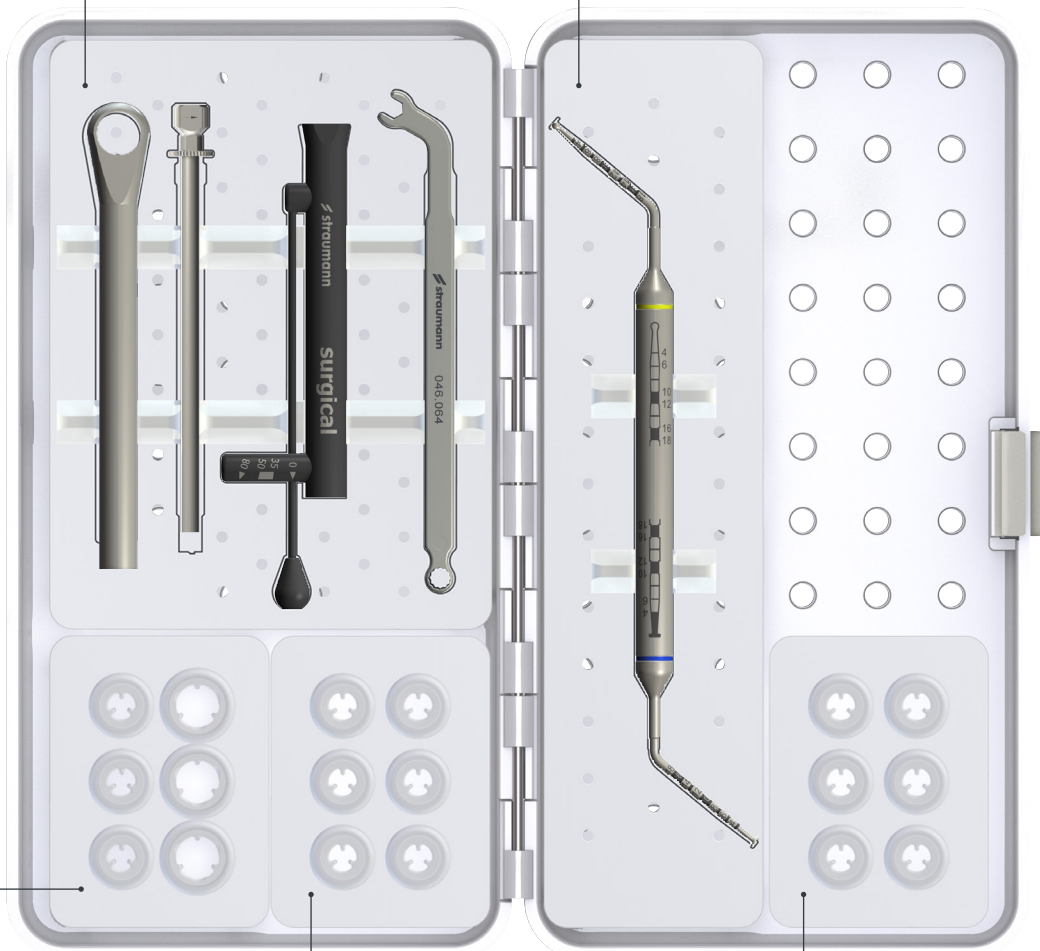

SCS Tournevis
pour clé à
cliquet
046.400
046.401
046.402

SCS Tournevis pour
contre-angle
046.410
046.411
046.412

Trépan osseux
026.0022
026.0023
026.0024
044.304
044.305


Jeu de trépan osseux pour os
Plateau à œillets 6 petits
041.762

Fraise profilée
036.3300
036.3301
036.3302
036.3303

RT/WT Jeu de fraises profilées
Plateau à œillets, 6 petits
041.762

Remarque : uniquement
pour TLC/TLX avec pose
enfouie.

SCS Jeu de tournevis
Plateau à œillets, 3 petits + 3 grands
041.764

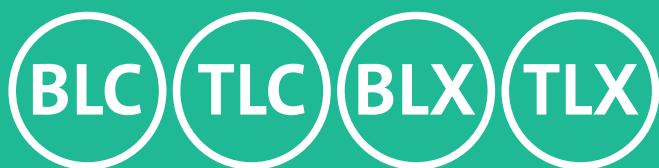

Configuration du module B : Straumann® iEXCEL (BLX, TLX; BLC, TLC) guidé

Module B, plateau TorcFit™ BLC, TLC, BLX, TLX, guidé
041.788

Instrument de vissage d'implant guidé



Pour clé à
cliquet :
BLC/BLX,
066.4404
TLC/TLX S,
037.3000
TLC/TLX SP,
037.3002



Pour contre-
angle : BLC/BLX,
066.4403
TLC/TLX S,
037.3001
TLC/TLX SP,
037.3003

BLC/TLC Fraises profilées



Fraise
profilée
034.362



Fraise
profilée
034.363



Fraise
profilée
034.365



Fraise
profilée
034.366



Fraise
profilée
034.367

straumann BLC - TLC - BLX - TLX

Code QR

Illustration des repères de profondeur de forage

Fraises profilées

VeloDrills™


Adaptateur guidé pour fraises profilées BLC/TLC 034.354 034.355 034.356

Emporte-pièce pour muqueuse et fraises plates

034.012 034.011 034.010 034.615 034.415 034.215


066.1701 066.1501 066.1301 066.1702 066.1502 066.1302 066.1703 066.1503 066.1303 066.1704 066.1504 066.1304 066.1705 066.1505 066.1305 066.1706 066.1506 066.1306 066.1507 066.1307 066.1508 066.1308 066.1309 066.1509

VeloDrills™

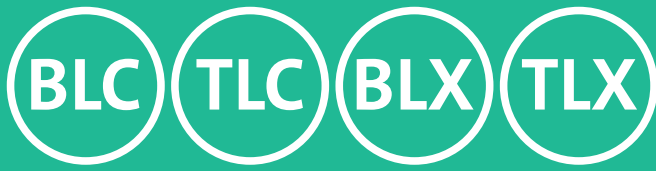




Configuration du module C : Straumann® iEXCEL (BLX, TLX; BLC, TLC) guidé

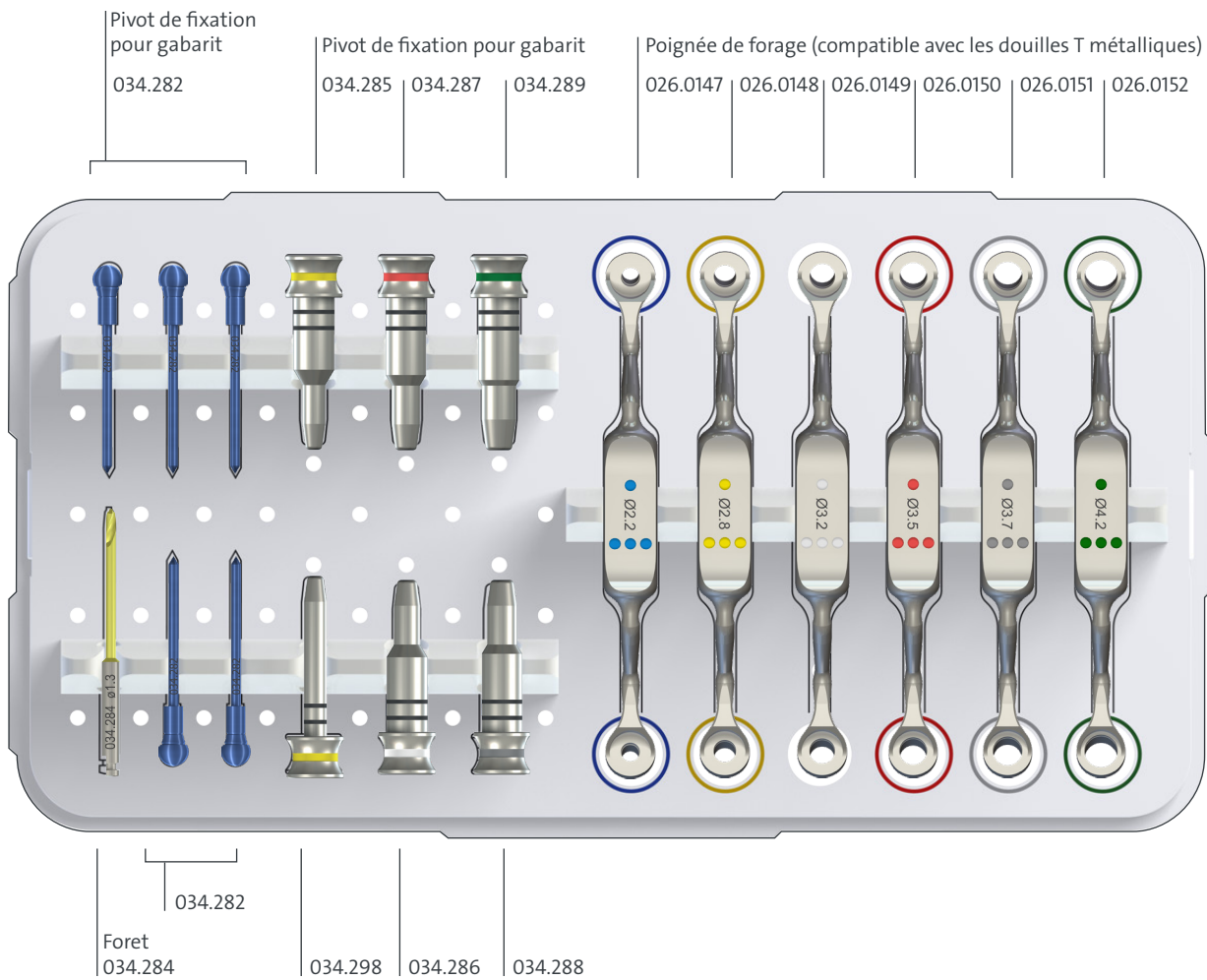



Module C Guided Surgery
041.772



BLX TLX Liste de commandes : BLX, TLX

MODULE A – LISTE DE COMMANDES

| TLX/BLX | | |
|----------|---|---|
| Réf. | Image | Produit |
| 041.761 |  | Straumann® Cassette modulaire, Module A |
| 041.766 |  | Plateau pour clé à cliquet du module A |
| 046.119 |  | Clé à cliquet |
| 066.1100 |  | Dispositif dynamométrique |
| 046.064 |  | Clé de désolidarisation |
| 041.764 |  | Plateau à œillets, 3 petits + 3 grands |
| 046.400 |  | SCS Tournevis pour clé à cliquet, extra court |
| 046.401 |  | SCS Tournevis pour clé à cliquet, court |
| 046.402 |  | SCS Tournevis pour clé à cliquet, long |
| 046.410 |  | SCS Tournevis pour contre-angle, extra court |
| 046.411 |  | SCS Tournevis pour contre-angle, court |
| 046.412 |  | SCS Tournevis pour contre-angle, long |
| 041.771 |  | Plateau pour jauge de profondeur d'implant |
| 066.2000 |  | Jauge de profondeur de l'implant |

| | | |
|----------|---|---|
| 041.762 |  | Plateau à œillets, 6 petits |
| 026.0022 |  | BL Trépan osseux 1 |
| 026.0023 |  | BL Trépan osseux 2 |
| 026.0024 |  | BL Trépan osseux 3 |
| 044.304 |  | Trépans osseux RN/RT |
| 044.305 |  | Trépans osseux WN/WT |
| 041.762 |  | Module A, plateau à œillets, 6 petits |
| 036.3300 |  | RT Fraise profilée, courte, pour implants Ø 3,75/Ø 4,8 mm |
| 036.3301 |  | RT Fraise profilée, longue, pour implants Ø 3,75/Ø 4,8 mm |
| 036.3302 |  | WT Fraise profilée, courte, pour implants Ø 5,5/Ø 6,5 mm |
| 036.3303 |  | WT Fraise profilée, longue, pour implants Ø 5,5/Ø 6,5 mm |

Pour les instruments supplémentaires, brucelles, tournevis SA, veuillez vous référer à la page 4 *Liste complète du module A*.

BLX TLX Liste de commandes : BLX, TLX


MODULE B – LISTE DE COMMANDES

| TLX/BLX | | |
|----------|-------|---|
| Réf. | Image | Produit |
| 041.776 | | Straumann® Cassette modulaire, Module B, Base + Couvercle |
| 041.777 | | Module B, Plateau d'instruments coniques |
| 044.003 | | Fraise boule, Ø 2,3 mm |
| 044.004 | | Fraise boule, Ø 3,1 mm |
| 026.0056 | | Foret-aiguille, long, Ø 1,6 mm |
| 066.1301 | | X VeloDrill™, court, Ø 2,2 mm |
| 066.1302 | | X VeloDrill™, court, Ø 2,8 mm |
| 066.1303 | | X VeloDrill™, court, Ø 3,2 mm |
| 066.1304 | | X VeloDrill™, court, Ø 3,5 mm |
| 066.1305 | | X VeloDrill™, court, Ø 3,7 mm |
| 066.1306 | | X VeloDrill™, court, Ø 4,2 mm |
| 066.1307 | | X VeloDrill™, court, Ø 4,7 mm |
| 066.1308 | | X VeloDrill™, court, Ø 5,2 mm |
| 066.1309 | | X VeloDrill™, court, Ø 6,2 mm |
| 066.1701 | | X VeloDrill™, long, Ø 2,2 mm |
| 066.1702 | | X VeloDrill™, long, Ø 2,8 mm |
| 066.1703 | | X VeloDrill™, long, Ø 3,2 mm |
| 066.1704 | | X VeloDrill™, long, Ø 3,5 mm |
| 066.1705 | | X VeloDrill™, long, Ø 3,7 mm |
| 066.1706 | | X VeloDrill™, long, Ø 4,2 mm, BLX |
| 066.1707 | | X VeloDrill™, long, Ø 4,7 mm, BLX |

| | | |
|----------|--|---|
| 046.799 | | Guide de parallélisme, Ø 2,2 mm |
| 046.800 | | Jauge de profondeur, Ø 2,8 mm |
| 046.801 | | Jauge de profondeur, Ø 3,2 mm |
| 046.802 | | Jauge de profondeur, Ø 3,5 mm |
| 046.803 | | Jauge de profondeur, Ø 3,7 mm |
| 046.804 | | Jauge de profondeur, Ø 4,2 mm |
| 046.805 | | Jauge de profondeur, Ø 4,7 mm |
| 046.806 | | Jauge de profondeur, Ø 5,2 mm |
| 046.807 | | Jauge de profondeur, Ø 6,2 mm |
| 066.4201 | | Instrument de vissage d'implant pour clé à cliquet, court |
| 066.4207 | | Instrument de vissage d'implant pour clé à cliquet, moyen |
| 066.4202 | | Instrument de vissage d'implant pour clé à cliquet, long |
| 066.4101 | | Instrument de vissage d'implant pour contre-angle, court |
| 066.4107 | | Instrument de vissage d'implant pour contre-angle, moyen |
| 066.4102 | | Instrument de vissage d'implant pour contre-angle, long |

BLX TLX Configuration du module A : BLX, TLX

Module A 041.761

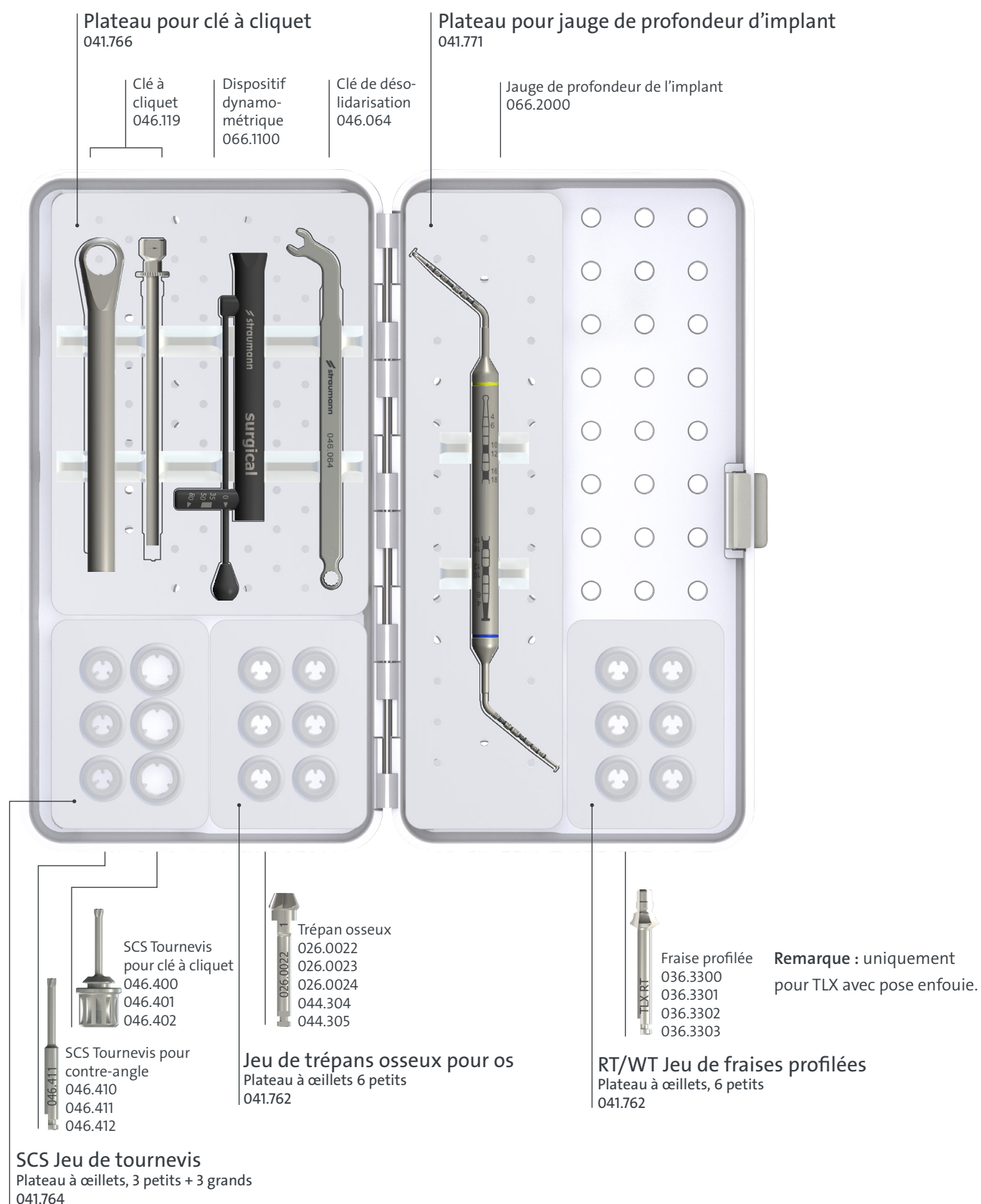

BLX TLX Configuration du module B : BLX, TLX

Plateau d'instruments coniques 041.777

Instrument de vissage d'implant pour clé à cliquet
066.4201
066.4207
066.4202

Instrument de vissage d'implant pour contre-angle
066.4101
066.4107
066.4102

Guide de parallélisme 046.799

Jauge de profondeur 046.801

Jauge de profondeur 046.803

Jauge de profondeur 046.805

Jauge de profondeur 046.807

Jauge de profondeur 046.800

Jauge de profondeur 046.802

Jauge de profondeur 046.804

Jauge de profondeur 046.806

Ø 3.1
Ø 2.3
Ø 1.6

long
court

| | Ø 3.5 | Ø 3.75 | Ø 4.0 | Ø 4.5 | Ø 5.0 | Ø 5.5 | Ø 6.5 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| soft | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.5 |
| medium | 2.8 (3.5) | 3.2 (3.7) | 3.5 (3.7) | 3.7 | 4.2 (4.7) | 4.7 | 5.2 (6.2) |
| hard | 3.2 (3.5) | 3.5 (3.7) | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 6.2 |

Fraise ronde
044.004
044.003

Foret
aiguille
026.0056

X VeloDrill™
066.1702
066.1302

X VeloDrill™
066.1704
066.1304

X VeloDrill™
066.1706
066.1306

X VeloDrill™
066.1308

X VeloDrill™
066.1701
066.1301

X VeloDrill™
066.1703
066.1303

X VeloDrill™
066.1705
066.1305

X VeloDrill™
066.1707
066.1307

X VeloDrill™
066.1309

BLX TLX Liste de commandes : BLX, TLX guidé

MODULE A – LISTE DE COMMANDES

| TLX/BLX Guidé | | |
|---------------|-------|---|
| Réf. | Image | Produit |
| 041.761 | | Straumann® Cassette modulaire, Module A |
| 041.766 | | Plateau pour clé à cliquet du module A |
| 046.119 | | Clé à cliquet |
| 066.1100 | | Dispositif dynamométrique |
| 046.064 | | Clé de désolidarisation |
| 041.764 | | Plateau à œillets, 3 petits + 3 grands |
| 046.400 | | SCS Tournevis pour clé à cliquet, extra court |
| 046.401 | | SCS Tournevis pour clé à cliquet, court |
| 046.402 | | SCS Tournevis pour clé à cliquet, long |
| 046.410 | | SCS Tournevis pour contre-angle, extra court |
| 046.411 | | SCS Tournevis pour contre-angle, court |
| 046.412 | | SCS Tournevis pour contre-angle, long |
| 041.771 | | Plateau pour jauge de profondeur d'implant |
| 066.2000 | | Jauge de profondeur de l'implant |
| 041.762 | | Plateau à œillets, 6 petits |
| 026.0022 | | BL Trépan osseux 1 |
| 026.0023 | | BL Trépan osseux 2 |
| 026.0024 | | BL Trépan osseux 3 |
| 044.304 | | Trépans osseux RN/RT |
| 044.305 | | Trépans osseux WN/WT |
| 041.762 | | Module A, plateau à œillets, 6 petits |

| | | |
|----------|--|---|
| 036.3300 | | RT Fraise profilée, courte, pour implants Ø 3,75/Ø 4,8 mm |
| 036.3301 | | RT Fraise profilée, longue, pour implants Ø 3,75/Ø 4,8 mm |
| 036.3302 | | WT Fraise profilée, courte, pour implants Ø 5,5/Ø 6,5 mm |
| 036.3303 | | WT Fraise profilée, longue, pour implants Ø 5,5/Ø 6,5 mm |





























Pour les instruments supplémentaires, brucelles, tournevis SA, se référer à la page 4 *Liste complète du module A*.





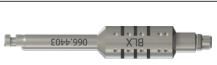










MODULE B – LISTE DE COMMANDES

| TLX/BLX Guidé | | |
|---------------|-------|---|
| Réf. | Image | Produit |
| 041.776 | | Straumann® Cassette modulaire, Module B, Base + Couvercle |
| 041.780 | | Module B, Plateau d'instruments coniques guidés |
| 034.010 | | Emporte-pièce pour muqueuse, Ø 3,4 mm guidé |
| 034.011 | | Emporte-pièce pour muqueuse, Ø 4,0 mm guidé |
| 034.012 | | Emporte-pièce pour muqueuse, Ø 4,7 mm guidé |
| 034.215 | | Fraise plate Ø 2,8 mm |
| 034.415 | | Fraise plate Ø 3,5 mm |
| 034.615 | | Fraise plate Ø 4,2 mm |
| 066.1301 | | X VeloDrill™, court, Ø 2,2 mm |
| 066.1302 | | X VeloDrill™, court, Ø 2,8 mm |
| 066.1303 | | X VeloDrill™, court, Ø 3,2 mm |
| 066.1304 | | X VeloDrill™, court, Ø 3,5 mm |
| 066.1305 | | X VeloDrill™, court, Ø 3,7 mm |
| 066.1306 | | X VeloDrill™, court, Ø 4,2 mm |
| 066.1307 | | X VeloDrill™, court, Ø 4,7 mm |
| 066.1308 | | X VeloDrill™, court, Ø 5,2 mm |
| 066.1309 | | X VeloDrill™, court, Ø 6,2 mm |

BLX TLX Liste de commandes : BLX, TLX guidé

MODULE C – LISTE DE COMMANDES

| | | |
|----------|---|--|
| 066.1501 |  | X VeloDrill™, moyen, Ø 2,2 mm |
| 066.1502 |  | X VeloDrill™, moyen, Ø 2,8 mm |
| 066.1503 |  | X VeloDrill™, moyen, Ø 3,2 mm |
| 066.1504 |  | X VeloDrill™, moyen, Ø 3,5 mm |
| 066.1505 |  | X VeloDrill™, moyen, Ø 3,7 mm |
| 066.1506 |  | X VeloDrill™, moyen, Ø 4,2 mm |
| 066.1701 |  | X VeloDrill™, long, Ø 2,2 mm |
| 066.1702 |  | X VeloDrill™, long, Ø 2,8 mm |
| 066.1703 |  | X VeloDrill™, long, Ø 3,2 mm |
| 066.1704 |  | X VeloDrill™, long, Ø 3,5 mm |
| 066.1705 |  | X VeloDrill™, long, Ø 3,7 mm |
| 066.1706 |  | X VeloDrill™, long, Ø 4,2 mm |
| 066.1707 |  | X VeloDrill™, long, Ø 4,7 mm |
| 046.799 |  | Guide de parallélisme, Ø 2,2 mm |
| 046.800 |  | Jauge de profondeur, Ø 2,8 mm |
| 046.801 |  | Jauge de profondeur, Ø 3,2 mm |
| 046.802 |  | Jauge de profondeur, Ø 3,5 mm |
| 046.803 |  | Jauge de profondeur, Ø 3,7 mm |
| 046.804 |  | Jauge de profondeur, Ø 4,2 mm |
| 046.805 |  | Jauge de profondeur, Ø 4,7 mm |
| 046.806 |  | Jauge de profondeur, Ø 5,2 mm |
| 046.807 |  | Jauge de profondeur, Ø 6,2 mm |
| 066.4403 |  | BLX Instrument de vissage d'implant guidé pour contre-angle |
| 066.4404 |  | BLX Instrument de vissage d'implant guidé pour clé à cliquet |
| 037.3000 |  | TLX Instrument de vissage d'implant guidé pour clé à cliquet, S |
| 037.3001 |  | TLX Instrument de vissage d'implant guidé pour contre-angle, S |
| 037.3002 |  | TLX Instrument de vissage d'implant guidé pour clé à cliquet, SP |
| 037.3003 |  | TLX Instrument de vissage d'implant guidé pour contre-angle, SP |

| TLX/BLX Guidé | | |
|---------------|---|---|
| Réf. | Image | Produit |
| 041.772 |  | Straumann® Cassette modulaire, Module C, Guided Surgery |
| 026.0147 |  | Poignée de perçage, Ø 2,2 mm, 1 mm/3 mm* |
| 026.0148 |  | Poignée de perçage, Ø 2,8 mm, 1 mm/3 mm* |
| 026.0149 |  | Poignée de perçage, Ø 3,2 mm, 1 mm/3 mm* |
| 026.0150 |  | Poignée de perçage, Ø 3,5 mm, 1 mm/3 mm* |
| 026.0151 |  | Poignée de perçage, Ø 3,7 mm, 1 mm/3 mm* |
| 026.0152 |  | Poignée de perçage, Ø 4,2 mm, 1 mm/3 mm* |
| 034.284 |  | Foret pour pivot de fixation pour gabarit, Ø 1,3 mm |
| 034.282 |  | Pivot de fixation pour gabarit, Ø 1,3 mm |
| 034.298 |  | Pivot de fixation pour gabarit, Ø 2,8/2,8 mm |
| 034.285 |  | Pivot de fixation pour gabarit, Ø 5/2,8 mm |
| 034.286 |  | Pivot de fixation pour gabarit, Ø 5/3,2 mm |
| 034.287 |  | Pivot de fixation pour gabarit, Ø 5/3,5 mm |
| 034.288 |  | Pivot de fixation pour gabarit, Ø 5/3,7 mm |
| 034.289 |  | Pivot de fixation pour gabarit, Ø 5/4,2 mm |

*Poignée de perçage compatible avec des douilles métalliques. Pour une utilisation avec des douilles en PEEK, utilisez les poignées autobloquantes avec les références 034.291 - 034.296.



Configuration du module A : BLX, TLX Guidé

Module A
041.761

Plateau pour clé à cliquet
041.766

Clé à cliquet
046.119

Dispositif dynamométrique
066.1100

Clé de désolidarisation
046.064

Plateau pour jauge de profondeur d'implant
041.771

Jauge de profondeur de l'implant
066.2000

SCS Tournevis pour clé à cliquet
046.400
046.401
046.402

SCS Tournevis pour contre-angle
046.410
046.411
046.412

SCS Jeu de tournevis
Plateau à œillets, 3 petits + 3 grands
041.764

Trépan osseux
026.0022
026.0023
026.0024
044.304
044.305

Jeu de trépan osseux pour os
Plateau à œillets 6 petits
041.762

Fraise profilée
036.3300
036.3301
036.3302
036.3303

RT/WT Jeu de fraises profilées
Plateau à œillets, 6 petits
041.762

Remarque : uniquement pour TLX avec pose enfouie.

BLX TLX Configuration du module B : BLX, TLX guidé

Plateau d'instruments coniques guidés 041.780

BLX
Instrument de vissage d'implant guidé pour clé à cliquet
066.4404

TLX
Instrument de vissage d'implant guidé pour clé à cliquet
037.3000
037.3002

BLX
Instrument de vissage d'implant guidé pour contre-angle
066.4403

TLX
Instrument de vissage d'implant guidé pour contre-angle
037.3001
037.3003

Guide de parallélisme 046.799

Jauge de profondeur 046.801

Jauge de profondeur 046.803

Jauge de profondeur 046.805

Jauge de profondeur 046.807

Jauge de profondeur 046.800

Jauge de profondeur 046.802

Jauge de profondeur 046.804

Jauge de profondeur 046.806

4 6 10 12 16 18

≡ long

≡ moyen

≡ court

| | Ø 3.5 | Ø 3.75 | Ø 4.0 | Ø 4.5 | Ø 5.0 | Ø 5.5 | Ø 6.5 |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|
| soft | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.5 |
| medium | 2.8 (● 3.5) | 3.2 (● 3.7) | 3.5 (● 3.7) | 3.7 | 4.2 (● 4.7) | 4.7 | 5.2 (● 6.2) |
| hard | 3.2 (● 3.5) | 3.5 (● 3.7) | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 6.2 |

Emporte-pièce pour muqueuse
034.012
034.011
034.010

Fraise plate
034.615
034.415
034.215

X VeloDrill™
066.1702
066.1502
066.1302

X VeloDrill™
066.1701
066.1501
066.1301

X VeloDrill™
066.1703
066.1503
066.1303

X VeloDrill™
066.1704
066.1504
066.1304

X VeloDrill™
066.1705
066.1505
066.1305

X VeloDrill™
066.1706
066.1506
066.1306

X VeloDrill™
066.1707
066.1507
066.1307


X VeloDrill™
066.1708
066.1508
066.1308


X VeloDrill™
066.1709
066.1509
066.1309



Configuration du module C : BLX, TLX guidé

Module C Guided Surgery
041.772

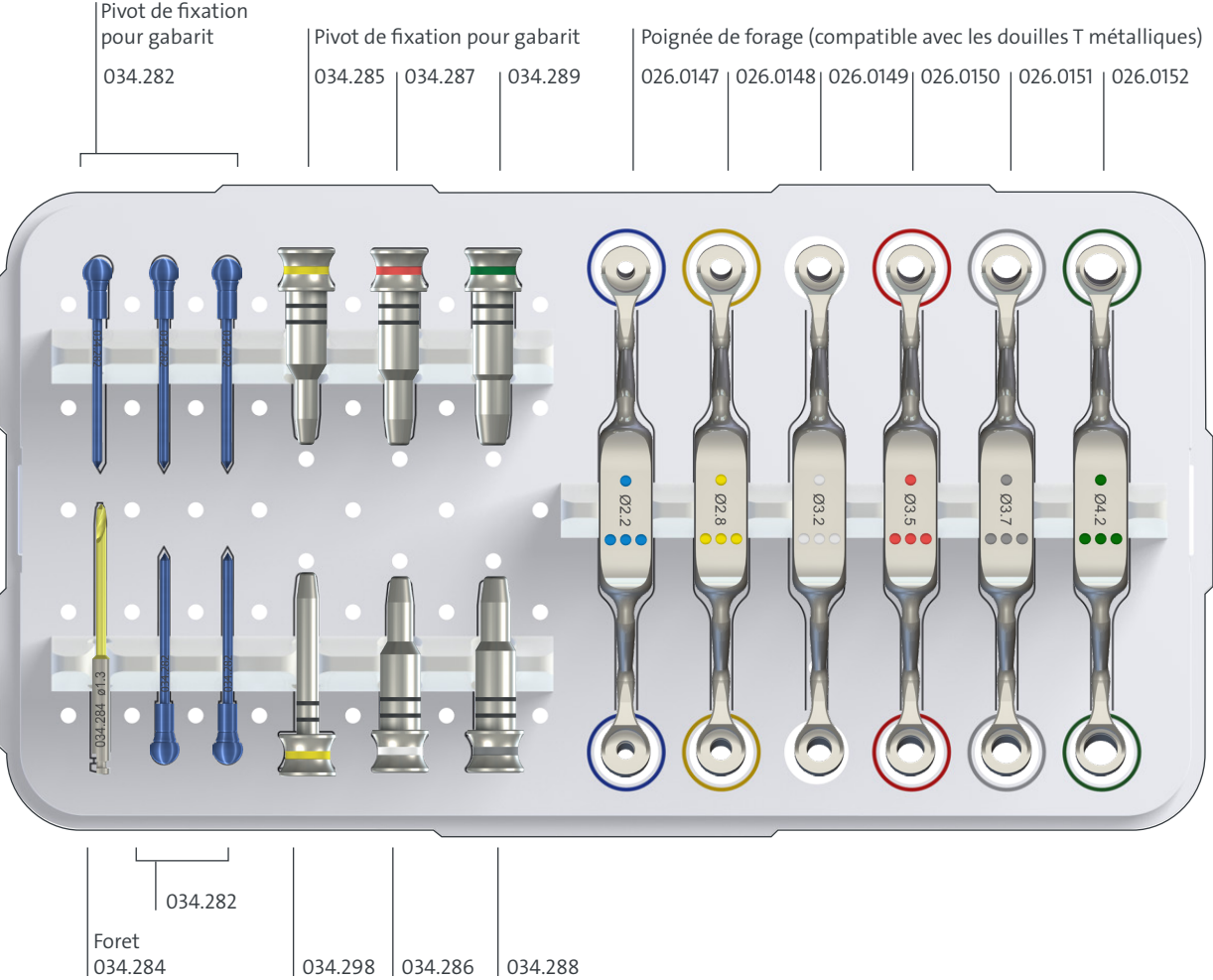

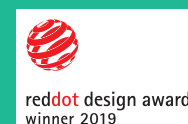

702824/fr/1/08-FR 04/24

International Headquarters

Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

Dispositifs médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Classes I, IIa et IIb, TÜV Süd CE0123. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions qui accompagnent ce dispositif médical. Produits non-remboursés par les organismes de santé.

© Institut Straumann AG, 2024. Tous droits réservés.
Straumann® et/ou les autres marques de commerce et logos de Straumann® mentionnés ici sont des marques de commerce ou des marques déposées de Straumann Holding AG et/ou de ses sociétés affiliées.

